



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

OTOSCOPIO PARKER PARKER OTOSCOPE OTOSCOPE PARKER OTOSCOPIO PARKER OTOSCÓPIO PARKER PARKER-OTOSKOP ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ PARKER PARKER مناظير الأذن

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها


REF

31435 - 31436 - 31437 - 31440
31441 - 31474 - 31475



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan



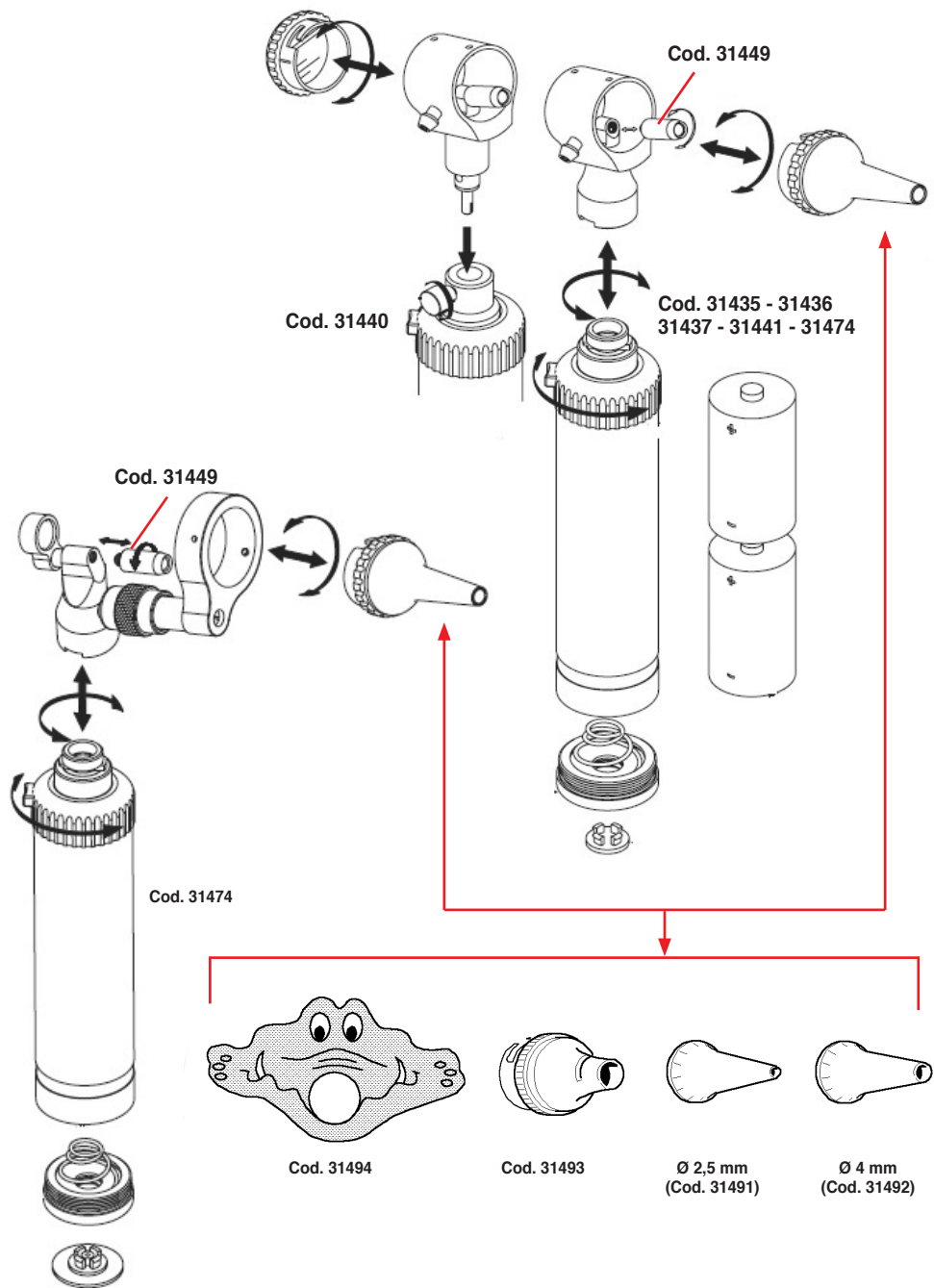

المواصفات

منظار الأذن PARKER هو جهاز طبي مفيد للفحص المباشر للقناة السمعية الخارجية وغشاء طبلة الأذن. يتم توريد منظار الأذن في طرازين.

تتمثل الاختلافات بين الطرازين في اللون ونوع التوصيل بين الرأس والمقبض؛ منظار الأذن PARKER (كود 31440)، يمتلك وصلة بمسمار، في حين تمتلك الطرُز الأخرى وصلة بمزلاج وتتوفر بالألوان الأخضر (كود 31435)، الأزرق (كود 31436)، والأصفر (كود 31437).

كلا الطرازين مزودين بمصباح 2.5 فولت وتتم تغذيتهما بطاريتين قلويتين من النوع "C" - 1.5 فولت.

تحتوي مناظير الأذن PARKER على مقياس الجهد لضبط شدة الضوء وعدسة قابلة للفك والتي تتيح تكبيراً بمقدار 3X ومخرج لنفخ الهواء لفحص حركة غشاء طبلة الأذن.

يتم توريد مناظير الأذن PARKER في علب من الجلد الصناعي ومجهزة بثلاثة عدسات قابلة للتعقيم في الأوتوكلاف بقطر 2,5 - 3,5 - 4,5 مم.

لا يمكن استخدام المنتج أو أجزاء منه لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في الاستخدام المقصود في هذا الدليل.

المتطلبات

استخدم المنتج، حصرياً، مع بطاريات قلووية من النوع "C" مركبة بشكل صحيح. لا تعمره في الماء! أثناء التنظيف، تأكد من ألا تبيّل حامل المصباح أو حجيرة البطارية بالماء أو بالسوائل الأخرى.



المنتج مخصص فقط للاستخدام من قبل طاقم عمل طبي مؤهل، في مجال الإسعاف؛ المنتج غير مخصص للاستخدام في غرفة العمليات.



لا تستخدم الجهاز إذا اكتشفت وجود أضرار به. توجه إلى الموزع. تجنب أية عملية إصلاح مؤقتة. لا يجب تنفيذ عمليات الإصلاح إلا بقطع الغيار الأصلية التي يجب تركيبها وفقاً للاستخدام المنصوص عليه.

المنتج مصنوع من مواد مقاومة للتآكل والظروف البيئية المتوقعة نتيجة الاستخدام العادي، وبالتالي لا يتطلب عناية خاصة؛ ومع ذلك، يجب حفظه في بيئة مغلقة، مع تجنبه التعرض للضوء والعوامل الجوية، مع العناية بحمايته من الغبار من أجل التمكن من ضمان شروط النظافة الصحية له. يوصى أيضاً بالاحتفاظ بالمنتج في مكان يسهل على المشغلين الوصول إليه عند الحاجة.

التفريغ



نذكر بأن عناصر التغليف (الورق، السلوفان، الدبابيس المعدنية، شريط لاصق، الخ) يمكن أن تقطع و/أو تجرح إذا لم يتم التعامل معها بحذر. يجب إزالتها بالوسائل المناسبة وإدارتها من قبل طاقم عمل مصرح له؛ ينطبق الأمر نفسه على الأدوات المستخدمة لإزالة مواد التغليف (المقص، السكاكين، الخ).

بمجرد فتح العبوة، فإن أول عملية يجب القيام بها تتمثل في فحص عام للقطع والأجزاء التي يتكون منها المنتج؛ تأكد من وجود جميع المكونات اللازمة ومن حالتها المثالية.

التركيب

قبل مواصلة الاستخدام، يجب إدخال البطاريات في الحجيرة، باتتبع الإجراء التالي:

- افتح حجيرة البطاريات عن طريق لف في اتجاه عقارب الساعة الحلقة الخاصة الموجودة في قاعدة المقبض.
- بمجرد الفتح، أدخل البطاريات مع الالتزام بالاتجاه الصحيح (القطبية).
- لإغلاق الحجيرة اربط الحلقة في اتجاه عقارب الساعة مع التحقق من أن البطاريات ملاصقة للأقطاب.
- إذا استدعت الضرورة فصل مجموعة رأس منظار الأذن عن المقبض، اعمل على النحو التالي:
- بالنسبة لإصدار PARKER المزود بوصلة ذات مسمار، يجب فك قليلاً القرص الموجود على الجانب وسحب الرأس مع الإمساك بإحكام بمقبض منظار الأذن.
- لإعادة تجميع مجموعة الرأس على المقبض، يكفي إعادة إدخالها في المقر المخصص لها، مع التأكد من أن الشق الموجود في قاعدة الرأس يتوافق مع القرص. ستكتفي الآن بممارسة ضغط طفيف نحو الأسفل وربط القرص.

- بالنسبة لإصدار PARKER COLOUR المزود بوصلة ذات مزلاج، يجب الإمساك بالمقبض ورأس منظار الأذن، وإدارة الرأس في عكس اتجاه عقارب الساعة، حتى تسمع نقرة، في هذه النقطة سٹسحب الرأس.
- لإدخال الرأس، يكفي أن تطابق أخاديد الوصلة ذات المزلاج، والضغط على الرأس للأسفل، وإدارتها في اتجاه عقارب الساعة.
- بالنسبة لإزالة واستبدال العدسات، فإن العملية بسيطة للغاية:

أدر العدسة في عكس اتجاه عقارب الساعة واستخرجها من مقرها، من أجل إدخالها سيكفي إدخال العدسة في مجموعة الرأس مع العمل على تطابق الأخدود مع الدبوس الصغير وتنفيذ دوران صغير في اتجاه عقارب الساعة.

- من أجل تفكيك وحدة منظار الأذن (مع نظام القفل بمسمار) اعمل على النحو التالي:
- بالنسبة لمناظير الأذن ذات نظام القفل المزود بمسمار، فإنه من الضروري فك قليلاً القرص الموجود على الجانب وسحب الرأس نحو الأعلى مع الإمساك بمقبض منظار الأذن.
- لإعادة تركيب الرأس على المقبض، يكفي إدخالها مجدداً في المقبض، مع مراعاة أن يتطابق الشق الموجود في قاعدة الرأس مع الشق الخاص بالقرص. في هذه النقطة، يكفي ممارسة ضغط طفيف نحو الأسفل وربط القرص.

في حالة مناظير الأذن ذات نظام القفل المزود بمزلاج، اعمل على النحو التالي:

من الضروري الإمساك بالمقبض ورأس منظار الأذن وتدوير الرأس بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة. في هذه المرحلة، من الممكن خلع الرأس. لإعادة تركيب الرأس، طابق أخاديد الوصلة ذات المزلاج على كل من الرأس والمقبض، ثم ادفع الرأس لأسفل، وأدراها في اتجاه عقارب الساعة.

الإجراء المطلوب لإزالة المنظار واستبداله بسيط للغاية:

- أدر العدسة في عكس اتجاه عقارب الساعة وأخرجها من مقرها.
- لإعادة تثبيت العدسة، أدخلها في الرأس عن طريق العمل على مطابقة الأخاديد مع الدبوس الصغير وإدارتها في اتجاه عقارب الساعة.

التشغيل

اختر أولاً حجم ونوع العدسة التي تناسب قناة الأذن المراد فحصها. بالإضافة إلى العدسات الموجودة في العبوة، يتم توريد حسب الطلب، عدسات الاستخدام الواحد بأحجام واللوان مختلفة (كود 31491 - 31492 - 31495) والتي بواسطة المهايئ (الكود 31493) يمكن تركيبها على الرأس. يمكن أيضاً توفير مهايئ لتركيب عدسة للاستخدام الواحد على شكل تمساح (الرمز 31494) (انظر الشكل التوضيحي)، تُستخدم العدسة الأخيرة لفحص الأطفال.

سيضطر الفاحص بعد ذلك إلى تشغيل الضوء من خلال الحلقة المحببة السوداء في الجزء العلوي من المقبض. تم تجهيز كلا الطرازين PARKER بمقياس الجهد، وبالتالي فإنه عند الضغط على الزر الأبيض وتدوير الحلقة تدريجياً في اتجاه عقارب الساعة تزداد شدة الضوء، وعند تدوير الحلقة في الاتجاه المعاكس تنخفض شدة الضوء حتى ينطفئ. بمجرد انتهاء فترة استخدام الجهاز، تأكد من إطفاء الضوء.

الصيانة

افحص حالة البطاريات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود علامات للتآكل أو الأكسدة، في حالة وجود ذلك استبدلها ببطاريات قلبية جديدة. تعامل مع البطاريات بحذر نظراً لأن السوائل التي تحتويها يمكن أن تهيج الجلد والعينين.



- يجب فحص المنتج بجميع أجزائه، قبل استخدامه وكذلك بعد تنظيفه.
- تأكد من أن اتصال الرأس بالمقبض مثالي وأن مقياس الجهد يعمل بشكل صحيح.
- إذا كان ضوء المصباح متقطعاً أو لا يضيء، افحص المصباح والبطاريات ونقاط التلامس الكهربائية.
- إذا توقف المصباح عن العمل، يمكنك استبداله بقطعة غيار أصلية (كود 31449). لاستبدال المصباح، من الضروري سحب العدسة وفك المصباح في عكس اتجاه عقارب الساعة، في هذه المرحلة، أعد ربط المصباح الجديد (انظر الشكل)، نوصى باستخدام المصابيح الأصلية فقط.

قبل إزالة المصباح، من الضروري التأكد من أن الجهاز مطفأ منذ بضع دقائق، وإلا فإنك تخاطر بالإصابة باللسعات.



- تأكد من أن العدسة نظيفة جيداً، وإلا سيكون من الضروري إزالتها عن طريق تدويرها في عكس اتجاه عقارب الساعة وسحبها نحوك.
- بعد التنظيف، أعد إدخال العدسة في مقرها عن طريق العمل على تطابق الأخدود مع الدبوس الصغير وتنفيذ دوران صغير في اتجاه عقارب الساعة (انظر الشكل).
- من المناسب التأكد من أنك تمتلك دائماً مصباح وبطاريات جديدة متاحة للحصول على أقصى قدر من الإضاءة.
- يمكن تنظيف رأس ومقبض منظار الأذن بقطعة قماش مشربة بمطهر، لا يمكن غمرهما في سائل.
- يمكن تعقيم العدسات في ماء مغلي أو في الأوتوكلاف، في هذه الحالة يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة 121°؛ بدلاً من ذلك، يمكن استخدام مطهرات على البارد بالتركيز المستخدم لتعقيم الأدوات الطبية.
- لقد تم تصميم المنتج بحيث يدوم مدى الحياة، وهو مقاوم لمعظم المواد الكيميائية باستثناء الكيتونات والمذيبات والمواد التي تحتوي على مواد MEK لإزالة المينا.

جميع الأجزاء الداخلية مصنوعة من النحاس ومطلية بالكروم للوقاية من الصدأ. إذا تعرض المصباح للرطوبة، أزل البطاريات وجففها جيداً لتجنب الدوائر القصيرة

اتباع التعليمات للاستخدام		الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية	
يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس		يحفظ في مكان بارد وجاف	
تاريخ التصنيع		الشركة المصنعة	
رقم الدفعة		كود المنتج	
B جهاز من النوع		جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 2017/745 (UE)	
جهاز طبي		WEEE التخلص	

التصريف

ممنوع تصريف المنتج هذا بالوحدة إلى النفايات المنزلية الأخرى. من واجب المستهلكين القيام بتصريف الأجهزة المراد التخلص منها بإحضارها إلى مراكز التجميع المشار إليها والخاصة في تجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واستغلالها من جديد.

شروط ضمان جيمما GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيمما GIMA لمدة 12 شهر.