

SFIGMOMANOMETRO YTON BRACCIALE UNICO
YTON SPHYGMOMANOMETERS ONE PIECE CUFF
SPHYGMOMANOMÈTRE YTON BRASSARD UNIQUE
ESFIGMOMANÓMETRO YTON BRAZALETE ÚNICO
MANGUITO ÚNICO PARA ESFIGMOMANÓMETRO DE YTON
BLUTDRUCKMESSGERÄT YTON
UNIVERSALMANSCHETTE
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ YTON
جهاز قياس ضغط الدم YTON طوق مطاطي أحادي

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung
Οδηγίες χρήσης - دليل الإستعمال والرعاية

REF HS-20H (Gima 32692)

Honsun (Nantong) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road
Economic & Technological Development
Area 226009 Nantong City, People's Republic of China
Made in China




Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Importado por/ Importiert von / Εισαγωγή από/ بائريتس:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

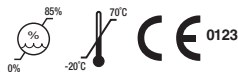

3 نفخ الطوق المطاطي:

اغلق صمام الهواء الموجود على المنفاخ عن طريق تدوير المسمار في اتجاه عقارب الساعة، ولا تفرط في التشديد على غلقه. اخفض على المنفاخ باليد التي استخدمتها بمعدل سرعة ثابت حتى يستقر مؤشر المقياس على 30 مم زئبق أعلى من قيمة ضغطك العددي. وإذا كنت لا تعرف ذلك، قم بالنفخ حتى 200 مم زئبق

4 قراءة ضغط الدم الانقباضي الضغط الأعلى

افتح ببطء صمام الهواء عن طريق تدوير المسمار في اتجاه عكس اقارب الساعة واحتفظ بسماعة الطبيب موضوعة على الشريان الذراعي. معدل تفريغ الهواء الصحيح هو أمر ضروري للحصول على قراءة دقيقة، ولذلك يجب عليك ممارسة وإتقان معدل تفريغ الهواء الموصى به من 2 م 3 مم زئبق في الثانية أو علامتين على مقياس الضغط لكل نبضة من نبضات القلب. لا يجب الاحتفاظ بالطوق المطاطي منفوخ أكثر من اللازم. وحالما يبدأ الطوق المطاطي في الانقباض، يجب عليك سماع سماعة الطبيب بعناية. لاحظ القراءة على المؤشر بمجرد سماع نبضة خافتة وإيقاعية. وهذا يشير إلى القراءة الانقباضية العالية لضغط الدم. إنصت بعناية وأبدا التعود على معرفة صوت النبض. وبعد مرة واحدة من التعرف على صوت النبض، يجب عليك التحقق من هذا الإجراء مع الطبيب المعالج.

5 قراءة ضغط الدم الانبساطي الضغط الأدنى

دع الضغط يستمر في الانخفاض بنفس معدل تفريغ الهواء. وعندما يتم التوصل إلى انخفاض ضغط الدم الانبساطي الخاص بك، فإن الصوت يتوقف. قم بتفريغ صمام الطوق المطاطي بالكامل. قم بإزالة الطوق المطاطي من الذراع وساعة الآن من الأنتين.

6 سجل القراءات الخاصة بك:

ركز القياس مرتين أو أكثر. تذكر تسجيل القراءات الخاصة بك وتسجيل توقيت القياس اليومي يجب ان يتم مباشرة بعد الانتهاء من قياء الضغط. والتوقيت المناسب لقياس ضغط الدم هو الساعة المبكرة من الصباح أو قبل تناول وجبة المساء. تذكر ان طبيبك المختص هو الشخص الوحيد المؤهل لتحليل ضغط الدم.

7 مواصفات:

مدى القياس: 0 إلى 300 مم زئبق
الدقة: ±3 مم زئبق
سلم التدرج: 2 مم زئبق
الصيانة
إن العناية والصيانة المناسبين تضمنان لمجموعة ضغط الدم الخاصة بك سنوات من الخدمة المرضية.

القواعد الأساسية:

تفادي سقوط وإرتجاج الجهاز
لا تنفخ أبدا أكثر من 300 مم زئبق
لا تعرض أبدا الطوق المطاطي للأشعة الشمسية المكثفة
لا تلمس أبدا نسيج الطوق المطاطي أو أجزائه بأداة حادة، لأن ذلك قد يسبب ضرراً
قم بتفريغ الطوق المطاطي تماماً من الهواء بالكامل قبل تخزينه
لا تقم بفك المانومتر تحت أي ظرف من الظروف
قم بتخزين الجهاز بالكامل في الحافظة المزود بها الجهاز للحفاظ على سماعة الطبيب وجميع الأجزاء الأخرى نظيفة.
درجة حرارة التخزين: من 20 إلى 70 درجة مئوية، ودرجة رطوبة 85% (دون تكاثف).
إسبح المانومتر والمنفاخ مقطعة من قماش مبللة. التعقيم ليس ضروري على شرط أن لا تلامس أجزاء الجهاز مباشرة، جسم المريض.
قم بإزالة الكيس أولاً، وإسبح الشريط اللاصق بقطعة قماش رطبة. يمكن غسل الطوق المطاطي بالصابون والماء البارد.
جميع الأطواق المطاطية الأخرى، ولكن يجب عليك بعد ذلك شطف الطوق المطاطي بماء صاف وتركه في الهواء الجاف

GIMA اميجي نأماض طوورش

رهش 12 قدمل GIMA اميجي سي ايل بى B2B نأماض قىب طلي

ARABIC

نشكركم على شراء هذا الجهاز ذات الجودة الجيدة والذي يسمح لكم بالتحكم ومراقبة ضغط الدم بسهولة وفعالية في أي مكان وفي أي وقت!

ما هو ضغط الدم؟

ضغط الدم هو مقياس ضغط الدم المتدفق داخل جدران الشرايين. ويتغير ضغط الدم الشرياني باستمرار خلال الدورة القلبية. ويُعرّف ارتفاع مستوى ضغط الدم في الدورة القلبية باسم ضغط الدم الانقباضي. أما انخفاض مستوى ضغط الدم فيعُرف باسم ضغط الدم الانبساطي؛ وقراءة كليهما هو أمر ضروري كي تتمكن من تقييم حالة ضغط الدم. ولمة العديد من العوامل مثل النشاط البدني، اللقي أو إوقات اليوم يمكن أن تؤثر على ضغط دمك. وعادة يكون ضغط الدم منخفض في الصباح، ويرتفع من بعد الظهر حتى المساء. وينخفض ضغط الدم في فصل الصيف، في حين يرتفع أثناء فصل الشتاء.

ما هو ضغط الدم الطبيعي؟

يُتباين ضغط الدم من شخص إلى آخر، كما أنه يعتمد على عدة عوامل مثل: العمر، الوزن والحالة البدنية لكل جنس. والقراءة العادية المنطوية لضغط الدم للأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عام هي 120/80. تذكر ان طبيبك المختص هو المخول لتحديد ما إذا كانت قراءة ضغط الدم التي تحصل عليها هي طبيعية بالنسبة لك.

كيفية وطريقة قياس ضغط الدم؟

1 قم باسترخاء نفسك واستعد لأخذ الموضع الصحيح

ثبت الذراع لقياس ضغط الدم على نفس الارتفاع الرأسي للقلب. وقم بتمديد الذراع دون أن يكون في حالة توتر أو جمود. قم بوضع الذراع على سطح مستو، مثل المكتب مع وضع كف اليد متجه إلى أعلى. قم بالاحتفاظ بتثبيت الذراع أثناء الاستمرار في قياس ضغط الدم.

2 طريقة ارتداء الطوق المطاطي المزود بالشريط اللاصق ووضع سماعة الطبيب

قم بلف الطوق المطاطي 2-3 سنتيمتر حول منحنى الكوع على الذراع العلوية اليسرى العارية؛ اغلق الطوق المطاطي عن طريق إغلاق الشريط اللاصق. يجب لف الطوق المطاطي بشكل ملاصق ولسن ومريح حول الذراع دون أن يكون خفيف جداً. ويجب ترك مسافة أصبع أو اصبعين بين الطوق المطاطي والذراع. لا تقم بلف الطوق المطاطي فوق الملبس. بالنسبة للقوق المطاطي ذات الحلقة المعدنية على شكل حرف D، قم بسحب طرف الطوق المطاطي الخالي من خلال الحلقة المعدنية D وإغلقه. الطوق المطاطي عن طريق إغلاق الشريط اللاصق. في الأجهزة المعدة للإستخدام المنزلي، يجب وضع شواء سماعة الطبيب المنمجة في الطوق المطاطي على الشريان الذراعي.



	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Fabricante GR - Παραγωγός SA - مصنع الماكشال ةمصنوع الماكشال	 IT - Limite di temperatura GB - Temperature limit FR - Limite de température ES - Limite de temperatura PT - Limite de temperatura DE - Limite de temperatura GR - Όριο θερμοκρασίας SA - قارحال ةجرد دح
	IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consultar as instruções de uso DE - Consulte as instruções de uso GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SA - صرحو وقذب أرقا - مادتستسالا تاميل عت	 IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Guardar ao abrigo da luz solar GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία SA - سمشال بوض ن غ لذي عب ظفحي
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Código produto GR - Κωδικός προϊόντος SA - كودم الماكشال	 IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Número de lote GR - Αριθμός παρτίδας SA - ةمكدل مكار
	IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον SA - فاجو دراب ناكم يف ظفحي	 IT - Limite di umidità GB - Humidity limit FR - Limite d'humidité ES - Límite de humedad PT - Limite de humidade DE - Limite de humidade GR - Όριο υγρασίας SA - ةبوظرلا قبس ن دح
	IT - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB - Authorized representative in the European community FR - Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES - Representante autorizado en la Comunidad Europea PT - Representante autorizado na União Europeia DE - Representante autorizado na União Europeia GR - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση SA - يف دم عت لثلم - يوروبوروالا داجتالا	 IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (εισαδείξεις) SA - قءارق: ةمارق (تاريذحتال) تاميل عتالا
	IT - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR - Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE ES - Producto sanitario para diagnóstico in vitro conforme con la Directiva 98/79/CE PT - Dispositivo médico de diagnóstico in vitro em conformidade com a Diretiva 98/79 / CE DE - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE GR - Διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν in vitro που συμμορφώνεται με την οδηγία 98/79 / CE SA - 98/79/CE يف صيغشالت البطل زاهجال يف هيجوتل ل لاثمالمال يف ربتخمالمال يف	