



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA A SOLLEVAMENTO AUTOMATICO
AUTOMATIC STRETCHER
BRANCARD À LEVAGE AUTOMATIQUE
KRANKENBETT MIT AUTOMATISCHER HEBEVORRICHTUNG
CAMILLA DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA
AMACA DE RODAS DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA
ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ
نقالة الرفع الأوتوماتيكية

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd

No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

GIMA 34055

REF

TD01013A

EC REP

SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



I. المقاييس التقنية

1. مفاص المنتج: (الطول * العرض * الارتفاع):
الموضع العالي: 193 * 60 * 88 سم
الموضع المنخفض: 190 * 60 * 21 سم
2. أقصى زاوية للخلف: 60°
3. حجم الكرتون (1 قطعة): 195 * 61 * 26 سم
4. الوزن الصافي: 40 كجم، الوزن القائم: 45 كجم
5. تحمل الوزن: 159 كجم

II. كيفية الاستعمال

1. سطح النقالة مصنوع من مرتبة إسفنجية ناعمة، مما يجعل المريض يشعر بالراحة. يمكن لأحد الطاقم الطبي دفع العربة إلى سيارة الإسعاف أو إرسالها إلى الجناح.
2. عند الحاجة إلى وضع منخفض، اسحب مقبض الأمان للخارج ثم اضغط عليه، سينخفض ارتفاع النقالة تلقائيًا إلى أسفل.
3. عند الوصول إلى الوجهة، وسحب مقبض الأمان، ستفتح أرجل النقالة تلقائيًا.
4. يوجد جهاز قفل مرن للإرجاع على جانبي النقالة وأجزاء الساق. اقلها بإحكام عند رفعها من أجل سلامة المرضى، وعدم خروج المرضى.
5. بالضغط على الزر الموجود أسفل النقالة، سيرتفع أو ينخفض جزء الرأس.

III. الاستخدام من أجل

تمت الموافقة على هذا العنصر من خلال ممارسة العيادة، وهو مناسب لسيارة الإسعاف ومستشفى ميدان المعركة، وصالة الألعاب الرياضية، وما إلى ذلك لنقل الجرحى والمرضى. يمكن استخدامه أيضًا في التشغيل العام.

IV. يحذر الآتي







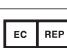




1. عند حمل المرضى بهذه النقالة، تأكد من قفل جهاز الحاجز بإحكام وربط حزام الأمان من أجل السلامة.
2. أثناء التشغيل العام، احرص على عدم تمزيق سطح النقالة.

V. الصيانة

1. حافظ على النظافة الروتينية (بما في ذلك التعقيم).
2. في كثير من الأحيان تحقق مما إذا كانت أي أجزاء مفكوكة أم لا.

VI. التخزين والنقل

1. قم بتخزين هذا المنتج في مكان مقاوم للرطوبة وغير قابل للتآكل.
2. يمكن لمركببة النقل الشائعة أن تحمل هذا المنتج.
3. يُحظر قلبه رأسًا على عقب أثناء النقل والتخزين. رُص البضاعة حسب التعليمات المطبوعة على العبوة.

الشركة المصنعة		كود المنتج	
جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 2017/745 (UE)		رقم الدفعة	
الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية		يحفظ في مكان بارد وجاف	
جهاز طبي		يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس	
ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي		اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام	
معرف فريد		تاريخ التصنيع	
		نم دروسم	

شروط ضمان جيمَا GIMA يُطبق ضمان B2B القياسي جيمَا GIMA لمدة 12 شهر.