


اقرأ كافة التعليمات قبل الاستخدام. استشر الطبيب قبل الاستخدام.

مواعيل الاستعمال: غير مخصص للأشخاص الذين يزيد وزنهم عن 242 رطلاً (110 كجم) - غير مخصص للاستخدام في الظروف الجليدية أو الرطبة. - غير مخصص للأشخاص الذين يعانون من

الحساسية ضد اللاتكس.
دليل التعليمات: لفتح عكازك، أمسك بالمقبض واترك أجزاء العمود القابلة للطي تتكشف نحو الأرضية. لمنع السقوط، عليك دائمًا القصص للتأكد من أن أجزاء العمود الفردية (الشكل 1) مثبتة بشكل آمن في مكانها.
تحذير: لا تقم بتفكيك هيكل Trusty Canet™. يحتوي العكاز على حبل مرئي في الداخل. إن التحريك غير المتحكم فيه للحبل المرن في الداخل يمكن أن يسبب إصابات خطيرة لأجزاء الجسم غير المحمية، وخاصة العينين، إذا تم قطع أو تآكل أو تلف الحبل الداخلي، فتوقف عن الاستخدام. لا تقم بتمديد الحبل أكثر مما هو مطلوب لتفكيك أو تجميع الأجزاء. لضبط ارتفاع عكاز Trusty Canet™ الخاص بك: قم بفك قفل الانثناء (الشكل 2) عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة لمدة دورات. اضغط على زر القفل (الشكل 3)، واسحب المقبض لأعلى لزيادة الطول، أو اضغط لأسفل على المقبض لتقصيره. تذكر أن تعيد ربط قفل الانثناء بعد ضبط Trusty Canet™ على الارتفاع المطلوب. تحذير: لمنع السقوط، تأكد دائمًا من تثبيت أجزاء العمود الفردية في مكانها بشكل آمن وتفعيل زر القفل بالكامل.
نصي Trusty Canet™: يمكن طي عكاز Trusty Canet™ بسهولة إلى حجم مناسب للسفر من خلال فصل أجزاء العمود الأربعة الفردية عن بعضها البعض. امسك كل مجموعة من أجزاء العمود بالقرب من المفصل، واستخدمها بعناية (الشكل 4). سيتم طي أجزاء العمود الفردية معًا بدقة (الشكل 5).
لاستخدام الأضواء على عكاز Trusty Canet™ الخاص بك: يتم تنشيط الأضواء عن طريق الضغط على الزر الموجود في الجزء العلوي من مقبض Trusty Canet™ (الشكل 6). الضغط على الزر مرة واحدة سيؤدي إلى تنشيط الأضواء، والضغط عليه مرة أخرى سيؤدي إلى إيقاف تشغيلها. سيتم إطفاء الأضواء تلقائيًا بعد 20 دقيقة.

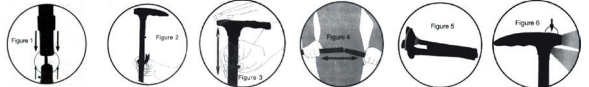

العناية بعكاز Trusty Canet™ الخاص بك: لاستبدال البطاريات، استخدم مفك براغي برأس فيليبس لفك حجرة البطارية الموجودة أسفل مقبض Trusty Canet™. قم بإزالة أي بطاريات فارغة، وتخلص منها بشكل صحيح. استخدم 3 بطاريات AAA، ولم يمتدأد + و - كما هو موضح، ولا تلمس البطاريات مع بعضها البعض. أعد وضع البطاريات على باب حجرة البطارية، واحكم ربطه. الفحص العكاز بانتظام بحثًا عن علامات التآكل، بما في ذلك أي تآكل في الحبل المطاطي أو تآكل في الأقدام المطاطية. إذا لاحظت أي علامات تآكل، توقف عن الاستخدام على الفور.
تحذير: لا تخطئ البطاريات القديمة والجديدة. لا تخطئ البطاريات القلوية أو القياسية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكادميوم).
شروط ضمان GIMA: ينطبق ضمان Gima القياسي بين الشركات لمدة 12 شهرًا.

