

## ISOLERINGSROCK FÖR ENGÅNGSBRUK

### SVENSKA

**Produktnamn** Isoleringsrock för engångsbruk

**Produktkod** FGIS-PP25-M, FGIS-PP25-L

**Produktstorlek** Enhet: cm

GIMA-KOD	21131	21132
FULL GUARD KOD	FGIS-PP25-M	FGIS-PP25-L
Storlekar	115x137 (M)	120x150 (L)
Längd (Axel till nederkant)	115	120
Bredd (ett skikt)	137	150
Bältlängd	180	180
Ärmlängd	58	59
Avvikelse	±2	±2

**Produktmodell** Typ av skyddsrock M/L

**Struktur och sammansättning** Produkten använder non-woven-material med 25g PP. Den består av framsida, baksida, ärmar, knytband och ärmuppslag. Den teknologiska processen består i utskärning, ultraljudsvetsning av band, karborrband, ärmuppslag, vikning och tätning.

**Avsedd användning** Produkterna används huvudsakligen för allmän isolering inom öppenvård, akutmottagning, undersökningsrum, rengöringsrum, laboratorier med mera. De är avsedda att användas av sjukvårdspersonal på sjukhus och kliniker för att uppehålla en god hygienisk nivå och bidra till kontroll av infektioner.

**Kontraindikationer** Produkterna kan endast användas en gång och ska omedelbart användas efter att förpackningen öppnats. Om produkten är skadad, kan den vara våt eller möglig. Använd inte.

**Så här används produkten** Öppna förpackningen och ta ur produkten, skaka försiktigt skyddsrocken, lyft kragens sidor, sätt in händerna i ärmarna och sträck ut armarna framåt och dra åt skärpen.

**Förvaring** Förvaras i ett rent rum med relativ fuktighet som inte överskrider 80%, inga frätande gaser, och förvaras svalt, torrt och väl ventilerat.

### Varning

1. Denna produkt är för engångsbruk, återanvänd inte.
2. Denna produkt är för engångsbruk, dela aldrig med andra personer.
3. Det är förbjudet att använda när förpackningen eller produkterna är skadade.

**Anm.: Alla allvariga skador som uppstått i relation till anordningen ska rapporteras till tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där användaren eller patienten befinner sig.**






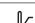


**Giltighet** 3 år.

**Tillverkningsdatum** Se datum på förpackningen

**Utgångsdatum** Se datum på förpackningen

### GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

 REF	Produktkod		Skyddas från solljus		Förvara på svalt och torrt ställe
 LOT	Satsnummer		Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
	Tillverkare		Tillverkningsdatum		Medicintekniska produkten
	Ej steril		Utgångsdatum		Använd inte en förpackning som är skadad
	Fuktighetsgräns		Läs bruksanvisningen		Engångsanordning, får ej återanvändas
	Temperaturgräns		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen		Ömtålig, hanteras varsamt
	Den här sidan upp		Hanteras varsamt		

M21131-M-Rev.1-05.24

**REF**

**FGIS-PP25-M (GIMA 21131)**  
**FGIS-PP25-L (GIMA 21132)**



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
Yongan East Avenue,  
Xianning Economic Development  
Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China

**EC REF**

Humiss Beratung  
GmbHGneisenaustraße  
8.40477, Düsseldorf, Deutschland

Importerad av / Εισαγωγή από:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**MD**