

# JELCO®

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Straight)

SV BRUKSANVISNING

CE 0086

Manufacturer:  
**Smiths Medical International Ltd.**  
 St. Crispin Way, Haslingden,  
 Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.  
 Tel: +44 (0)1706 233800

Distributed by:  
**Smiths Medical ASD, Inc.**  
 201 West Queen St,  
 Southington, CT 06489, USA.  
 Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:  
**Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.**  
 61 Brandl Street, Eight Mile Plains,  
 Brisbane, QLD 4113, Australia.  
 Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com

smiths medical

CCN-004/008/015 REV.001 06/12



STERILE EO



SV Svenska

Försiktighetsåtgärd

Får inte återanvändas

Får ej omsteriliseras

Katalognummer

Batchkod

Tillverkningsdatum

Använd före

Tillverkare

Innehåller inte naturligt latexgummi

Kvantitet

Steriliserad med etylenoxid

Vätskeledarkomponenter är ej pyrogena

Temperaturbegränsning

Denna sida upp

Bräcklig, hanteras varsamt

Får inte användas om förpackningen är skadad

Förvaras torrt

Skyddas för solljus

Svenska

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Rak)

BRUKSANVISNING



Instruktionerna är avsedda för användning av följande Jelco® produkter:  
**7130 till 7138 och 7188** Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G till 22 G  
**7260 till 7269 och 7288** Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G till 24 G

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning av produkten. Läs igenom hela bruksanvisningen, inklusive varningar och försiktighetsmeddelanden före användningen av denna produkt. Om dessa varningar, försiktighetsmeddelanden och instruktioner inte följs ordentligt kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador på patienten och/eller klinikern.

OBS! DISTRIBUTUERA DENNA BIPACKSEDEL TILL ALLA STÄLLEN DÅR PRODUKTEN FINNS.

### 1. BESKRIVNING:

Varje Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ består av en införarnål och ett integrerat spetskydd. Huvuddelarna är: (1) nålavfasning, (2) nål, (3) kateter, (4) kateterfattning, (5) spetskydd, (6) flödeskammare, (7) flödespluggdon, (8) skida, (9) skydd till nålfattning.

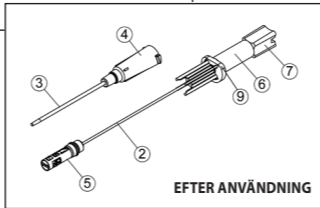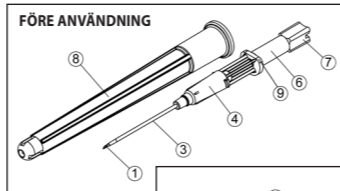

KATETERNS MÅTT OCH REFERENSTABELL

Mått	14G	16G	18G	20G	22G	24G
Färg	Orange	Grå	Grön	Rosa	Blå	Gul

Denna anordning är endast avsedd för engångsbruk och levereras steril och icke-pyrogen. De material som används för tillverkning av denna röntgentäta

kateter för intravenöst bruk innehåller inte latex och är fria från PVC och DEHP.

### 2. INDIKATIONER:

- En korrekt placerad Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ ger åtkomst till en ven eller artär för provtagning av blod, övervakning av blodtryck eller administrering av vätskor.
- Det spetskydd som läses fast över nålen när nålen dras tillbaka hjälper till att minska risken för oavsiktliga nålstick.
- Dessa katetrar kan användas till varje patientgrupp med hänsyn tagen till patientens storlek, lämplighet för den lösning som ska infunderas och behandlingens längd,
- Katetrar på 14 till 24 G kan användas med kraftdrivna injektorer upp till 300 psi (ca 2070 kPa eller 21 at).
- KONTRAIKATIONER:**  
Inga kända

### 4. VARNINGAR:

- För korrekt användning MÅSTE DEN KLINISKA PERSONALEN VARA UTBILDAD I VENPUNKTIONSTEKNIK och följa bruksanvisningen. Om dessa anvisningar inte följs ordentligt kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador på patienten och/eller läkaren.
- För att undvika risken för blodprop:
  - SKÅR INTE AV KATETERN och använd inte vassa instrument i närheten av katetern.
  - För aldrig in införarnålen på nytt i katetern eftersom katetern kan slitas av.
- För att undvika ett oavsiktligt nålstick:
  - BÖJ INTE NÅLEN när kateteruppsättningen förs in, träs över eller tas ut.
  - Om venpunktionen inte lyckas ska säkerhetsmekanismen aktiveras och både nål och kateter kasseras.
  - Om anordningen mot förmodan inte läses ut, ska vassa delar kasseras omedelbart i en godkänd behållare för detta.
- Nålen är inte avsedd att användas med en ledare – om en sådan används skulle aktiveringen av spetskyddet förhindras
- Manipulera inte spetskyddsensheten före eller efter användning.
- FÖRSIKTIGHETER:**
- Produkten är steril, icke-toxisk och icke-pyrogen, såvida inte förpackningen är öppnad, våt eller skadad. Kassera om produkten eller förpackningen är öppen, våt eller skadats.
- Öppenhet måste säkerställas innan kraftdrivna injektorer används. Användning tillsammans med kraftdrivna injektorer vid ett tryck på över 300 psi (ca 2070 kPa eller 21 at) kan orsaka läckage och/eller skador hos produkten. Katetern får inte knickas eller tappas till vid användning av en kraftdriven injektor. Se till att injektorn är korrekt kalibrerad och automatiskt kommer att stanna vid ett tryck som överstiger 300 psi.

### 6. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Denna anordning är utformad för att hjälpa till att minska risken för oavsiktliga nålstick. Förutom denna bruksanvisning bör sjukvårdspersonal följa de rekommendationer som fastställts i CDC- och OSHA-standarder (USA) eller motsvarande lokala föreskrifter för patogener som överförs via

nl

Voor eenmalig gebruik.

**Niet opnieuw gebruiken: Voor een beoogde werking moeten medische hulpmiddelen over specifieke materiaaleigenschappen beschikken. Deze eigenschappen zijn na verificatie alleen voor eenmalig gebruik geschikt verklaard. Probeer niet het hulpmiddel opnieuw te bewerken met hergebruik als doel. Zulke pogingen kunnen een ongunstige invloed op de integriteit van het hulpmiddel hebben of kunnen een verslechterde werking van het hulpmiddel veroorzaken.**

**Steriel tenzij de doos geopend of beschadigd is. Vernietigen na eenmalig gebruik. Mag niet opnieuw worden gesteriliseerd.**

sv

Engångsartikel.

**Får inte återanvändas: Medicintekniska utrustningar kräver specifika egenskaper hos materialet för att de ska fungera såsom avsett. Dessa egenskaper har endast verifierats för engångsbruk. Varje försök att uppbeta utrustningen för efterföljande återanvändning kan förorsaka skador på utrustningen eller leda till försämrad funktion.**

**Steril tills förpackningen öppnats eller skadats. Förstör efter en användning. Sterilisera inte på nytt.**

blod vid införing, underhåll och kassering av varje kateter för intravenöst bruk för att undvika risken för att exponeras för blod.

- Följ aktuella institutionella föreskrifter och rutiner för införing, underhåll och borttagning av katetern.
- Katetern är kortare än införarnålen. Därför kan tillbakaflöde av blod förekomma innan kateterspetsen kommit helt in i blodkärlet. För in vid behov försiktigt katetern och nålen tillsammans för att säkerställa fullständigt inträde i blodkärlets lumen. För att undvika oavsiktlig punktion av kärlets bakre vägg ska nålen sänkas tills den är parallell med huden.
- Se till att anslutningen mellan vätskeadministrering och kateterfattning är säker för att förhindra läckage.
- Se till att katetern är stabiliserad i patienten. Inkorrekt stabilisering kan leda till att åtkomsten till blodkärlet går förlorad.
- BRUKSANVISNING:**  
Följ standardföreskrifter under placering, användning och borttagning av en kateter för intravenöst bruk på grund av risken för exponering för patogener som överförs via blod.

- Välj ut och förbered insättningsstället enligt institutionella föreskrifter. Applicera kompressen.
- Ta bort skidan med en rak utåtriktad förelse och inspektera anordningen. Se till att den färgkodade kateterfattningen sitter fullständigt fast och kontrollera att nålavfasningen är i uppåtriktat läge.
- Håll i anordningen genom att hålla i den genomskinliga cylinderformade flödeskammaren. Kontrollera att den plana delen av nålfattningsskyddet och nålavfasningen är i uppåtriktat läge.
- Förankra blodkärlet genom att försiktigt sträcka huden och för in nålen i huden och blodkärlet i en lämplig vinkel.
- Tillbakaflöde av blod i flödeskammaren bekräftar inträde i blodkärlet.
- Minska vinkeln och för försiktigt in anordningen för att säkerställa inträdet av katetern i blodkärlet.
- Ta bort kompressen.
- Innan du tar bort nålen trycker du med fingrarna på blodkärlet distalt till kateterspetsen och griper tag i kateterfattningen. Ta sedan bort nålen genom att dra den rakt bakåt. Spetskyddet läser automatiskt fast över nålspetsen.  
OBS! Ett lätt motstånd kommer att uppstå när den skyddade nålen tas bort från kateterfattningen.
- OBS! Sätt inte tillbaka spetskyddet i fattningen efter att det har tagits bort.**
- Anslut slangen för intravenös administrering och täck insättningsstället med ett förband enligt institutionella föreskrifter.
- Kassera omedelbart enheten i en punkteringsbeständig, vätsketät behållare avsedd för kasserbara vassa föremål.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, Jelco designmärke och Smiths Medical designmärke är varumärken som tillhör Smiths Medical. ®-symbolen indikerar att varumärket registrerats hos amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnäms är handelsnamn, varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. Smiths Medical och Intuitive Surgical har inget samband med varandra. © 2012 Smiths Medical. Med ensamrätt.