



PROFESSIONELL STADIOMETER FÖR SPÄDBARN MOD. WH80



Läs denna handbok noggrant innan du använder instrumentet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH ANVÄNDNING.....	2
2. MONTERING AV STADIOMETERN MED SPÄDBARNSVÄGNING BABYTWO	2
3. MÄTNING	3



OBSERVERA!

Operatörerna måste läsa igenom denna handbok noggrant, följa dess instruktioner och bli bekanta med instrumentets korrekta förfaranden för användning och underhåll.

- Förvara denna handbok samt försäkran om överensstämmelse för konsultation och stöd för personalutbildning
- För bättre och längre livslängd för produkten är det bra att regelbundet utföra en grundlig allmän rengöring.
- Rengöringen av instrumentet ska utföras med en mjuk trasa, fuktad med vatten eller neutralt rengöringsmedel. Undvik användning av lösningsmedel och slipmedel.
- Vid långvarig inaktivitet av instrumentet, ta ut batterierna ur terminalen
- Se till att inte utsätta instrumentet för stötar eller överdriven mekanisk påfrestning under transport.
- I händelse av reparation eller service, vänd dig till din återförsäljare eller till ett auktoriserat servicecenter genom att kontakta **service2@wunder.it** eller **sales@wunder.it**

1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH ANVÄNDNING

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


MÄTOMRÅDE	35~80cm
DIVISION	1mm
MÅTT	W87 x L30 x H7cm
VIKT	700g
DRIFTSTEMPERATUR	10°C~40°C

2. MONTERING AV STADIOMETERN MED SPÄDBARNSVÄGNING BABYTWO


Gör på följande sätt för att installera den stadiometern för längdmätning:

A) Fäst stadiometersns hållare på vägningsplanet med de 2 medföljande krysskruvarna (Fig.a)	Fig.A	
B) Placera den stadiometern på den hållare som tidigare fästs vid vägningsplanet (Fig.b).	Fig.B	
C) Installationen är nu slutförd (Fig.c)	Fig.C	

3. MÄTNING

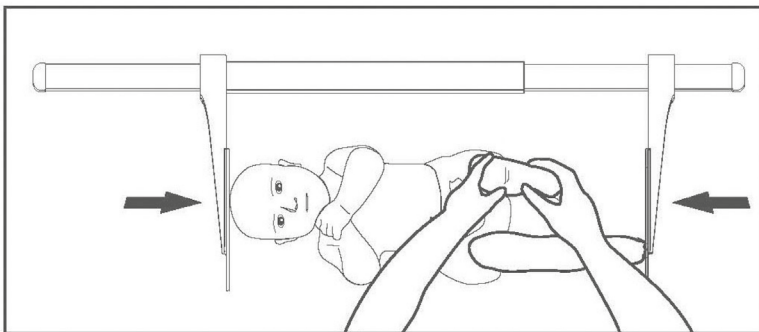

1. Vila barnets huvud lätt på plattan till vänster
2. Sträck ut barnets fötter

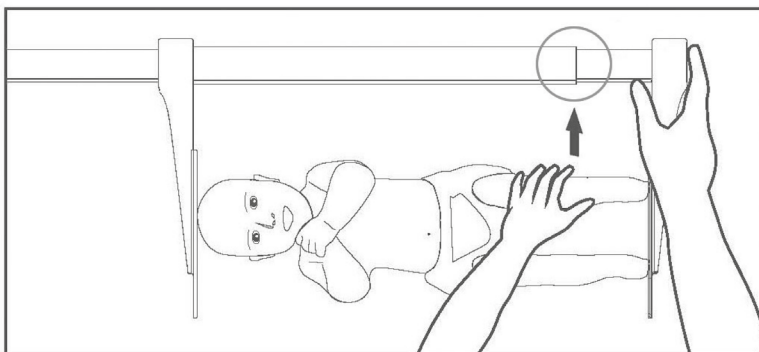

3. Flytta den högra plattan tills den rör vid barnets fötter
4. Barnets längd avläses vid den röda linjen på stadiometern



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it