



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE IN VETRO
GLASS DIGITAL SCALE
PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
GLASPERSONENWAAGE
BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL
BALANÇA DIGITAL DE VIDRO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
SZKLANA WAGA CYFROWA
چاگز ن م یلات یج ی د نازی م
DIGITAALINEN LASIVAAKA
STAKLENA DIGITALNA VAGA
ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG
CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ
DIGITAL GLASVÁG

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
ANVÄNDNINGSG- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

REF GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)

Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por/Hergestellt von/Zrobione przez/Ἐτιασμένο από/
GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS.CO.LTD.
Jin'an Road , Minzhong, Zhongshan 528441, China
Made in China

Importato e distribuito da/Imported and distributed by
GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



EGENSKAPER OCH SPECIFIKATIONER


- Auto PÅ
- Auto AV
- Viktenheter: kg, lb, st: lb
- Kapacitet; 150 kg/330lb/23st: 8lb
- Gradering: 0,1kg/0,2lb/0,2lb (1lb, ≥ 20 st)
- Anvisning om överbelastning: “— — — —”
- Indikation om låg batteriladdning “LÅ”
- Effekttillförsel: 1 x CR2032 batteri

Hel LCD-displayö




BYTA BATTERI

- Se till att +/- polerna är i korrekt riktning.
 - Använd rätt verktyg för att lossa batteriet ur facket om nödvändigt.
- Avlägsna isoleringsremsan före användning.

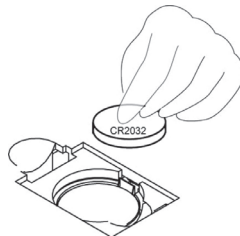

FUNKTIONSKNAPPAR

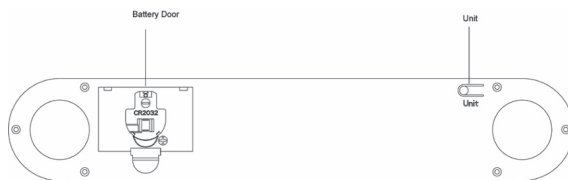

BRUKSANVISNING

1. Tryck på ENHETS-knappen för att slå på och välja enheten.
2. Placera vågen på en plan och slät yta, låt vågen stängas av automatiskt.
3. Användarställ på vågens plattform direkt, den blinkar och låser sig på LCD-displayen när vikten är stadig, sedan stängs den automatiskt av efter 10 sekunder.
4. Om ingen åtgärd utförs stängs den automatiskt av
5. När du inte använder den ska den läggas balanserad, lägg sedan inga föremål på vågen.



KOM IHÅG:

Använd inte vågen på en matta

För att säkerställa att du väger noga ska du när du flyttar vågen först slå på den (eller klicka på) och vänta tills den stängs av. Sedan kan du stå på plattformen igen och mäta din vikt. Lägg annars till vågens vikt till din egen.



BORTSKAFFNING:

Produkten får inte avyttras tillsammans med annat hushållsavfall. Användarna måste avyttra denna utrustning genom att föra till en särskild återvinningspunkt för elektrisk och elektronisk utrustning. För ytterligare information om återvinningspunkter kontakta lokala myndigheter, lokalt återvinningscenter eller affären där du köpte produkten. Om utrustningen inte bortskafts korrekt, kan böter och straffavgifter tillämpas i enlighet med nationell lagstiftning och förordningar.

GIMA GARANTIVILLKOR

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.