



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA VETERINARIA - PICCOLI ANIMALI

DIGITAL SMALL PET SCALE

BALANCE VÉTÉRINAIRE - PETITS ANIMAUX DIGITAL

BÁSCULA VETERINARIA DIGITAL - ANIMALES PEQUEÑOS

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ

CÂNTAR VETERINAR - ANIMALE MICI

VETERINÁRNÍ VÁHA PRO MALÁ ZVÍŘATA

VETERINÄRVÅG - SMÅ DJUR

VETERINARSKA VAGA - DIGITALNA VAGA ZA MALE KUĆNE LJUBIMCE

ELÄINLÄÄKÄRIVAACA - PIENET ELÄIMET

Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Εγχειρίδιο χρήστη - Manual de utilizare și întreținere - Návod k použití a údržbě
- Instruktioner för användning och underhåll - Priručnik za uporabu i održavanje - Käyttö- ja huolto-ohjeet

REF 6651 (GIMA 27261)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Κατασκευαστής /
Producent / Výrobce / Tillverkare / Proizvođač / Valmistaja:

Momert Zrt.

2400 Dunaújváros - HUNGARY,

Papírgyári út 12-14

Made in Hungary

Distribuito da / Distributed by / distribué par / distribuido por /
Διανέμεται από / Distribuit de / Distribuovano / Distribuerad av /
Distribuidora / Jakelija:

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Tack för att du köpt vår produkt. Vi önskar att produkten ska tillfredsställa dig under hela dess livslängd.

Vänligen läs noga hela bruksanvisningen innan du börjar använda produkten. Förvara bruksanvisningen på säker plats för framtida bruk. Se till att personer som använder produkten har kunskap om dessa instruktioner.

VIKTIGA INSTRUKTIONER FÖR SÄKERHETEN

- Se till att följa polerna som är markerade på batterierna när dessa sätts i eller byts ut.
- Om apparaten förblir inaktiv under längre tid, ta ur batteriet.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den används.
- Apparaten är inte avsedd att användas för personer (inklusive barn) med mindre fysisk, sensoriell eller mental förmåga eller liten erfarenhet eller kunskap om den, om inte under övervakning eller efter tillräcklig förberedning angående användningen av apparaten av en säkerhetsansvarig person. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Använd endast produkten för den användning som förutses i bruksanvisningen.
- Använd endast apparaten på en horisontell stabil yta.
- Stäng av apparaten och ta ur batteriet före rengöring, montering eller demontering av locket!
- Använd inte repande eller kemiskt frätande ämnen för att rengöra apparaten.
- Använd inte apparaten om den inte fungerar korrekt eller vid fall, skada eller exponering för någon vätska. För apparaten till auktoriserat servicecenter för provning och reparation.
- Apparaten är endast lämplig för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning.
- Förvara apparaten på avstånd från värmekällor som värmeelement, ugnar med mera. Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller fukt.
- Vidrör inte apparaten med våta eller fuktiga händer.
- Produkten är en känslig mätanordning. Undvik fall eller stötar.
- Reparera inte apparaten själv. Vänd dig till auktoriserat servicecenter.

FÖRSUMMAD EFTERLEVAND AV TILLVERKARENS INSTRUKTIONER KAN MEDFÖRA ATT RÄTTEN TILL REPARATION AV APPARATEN OGLITIGGÖRS!

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


- Automatisk funktion för väntetid
- Precisionsmätningssystem
- Funktion för visning av viktskillnad
- Tarafunktion
- Indikator för låg laddning på batteriet ("Lo")
- Automatisk avstängning

Tekniska parametrar

Spänning	2 litiumbatterier CR2032 på 3 V
Vägningintervall	20 kg
Viktökningar	5g
Viktenhet	Kg, Lb, St
Drift-/förvaringstemperatur	20-25 °C /15-40 °C
Skärmens dimensioner	LCD-diameter = 8,0 cm; 3,15 tum

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

- 1 Vägningssyta (platta)
- 2 Knapp PÅ/AV
- 3 TARA-knapp
- 4 Knapp Kg/Lb/St
- 5 Skärm

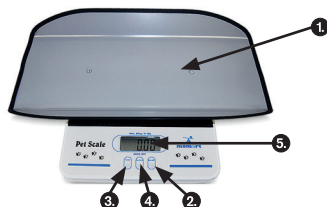

KNAPPAR

- Vågen kan slås på och stängas med knappen för PÅ/AV (tryck en gång).
- Med knappen KALIBRERING kan kalibreringsfunktionen användas. På skärmen visas "0.00" i 2 sekunder efter att knappen tryckts in.
- Knappen för kg, Lb, St är lämplig för att välja aktuell måttenhet; den inställda måttenheten kan avläsas på höger sida av skärmen.

ANVÄNDNING AV VÅGEN

- 1 Vågen fungerar med 2 utbytbara litiumbatterier. Avlägsna skyddsfilmerna före användning (Fig. 1).
2. Innan ett djur vägs, ska plattan skruvas fast vid mätytan så att den förblir stabil.
3. Tryck en gång på knappen PÅ/AV; på skärmen visas "0.00" (Fig. 2).
4. Placera djuret på vågen. Den uppmätta vikten visas på få sekunder och sparas automatiskt. Ett "M" visas som indikerar uppgifterna i minnet. Vid nästa vägning, visar skärmen den uppmätta vikten och skillnaden mellan den uppmätta vikten och föregående vikt i intervaller på 2 sekunder. Den sista vikt som mätts sparas automatiskt i fall att apparaten stängs, både manuellt och automatiskt.
5. Tryck på knappen PÅ/AV en gång för att stänga av vågen. Om vågen inte används på 30 sekunder, stängs den av automatiskt.



Fig. 1



Fig. 2

MINNESFUNKTION

Då vågen sätts på, visas ett "M" för att indikera att den sista vikten som mätts har sparats och att viktskillnaden kan visas. För att undvika att visa viktskillnaden, trycker du snabbt två gånger på knappen PÅ/AV för att radera data i minnet. På detta sätt försvinner "M" från skärmen. Även borttagningen av batteriet medför att minnet raderas

KALIBRERING

Om vikt tillsätts på plattan (lock, kudde och så vidare), om den extra vikten är mindre än 5 kg, visar skärmen "0.00" om du trycker på knappen KALIBRERING och den uppmätta vikten

blir lika med 20 kg. Om däremot den extra vikten är över 5 kg, och du trycker på knappen KALIBRERING visar skärmen "0.00", men den maximala uppmätbara vikten blir mindre än 20 kg (mer exakt: 20 kg minus extravikten).

ÖVRIG INFORMATION ANGÅENDE SKÄRMEN

Om texten visar "Lo" vid påslagning (Fig. 3) eller om skärmen är tom, är batteriet urladdat och ska bytas ut.



Fig. 3

Om texten "ERR" visas på skärmen (Fig. 4.), innebär det att vågen är utsatt för tung vikt och i så fall ska vikten minskas (en för tung last kan orsaka fel på sensorerna).



Fig. 4

Meddelandet "OUT2" på skärmen (Fig. 5.) indikerar ett fel på sensorerna (efter överbelastning eller plötslig tillämpning av en hög dynamisk last). Detta fall täcks inte av produktens garanti.



Fig. 5

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Apparatens yta ska endast rengöras med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel eller hårda objekt eftersom det kan skada apparatens yta!

Tvätta aldrig apparaten under rinnande vatten, skölj inte och sänk aldrig i vatten!

REPARATION OCH UNDERHÅLL

Alla viktiga åtgärder för underhåll eller reparation kräver åtkomst till produktens interna komponenter och ska utföras av specialiserat servicecenter.

MILJÖSKYDD

- Materialen för emballage och föråldrade apparater ska återvinnas.
- Lådan som använts för transport ska bortscaffas med sorterat avfall.
- Påsarna i polyeten ska lämnas till återvinning.



Bortskaffande: Produkten får inte avyttras med annat hushållsavfall. Användarna ska avyttra utrustningar som ska skrotas genom att föra dem till den indikerade uppsamlingsplatsen för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.

GIMA GARANTIVILLKOR

Gima tillämpar 12 månaders B2B-standardgaranti.