

**seca 210**

**seca**  
Precision for health

## Hjärtliga gratulationer

Med mätmattan seca 210 har du fått en exakt och robust längdmättningsanordning för spädbarn. Mätmattan seca 210 är avsedd för användning hos barnläkare, på sjukhusets barnavdelning eller för husbesök. Mätmattan kan rullas ihop och behöver därför mycket liten plats. Dessutom kan mattan hängas upp t.ex. på en vägg i hålen på huvudsidan.

## Säkerhet

Innan den nya mätmattan används skall man ta sig tid till att läsa igenom följande säkerhetsanvisningar.

Beakta anvisningarna i bruksanvisningen.

- Låt aldrig ett spädbarn ligga utan tillsyn på mätmattan.
- Längdmätningen får endast utföras på underlag där spädbarnet inte kan falla ner.
- För att undvika onödig smittorisk skall man rengöra och desinficera mätmattan regelbundet.
- För en exakt längdmätning kan en medhjälpare vara bra att ha till hands.


## Användning

### Mätning:

1. Lägg spädbarnet på mätmattan. Spädbarnets huvud måste ligga på mätmattans huvudanslag (1).
2. Skjut fotanslaget (2) mot barnets fötter med höger hand och håll fast barnet med vänster hand.

3. Sträck på barnets ben genom att försiktigt trycka ner knäna mot mätmattan.
4. Lägg an fotanslaget (2) rätvinkligt mot spädbarnets fotsulor.
5. Avläs kroppslängden på markeringarna på mätmattans (3) botten.

Om man följer ovanstående steg uppnås en mätnoggrannhet på bättre än  $\pm 5$  mm.

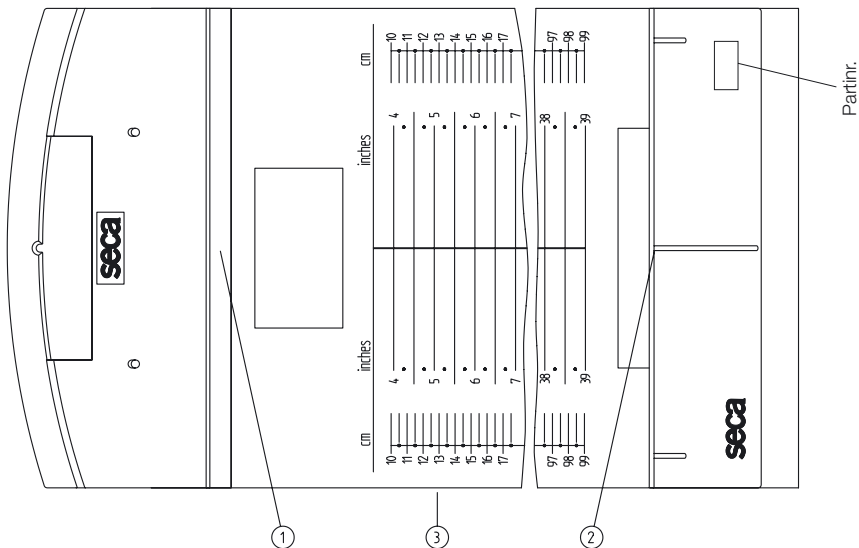

## Rengöring

Mätattan skall rengöras efter behov med ett vanligt hushållsrengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Beakta tillverkarens anvisningar.

## Tekniska data

Mätområde:	100-990 mm / 4-39 inch
Indelning:	5 mm / 1/4 inch
Noggrannhet:	bättre än ± 5 mm
Mått (B x H x D):	300x140x1340 (mm)
Vikt:	ca. 500 g
Temperaturområde:	+10°C till +40°C
Medicinsk produkt enligt direktiv 93/42/EWG:	Klass 1 med mätfunktion

## Sophantering

När mätattan inte längre kan användas skall den lämnas till föreskriven sophantering.

## Garanti

För brister vilka kan hänföras till materialeller fabriktionsfel lämnas en garantifrist på två år från leveransdatum. Undantagna från detta är alla rörliga delar, som t.ex. batterier, kablar, nätaggregat, laddningsbara batterier osv.. Brister vilka faller under garantin åtgärdas utan kostnad för kunden mot förevisande av köpkvittot. Övriga anspråk kan inte lämnas. Kunden står för transportkostnaderna när apparaten befinner sig på annan ort än kundens huvudadress. Vid transportskador kan garantianspråk endast göras gällande när för transporten den kompletta originalförpackningen använts och varan säkrats och fixerats i originalförpackat tillstånd. Ta därför vara på alla förpackningsdelar.

Garantin upphör att gälla när apparaten öppnats av person som inte uttryckligen auktoriserats av seca.

Kunder i utlandet ber vi att i garantifall ta kontakt med representanten i respektive land.

## CE-Försäkran om överensstämmelse

Mekanisk längmätningsanordning

Modell seca 210

Partinr.: se mätatta

Mätattan uppfyller gällande krav enligt direktiv 93/42/EWG över medicinska produkter.

seca gmbh & co. kg.



Sönke Vogel

– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

: [www.seca.com](http://www.seca.com)

## **seca** deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • [info@seca.com](mailto:info@seca.com)

All contact data under [www.seca.com](http://www.seca.com)

17-10-02-222 h/08 L

**seca**  
group

**seca** deutschland

**seca** france

**seca** united kingdom

**seca** north america

**seca** schweiz

**seca** zhong guo

**seca** nihon

**seca** mexico

**seca** austria