

**ASTA DI SOLLEVAMENTO PER DEGENTI - TUBO TONDO
LIFT POLE - ROUND TUBING****POTEAU DE LEVAGE - TUBE ROND****SOPORTE DE ELEVACIÓN - TUBO REDONDO****PENDURAL - TUBAGEM REDONDA****BETTGALGEN - RUNDSTANGEN****TIJĂ TELESCOPICĂ - ȚEAVĂ ROTUNDĂ****LYFTPOL - RUNDRÖRSSTRUKTUR****WYSIĘGNIK - Z OKRĄGLYMI RURKAMI****ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ - ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF LW10207 (GIMA 27664)

Mingguang Longway Technology Co., Ltd.
No. 59 Lingji Rd., Industrial Park, Mingguang, Anhui, China
Made in China



Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1 e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





Viktkapacitet: 75 kg

FÖRUTSEDD ANVÄNDNING:

Longway Medical Accessories är medicintekniska produkter avsedda att kompensera rörelsesvårighet eller hinder hos sängbunden användare.

Stödanordning med grundbas, anpassbar till alla sängar. Struktur i lackerat rundrörstål som kan placeras i enlighet med patientens behov och triangel med rem för att justera höjden.

VARSAMHET(!):

- I fall av skada eller felfunktion på din produkt ANVÄND INTE och kontakta behörig och utbildad representant.
- Använd inte produkten för ett annat syfte än det som anges i denna handbok
- LONGWAY Medical fransäger sig allt ansvar för konsekvenser till följd av en felaktig användning av denna produkt och icke auktoriserad ändring av produktens ram.
- LONGWAY Medical förbehåller sig rätten att ändra informationen i detta dokument utan förhandsmeddelande
- Det finns ± 3 %. Avvikelse för produktdimensioner.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

- ⚠ • Om du inte läser denna användarhandbok, bör du inte använda denna produkt eller någon annan tillgänglig del. Om du inte förstär användning av försiktighetsåtgärder, vänligen kontakta återförsäljaren eller den egna teknikern innan du använder produkten eftersom det kan orsaka skada.
- ⚠ • Förvara på säkert avstånd från värmekällor.
- ⚠ • Spara detta dokument för framtida hänvisning.
- ⚠ • Var försiktig när barn är i närheten och låt dem inte leka med produkten.
- ⚠ • Överskrid inte max nyttolast.
- ⚠ • Särskild försiktighet krävs alltid när det finns rörliga delar som kan orsaka att armar och ben fastnar och skadas.
- ⚠ • Försök inte lyfta produkten med borttagbara delar.

- ⚠ • Använd inte produktsätet för något annat syfte än det avsedda.
- ⚠ • Lyftpolerna är inte avsedda att bära en persons fullständiga vikt.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

Vi är endast ansvariga för att försäkra att de medicintekniska produkterna som nämns i detta meddelande är av låg riskklass (Klass I) och stämmer med kraven i Europaförordningen 745/2017 och där så är lämpligt de standarder och lagar som hänförs till.

FÖRE ANVÄNDNING:

- Kontrollera om ramen är skadad för att garantera säker användning av produkten. (Det finns inte sprickor eller brott på ramen).
- Använd inte produkten vid skada och kontakta din återförsäljare för vidare instruktioner.
- Kontrollera om produkten är korrekt monterad och att alla skruvar är säkra och väl ådragna.
- Kontrollera alltid eventuellt slitage på mekaniska delar för att garantera absolut säker användning av produkten för personer och föremål

MILJÖSKYDD:

Om du en dag finner att din produkt behöver bytas ut eller inte längre fungerar för dig, tänk på att skydda miljön:

- 1) Kasserar inte produkten tillsammans med annat hushållsavfall (det är vad skylten som visas för återvinning betyder).
- 2) Kontakta offentliga myndigheter för att få instruktion om återvinningsstationer där din produkt måste avyttras.
- 3) Korrekt avyttring av produkten bidrar till miljöskydd liksom återvinning av produktens komponenter.

INFORMATION OM UNDERHÅLL, RENGÖRING OCH DESINFICERING:


För att garantera säker användning och tillräcklig hygienstandard ska användaren utföra dessa procedurer före varje användning. Användaren måste säkerställa strukturell integritet på produkten och dess komponenter. För rengöring och saneringsprocedurer följs stegen nedan:

1. Använd skyddshandskar.
2. Ta bort synlig smuts innan du går vidare med den noggrannaste desinficeringen.
3. Använd vatten eller mild rengöringsmedel för rengöringsproceduren.
4. Torka med en torr och ren trasa.
5. LÄMNA INTE produkten våt.
6. Använd inte kemiska rengöringsmedel för att rengöra ramen. Det kan orsaka skada på produktens yta
7. Om du behöver desinficera produkten använd ett vanligt mildt desinficeringsmedel
8. Skydda artikeln från repor, skärskador och perforering.
9. Smörjning: produkten har utformats för minimalt underhåll; kontrollera emellertid var sjätte månad smörjningen på rörliga och mekaniska delar, det kan garantera optimal varaktighet.

MONTERING:

OBS: Illustrationerna för montering är indikativa för att förenkla monteringen. Det kan förekomma skillnader från verkligheten. Stödet med Lw10207-bas levereras omonterat och kräver följande monteringsåtgärder:

1. Använd 2* $M10 \times 115$ mm-skruvar för att fästa det raka röret mellan vänster och höger rörben;
2. Sätt i lyftpolen i det utrymme som getts, och använd plastskruv för att fästa;
3. Sätt i triangeln med justerbara rem i det utrymme som getts.

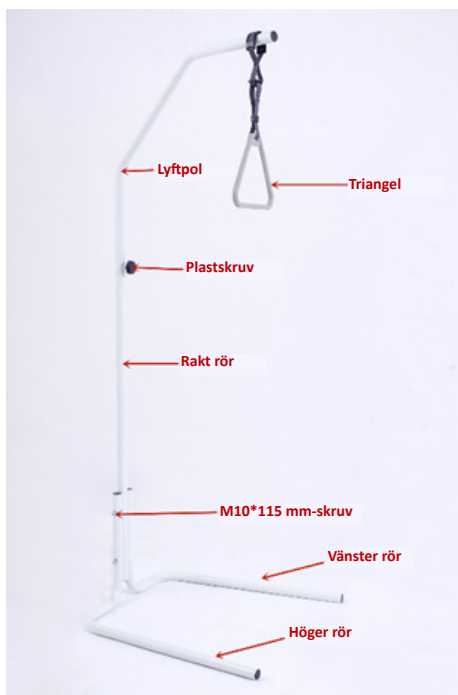

GARANTI:













Produkten är garanterad för en period på ett (1) år från inköpsdatumet.

Garantin gäller fabriksdefekter & INTE för skador till följd av felanvändning, dåligt underhåll, ändring, överdriven användning eller icke-överensstämmelse med produktens bruksanvisning.

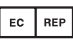Den gäller HELLER INTE på delar som slits ut under användning eller över tiden. Skador eller defekter på grund av naturkatastrofer, obehörigt underhåll eller reparation, elttillförselproblem (där så är tillämpligt) och speditörer täcks inte av garantin.


Ingen service eller reservdel ges om inspektion inte sker av produkttillverkarens auktoriserade serviceavdelning. Fraktkostnaderna för gods i garanti betalas av slutanvändaren-kunden eller av återförsäljaren.

SYMBOLER LEGEND

	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Produktkod
	Satsnummer
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
	Läs bruksanvisningen
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745
	Medicinteknisk produkt
	Unik identifierare för enheten
	Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
	Importerad av

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader

 **Bortskaffande:** Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas, genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.