



GIMA

Gima S.p.A.


Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TRANSABDOMINAL AMNIOCENTESIS NEEDLE

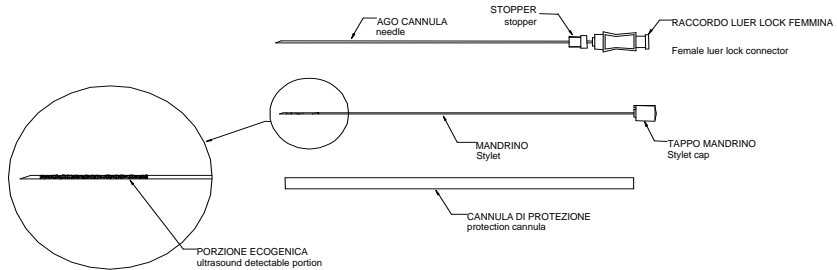

Anvisningar för användandet

Se till att mandrinen är stängd. Inför nålen lodrätt för att följa ultraljudets spår (enl tidigare identifiering) upp till amnionsäcken. Avlägsna mandrinen och anslut en 20 cc spruta.

Sug upp vätskan med långsamt och måttligt negativt tryck. Återinför mandrinen och avlägsna både nål och mandrin. Överför amnionvätskan till ett torrt och sterilt provrör och behåll detta vid en temperatur av 37 grader celsius.

Varning: Får endast användas under uppsikt af sjukvårdpersonal. Användes omedelbart efter öppnandet.

Kan innehålla spår av nickel.

REF 770228 (Gima code 29636) - 770222 (Gima code 29637) -
770201 (Gima code 29638) - 770201 (Gima code 29639) -
770223 (Gima code 29640) - 770202 (Gima code 29641)

CE 0476

STERILE R



RI.MOS s.r.l.
viale Gramsci, 29
41037 Mirandola (MO) Italy

