



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Distribuit de - Levererad av:

Gima S.p.A


Via Marconi, 1


20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com


VIZIERĂ DE PROTECȚIE GIMA - ANSIKTSSKÄRM GIMA

ART. VH001-xx 
LOT 123456789
OPO 1 S - EN166 3 S

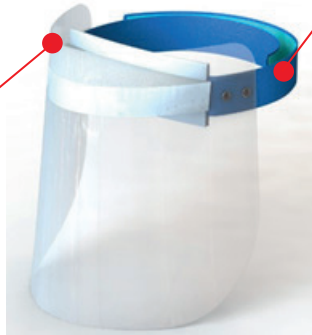

Bandă de închidere cu scai
Band med tillslutning med kardborrband

Accesorii de blocare interschimbabil
Utbytbar låsetillbehör

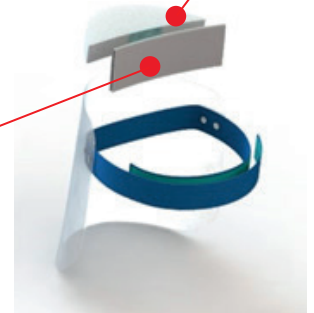

Cserélhető elülső párna
Wymienna wyściółka przednia

SE

MÄRKNING OCH ANVÄNDNINGSSYMBOLER

VH001: Produktmodell, xx bandets färgkod LOT: lotnummer OPO: Tillverkarens identifikation; 1: Optisk klass; S: Symbol för låg energipåverkan, -EN166 Teknisk referensstandard, 3: vätskesymbol; S: symbol för låg energipåverkan, CE: CE-certifiering. Skärmen överensstämmer med EU-förordning 2016/425 och CE-certifikatet från allmänt organ nr. 0426 (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milano) och överensstämmer med EN 166:2001. Försäkran om CE-överensstämmelse finns på webbadressen för tillverkaren och Gima www.gimaitaly.com

APPLICERING OCH INSTÄLLNING

- 1) Applicera det främre stödet och vrid åt med kardborrbandet.
- 2) Stöd skärmen mot pannan och placera det i mitten.
- 3) Spänn remmarna och fixera med kardborrbandet i önskat läge

SKÖTSEL OCH ÅTERANVÄNDNING

Undersök skärmen före varje användning: kontrollera att den är ren, genomskinlig, fri från sprickor och hel i sömmarna. Kontrollera dessutom att huvudbandet inte är slitet, och att det inte lossar, då det fixerats på huvudet. Byt ut skärmen, om den är skadad

- Utför rengöring vid kontaminering med främmande ämnen
- Byt ut i fall av skada eller kontaminering som inte kan avlägsnas.

Rengöring: Den personliga skyddsutrustningen måste rengöras med mildt rengöringsmedel, ljummet vatten med en mjuk trasa att även använda i omsköljningsfasen. För sanering ska alkoholbaserad saneringslösningar användas. Det främre stödet kan maskintvättas vid 40 ° för normal hygien, men om sanering krävs måste det bytas ut.

Återanvändning: Skärmen kan återanvändas på villkor att den sanerats och genom utbyte av det främre stödet och valfritt stängningstillbehör

FÖRVARING LAGRING EMBALLAGE OCH TRANSPORT

Skydda från direkt solljus, lysrör, röntgenstrålar och ozon. Förvara på torrt ställe i förpackningen och skydda från deformation. Temperatur: +5 °C ± +40 °C, Relativ fuktighet: < 60 %. Transportera i slutet och väl i slutet och väl förseglad påse.

Förfallotid: 5 år, från försäljningen till slutanvändaren, om produkten förvaras i den egna ursprungliga förpackningen och i de förhållanden som anges ovan

SÄKERHETSINFORMATION

Materialen som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergisk reaktion hos känsliga personer
Ansiktsskärmen kan, då den bärs ovanpå oftalmiska glasögon, medföra stötar och utgöra en fara för bäraren
Byt ut skärmen om linsen skulle visa sig repad eller skadad

Skyddsanordningen är inte lämplig för skydd mot partiklar med hög hastighet eller vid rumstemperatur eller extrema temperaturer.



Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
(O.P.O srl). Società Unipersonale
Via Bellini, 33 40067 Rastignano - (Pianoro) BO Italy
www.opo.it
Made in Italy

REF 30846
Sablon/Mall VH001



M30846-HU-PL-RO-SE-Rev.1-11.20