



Littmann®  
Classic III™  
Stethoscope



# Bruksanvisning till 3M™ Littmann® Classic III™ Stetoskop

Gratulerar till inköpet av ert nya 3M™ Littmann®  
Classic III™ Stetoskop

Littmann Classic III Stetoskop kombinerar hög akustisk prestanda med en exceptionell mångsidighet. Dess innovativa design har ett flytande membran på varje sida av bröststycket; den stora sidan kan användas på vuxna patienter, medan den lilla sidan är särskilt användbar för pediatrika tillämpningar. Dessutom omvandlas barndelen lätt till en traditionell klocka genom att helt enkelt byta ut det flytande membranet mot det icke-kylande klocköverdraget som medföljer stetoskopet. För mer information se: [www.littmann.com](http://www.littmann.com).

## Förklaring av symboler


 Läs bruksanvisningen före användning.

 Innehåller ej naturgummilatem.

## Bruksanvisning


### Sätt i stetoskopet i dina öron

Stetoskopets bygel är vinklad för att passa anatomin för en typisk hörselkanal och utformad för att ge en komfortabel och akustiskt tät passform. Öronoliverna skall vara framåtriktade när de sätts in i öronen.

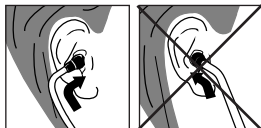


### Justera bygelns spänning

Om det är nödvändigt, kan du justera spänningen på bygelns fjäder för att skapa en åtsittande men bekväm inpassning i öronen.

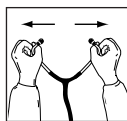

Dra isär örontuberna för att minska bygelns fjäderspänning. Upprepa tills önskad spänning har uppnåtts.

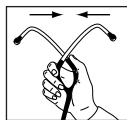

Tryck ihop örontuberna för att öka fjäderspänningen i bygelns. Upprepa tills önskad spänning har uppnåtts.


SE

## Välj den aktiva sidan av bröststycket


Littmann Classic III stetoskop har ett tvåsidigt bröststycke. Bara en sida av bröststycket är akustiskt aktiv åt gången, vilket indikeras med en markering. Vrid på bröststycket för att ändra vilken sida som är aktiv.

## Littmann flytande membran – Lyssna på låg- och högfrekventa ljud.

Båda sidorna av bröststycket har det patenterade flytande membranet från Littman som gör det möjligt att förstärka ljud på låga eller höga frekvenser genom att helt enkelt justera trycket mot patienten.

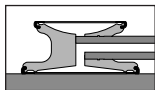

*Låga frekvenser:* Tryck lätt mot patienten för att förstärka ljud på låga frekvenser.

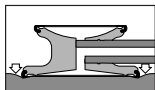

*Höga frekvenser:* Håll ett fast tryck mot patienten för att förstärka ljud på höga frekvenser.

## Ändra till en traditionell öppen klocka



Den lilla sidan på bröststycket kan användas antingen med Littmann flytande membran eller omvandlas till en traditionell öppen klocka med det icke-kylande klocköverdraget som medföljer stetoskopet.



För att avlägsna Littmann flytande membran, nyp tag i membranets kant med tum- och pekfingernaglarna; dra och lyft membranet från bröststycket.



Montera det icke-kylande klocköverdraget genom att placera en sida av överdraget på kanten av bröststycket och dra det över och runt bröststyckets kant.




Avlägsna det icke-kylande klocköverdraget för att montera tillbaka Littman flytande membran. Sätt in den flexibla änden på det flytande membranet i kantens skåra och rulla sedan membranet sakta över bröstbitens kant.

## Rengöring, desinfektion och förvaring

Rengör stetoskopet mellan varje patient med antingen en trasa med 70 % isopropylalkohol eller en engångsservett med tvål och vatten. Det hör till god praxis att använda en engångsservett vid rengöring av stetoskopet för att avlägsna organiskt material.

Ett 2 %-igt blekmedel kan användas för att desinfektera stetoskopet. Emellertid kan stetoskop vars slang innehåller röda pigment (vinröd, rosa, plommon, persika, hallon, apelsin, etc.) missfärgas efter kontakt med blekmedel. På grund av dessa destruktiva egenskaper hos blekmedlet ska blekmedel bara användas i begränsad omfattning och/eller när det är nödvändigt.

Det flytande membranet, icke-kylande klocköverdraget och öronoliverna kan avlägsnas för ordentlig rengöring (se till att alla delar och ytor är torra innan ihopsättning). Dra hårt i öronoliverna för att avlägsna dem från bygeln. För att sätta på öronoliverna, tryck fast den lilla änden av öronoliven på örontuben tills den fastnar med ett klick.

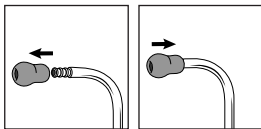

Sänk inte ned stetoskopet i någon vätska.

Utsätt inte stetoskopet för någon steriliseringsprocess.

Undvik förvaring av stetoskopet i hög värme.

## Service och garantiprogram för Littmann stetoskop

Registrera ditt stetoskop online på:  
<http://www.littmann.com/warranty-registration>

Littmann Cardiology III stetoskopet har en garanti mot defekter i material eller för utförande under en period av fem (5) år. Under garantiperioden utförs reparationer utan kostnad om stetoskopet lämnas tillbaka till 3M, förutom i fall av uppenbart missbruk eller oavsiktlig skada.


För service och reparation i USA, se [www.littmann.com/service](http://www.littmann.com/service) eller ring 1-800-292-6298. Om du är utanför USA, se [www.littmann.com](http://www.littmann.com) för kontaktinformation till ditt lokala 3M-kontor.

3M, Littmann, Littmanns L-logotyp, L:et, och Classic III är varumärken som tillhör 3M.

Används under licens i Kanada.

© 2015, 3M. Med ensamrätt.



Made in U.S.A. by  **3M Health Care**,  
2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144  
(U.S.A.) 1-800-228-3957 Visit our website [www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Not Made  
With Natural  
Rubber Latex

Consult  
instructions  
for use

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L,  
and Classic III are trademarks of 3M.

Used under license in Canada.

© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3



**3M Deutschland GmbH**  
**Health Care Business**

Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss  
Germany