

SV - MUNSTIK FÖR ENGANGSPART BRUKSANVISNING

AVSEDD ANVÄNDNING: engångsmunstyckena är avsedda att användas tillsammans med utrustning för test av lungfunktion och låter patienten göra undersökningen utan att ha direktkontakt med utrustningen.

Patienten manipulerar personligen munstycket genom att föra in det i utrustningen. Munstyckena ska endast appliceras på intakt, ren och frisk hud.

PRODUKTIDENTIFIKATION: identifieringsdata (referens, parti och tillverkningsdatum) finns på etiketten som fästs på kartongen.

ANVÄNDANDE:

- Följ alltid instruktionerna från spirometern.
- Sätt in munstycket i enhetens sensor (turbin eller pneumotacometer) utan att tvinga. Återanvänd aldrig munstycket för att undvika att utsätta patienten för korskontaminering.
- Öppna inte före användning.
- Använd inte om förpackningen är skadad.
- Enheten är inte lämplig för användning inom neonatal pediatrik.
- Förvara på en sval och torr plats.

AVFALLSHANTERING OCH SÄKERHET: efter användning måste produkten kasseras i normala behållare med giftfritt fast avfall eller i allmänt sjukhusavfall.




KONTRAIKATIONER: baserat på erfarenhet och resultat från olika analyser, finns det inga negativa effekter som ett resultat av korrekt användning av produkten.

FÖRVARING: Förvara på en sval och torr plats.

VARNING:

- Förpackning i individuella värmeförseglade kuvert (single-wrap) garanterar frånvaron av bakterier, vilket regelbundet övervakas enligt tillverkarens kvalitetssystem. Om medicinprodukten återanvänds finns det risk för korsinfektion för patienten som återanvänder den.
- Om apparaten återanvänds finns risker för korsinfektion för patienten som återanvänder den.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

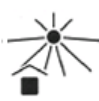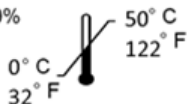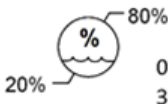

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750