












Instructions for use

Ambu[®] Perfit Collar

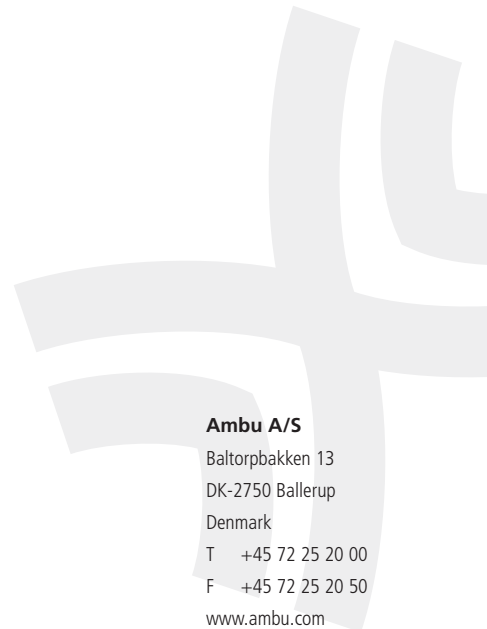

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

492 2850 00 - V04 - 05/2011 - Printed in China

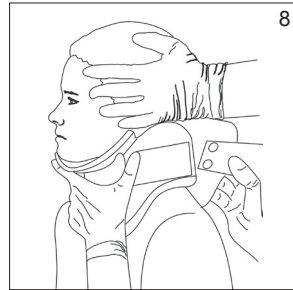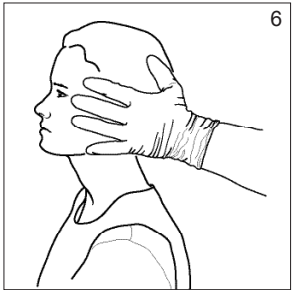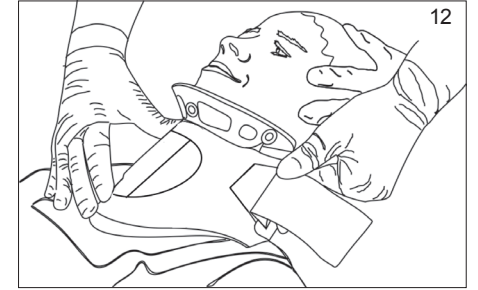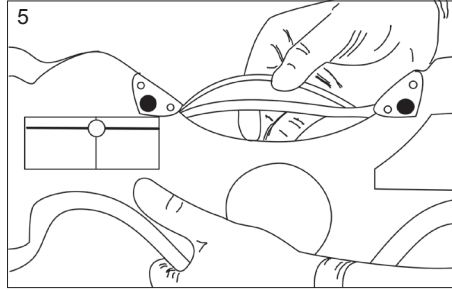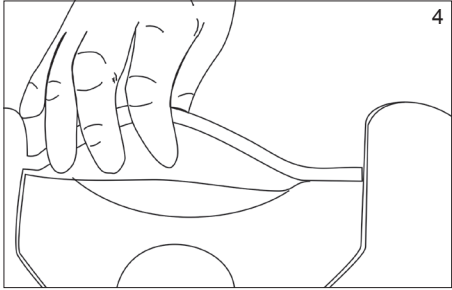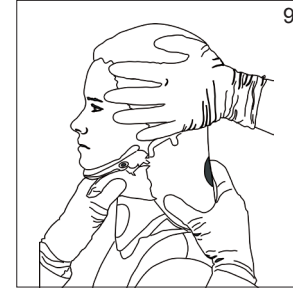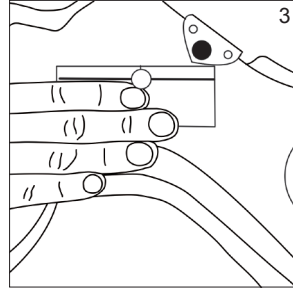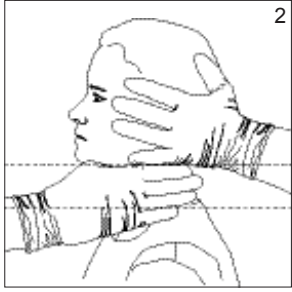

Garantia

A Ambu Inc. garante a idoneidade dos seus produtos em termos de defeitos de fabrico e peças, quando adquiridos através da Ambu Inc. ou dos seus canais de distribuição autorizados, e se utilizados de acordo com os procedimentos recomendados. Se ao retirar o produto da embalagem pela primeira vez verificar alguma deficiência, obtenha uma referência de autorização de devolução através da Ambu antes de proceder a essa devolução. Reparações ou substituições serão efectuadas sem custos adicionais.

Perfit halskrage

Size 1 Infant	=	Storlek	=	1 Spädbarn
Size 2 Pediatric	=	Storlek	=	2 Barn
Size 3 Neckless	=	Storlek	=	3 Extra kort hals
Size 4 Short	=	Storlek	=	4 Kort
Size 5 Regular	=	Storlek	=	5 Medel
Size 6 Tall	=	Storlek	=	6 Lång

Flip chin piece over with index finger = Fäll upp hakstycket med pekfinger

Beskrivning

Ambu® Perfit® halskrage är en stel krage i ett stycke för fixering av cervikala ryggraden, utformad för att bistå livräddare med att bibehålla neutralt läge, motverka laterala vridningar (från sida till sida) och böjningar framåt-bakåt samt utsträckning av cervikala ryggraden under transport och under rutinmässig patientvård eller förflyttning.

Fixeringsprinciper

Motverka och/eller förebygger ytterligare omfattning av skador på cervikala ryggraden och ryggmärgen genom att huvud och nacke bibehåller i "neutralt läge". Huvud och nacke ska inte böjas framåt, dras bakåt eller vridas åt sidorna. Det neutrala läget motverka att skadade ryggkotor eller främmande föremål skaver på och/eller klämmer av ryggmärgen. Dessutom motverka det neutrala läget att ryggmärgen vrids eller trycks ihop och orsakar fysiska och/eller ischemiska skador på ryggmärgen. En halskrage utgör endast en del av en total patientfixering.



Varning

Ambu Perfit halskrage är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal efter ordination av en läkare eller annan medicinsk auktoritet. Om kragen används på sätt som inte ordinerats av läkare eller annan medicinsk auktoritet kan permanenta skador uppkomma.

Det är viktigt att sjukvårdspersonal är utbildad och har erfarenhet av att använda produkten och att alla instruktioner lästs och förstås innan kragen ska användas.

Alla anvisningar är riktlinjer och ska inte ses som medicinska instruktioner. Använd endast produkten efter genomgång och godkännande från ansvarig medicinsk auktoritet.

Bruksanvisning

1. En livräddare stabiliserar huvud och nacke manuellt, genom att försiktigt hålla huvud och nacke i neutralt läge. (Figur 1).
Observera: Om det uppstår ett motstånd eller om patientens obehag stiger, följ fastställda tillvägagångssätt rörande fixering av cervikala ryggraden vid känd eller misstänkt cervikal dislokation.
2. När huvud och nacke stabiliserats manuellt ska den andra livräddaren sätta på patienten en Ambu Perfit halskrage i lämplig storlek enligt anvisningarna nedan. Kragen får inte sträcka nacken för mycket.
3. Mät avståndet mellan en tänkt horisontell linje dragen omedelbart under patientens haka och en andra horisontell linje dragen omedelbart över patientens axel. (Figur 2).
4. Jämför detta avstånd med avståndet från kragens storleksmarkeringar till den lägre delen av plastkragens stomme (ej skumplasten) (Figur 3).

Corporate Head Office**& Manufacturer:**

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 7225 2000
Fax: +45 7225 2050
www.ambu.com

USA

Ambu Inc.
6740 Baymeadow Drive
Glen Burnie, MD 21060
Tel.: +1 410 768 6464
+1 800 262 8462
Fax: +1 410 760 4907
www.ambuusa.com

France

Ambu S.A.R.L.
Airspace — 6, Rue Gagarine
F-33185 Le Haillan
Tel.: +33 5 57 92 31 50
Fax: +33 5 57 92 31 59
www.ambu.fr

Germany

Ambu GmbH
In der Hub 5
D-61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 92500
Fax: +49 800 ambude
www.ambu.de

UK

Ambu Ltd.
8 Burrel Road
St. Ives
Cambridgeshire PE27 3LE
Tel.: +44 (0) 1480 498 403
Fax: +44 (0) 1480 498 405
www.ambu.co.uk

Italy

Ambu S.R.L.
Via Paracelso, 18
Centro Direzionale Colleoni
20041 Agrate Brianza - Milano
Italia
Tel.: +39 039 657811
Fax: +39 039 6898177
www.ambu.it

Spain

Firma Ambu S.L.
Alcalá, 261-265, Edf. 2-3º dcha.
ES-28027 Madrid
Tel: +34 91 411 68 30
Fax: +34 91 564 50 82
www.ambu.es

Netherlands

Ambu B.V.
Edisonstraat 16j
2809 PB Gouda
Tel.: +31 0182 573293
Fax: +31 0182 531364
www.ambu.nl