



BRUKSANVISNING

PRODUKTNAMN: TYPE 4 MULTI-VARIABLE STEAM INDICATOR (IS2401)

PRODUKTBESKRIVNING: PMS Steritest Type 4 Multi-Variable Steam Indicator Strips är designade för användning i förvakuum ångsterilisatorer som arbetar vid 134 °C eller 121 °C.

Efter exponering för ångsterilisering kommer den kemiska indikatorn att ge en korrekt visuell bekräftelse genom färgbyte, vilket indikerar att steriliseringsvillkoren uppfylldes.

PMS Steritest Type-4 Multi-Variable Steam-indikatorer är klassificerade som Typ-4 enligt EN ISO 11140-1 Standard.


Under exponering för ångsterilisering vid 134 °C eller 121 °C kommer indikatorfärgen att ändras från **Blå** till **Grå/Svart**.

BRUKSANVISNING

- Placera PMS Steritest Chemical Indicator Strip i varje förpackning, skala påse eller bricka som ska ångsteriseras. Remsan ska placeras på en plats i förpackningen som anses vara svårast för ångan att nå.
- Bearbeta förpackningen som vanligt i en ångsterilisator.
- När steriliseringscykeln är klar, kontrollera att indikatorn har ändrat färg och blivit grå/svart.
- Om färgförändringen inte är synlig eller ojämn kan steriliseringsförhållandena vara otillräckliga och föremålen måste omarbetas med nya/obearbetade indikatorremсор.
- Produkter som lagras under rekommenderade förhållanden har en hållbarhet på tre (3) år från tillverkningsdatum.
- Tillverkning, utgångsdatum och partinumner är tryckta på produktförpackningen.
- Återanvänd inte de använda kemiska indikatorremсорna.

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

- Förvara vid max 35 °C och max 70 %RH luftfuktighet.
- Kemiska indikatorremсор måste hållas borta från direkt värme, solljus och överskott av fukt.

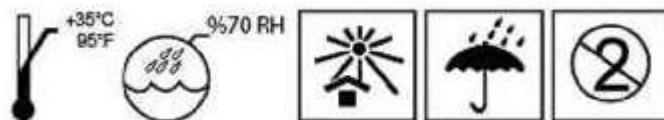

PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi12. Cad. No:2
Huzurkent/Mersin/TURKEY
Telefon: +90 324 238 7042 | Fax: +90 324 238 6549
pms@pmsmedikal.com | www.pmsmedikal.com