
SEDIA DA DOCCIA con schienale e braccioli in PU
SHOWER CHAIR with PU backrest and seat
CHAISE DE DOUCHE avec dossier et siège PU
SILLA DE DUCHA con respaldo y asiento en PU
CADEIRA DE DUCHE com encosto e assento em PU
DUSCHSTUHL mit PU-Rückenlehne und -Sitz
DUSCHSTOL med ryggstöd och sits i PU
ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ με πλάτη και κάθισμα PU

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF HE10688023 (Gima 42909)



HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei
Province,China
Made in China



Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



HE10688023

KD ALUMINUM DUSCHSTOL

Delar av produkten



1. PU Ryggstöd
2. PU Sits
3. Fotrör justerbart i höjd
4. Spets

Säkerhetsanvisningar

- Läs dessa bruksanvisningar noggrant.
- Alla komponenter ska kontrolleras för skador och säkert fäste före användning.
- Godkänd endast för användning inomhus.
- Klädesplagg eller kroppsdelar kan klämmas när du sätter dig, reser dig, för in toalettstolen, samt vid höjning av armstöden och när de låses på plats.
- Om du behöver köra över trösklar, gör det försiktigt annars kan hjulen skadas!
- När du använder en hjulburen kommodstol, använd alltid parkeringsbromsarna.
- Vid överföring i och ur den hjulburna kommodstolen, måste fotstöden fällas ut ur vägen.
- Använd aldrig fotstöden som hjälp när du reser dig - risk för tippning!
- Förhindra ej auktoriserad användning, till exempel, av barn.
- Informera dig om användarens totalt tillåtna vikt.
- denna informationen finner du under tekniska data i denna bruksanvisning samt på identifieringsplåten.

Montering

Steg 1

Fäst ryggstödet vid ramen tryck på knapparna och låt ryggstödet rör glida in på rören som är placerade på varje sida och på sitsens bakdel.










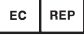




**Steg 2**

Fäst benen vid ramen genom att trycka på knapparna på rören på varje sida av benen. Försäkra dig att knapparna "klickar" fast korrekt genom hålen och är stabila och justerade på samma sätt.

Tekniska data

Produkt	KD ALUMINIUM DUSCHSTOL
Produktnummer	HE10688023
Vikt-kapacitet (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Produktens dimension (mm) L x B x H	(505-516)×(500-526)×(735-835)mm
Produktens vikt (lbs/kg)	4,02 kg
Sitsens dimension (inch/mm) L x B	407*337*52mm
Ryggstödet material	PU
Sitsens material	PU
Ramens material	Aluminium
Ramens färg	Silver
Antal i lådan (styck)	1
Produktens vikt inklusive lådan (lbs/kg)	5,74 kg
Lådans dimension L x B x H	460×200×430mm

Symboler

	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga		Förvara på svalt och torrt ställe
	Tillverkare		Tillverkningsdatum
	Satsnummer		Produktkod
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Medicinteknisk produkt		Läs bruksanvisningen
	Serienummer		Importerad av

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.