

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. KONSULTERA LÄKARE FÖRE ANVÄNDNING.

KOTNRINDIKATIONER: Inte avsedd för personer med vikt över 242 lbs (110 kg) - Inte avsedd för isiga eller hala tillstånd. - Inte avsedd för personer med latex-allergier.

VÄGLEDNING: För att fälla ut din käpp, håll i handtaget och låt de vikbara skaftsegmenten fällas ut mot golvet. För att förhindra fall bör du alltid kontrollera att de enskilda skaftsegmenten (bild 1) är ordentligt låsta på plats.


WARNING: TA INTE ISÄR Trusty Cane™-stommen. Käppen innehåller ett elastiskt snöre inuti. Okontrollerat utlösande av det elastiska snöret inuti kan orsaka allvarliga skador på oskyddade kroppsdelar, särskilt ögonen. Om det elastiska snöret skärs av, slits eller skadas, avbryt användningen. Töj INTE snöret mer än vad som behövs för att ta isär eller montera segmenten.

Så här justerar du höjden på din Trusty Cane™: Lossa vridlåset (bild 2) genom att vrida det medurs flera varv. Tryck ner låsknappen (Fig. 3) och dra upp handtaget för att förlänga det, eller tryck ner handtaget för att förkorta det. Kom ihåg att dra åt vridlåset igen efter att du har justerat Trusty Cane™ till önskad höjd.

WARNING: För att förhindra fall, se alltid till att de enskilda skaftsegmenten är ordentligt låsta på plats och att låsknappen är helt intryckt.

För att fälla ihop Trusty Cane™: Din Trusty Cane™ är enkelt fällbar till en bekväm resestorlek genom att separera de 4 enskilda skaftsegmenten från varandra. Håll varje uppsättning skaftsegment nära leden och dra isär dem (bild 4). De individuella skaftsegmenten kommer att vikas ihop snyggt (bild 5)

För att använda lamporna på din Trusty Cane™: Knappen högst upp på Trusty Cane™ handtaget (bild 6) aktiverar lamporna. Om du trycker på knappen en gång aktiveras lamporna och om du trycker igen släcks de. Lamporna släcks automatiskt efter 20 minuter.

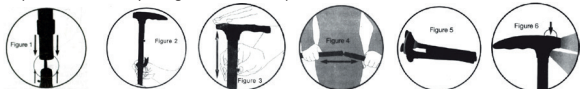

Skötsel av din Trusty Cane™: För att byta batterier, använd en stjärnskruvmejsel för att skruva loss batterifacket under Trusty Cane™-handtaget. Ta bort alla uttjänta batterier och kassera dem på rätt sätt. Använd 3 AAA-batterier och rikt in + och - enligt anvisningarna, annars fungerar inte lamporna. Sätt tillbaka och dra åt skruven på batteriluckan. Kontrollera regelbundet batteriröret för tecken på slitage, inklusive eventuell fransning av det elastiska snöret eller slitage på gummifötterna. Om du ser tecken på slitage, sluta använda det omedelbart.

WARNING: Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller laddningsbara batterier (nickel-kadmium).
GIMA GARANTIVILLKOR: Gima 12-månaders standardgaranti B2B gäller.

Gima 43044 - 43045

REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabrizato da/Manufactured by/Fabrizado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootaja/Valmistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyproduktowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilverlat av/تولید شده با/إنتاج
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/
Importado por/Εισαγυγμένο από/Bieszeno od/Dovezeno uživatelem/Importert
af/Importitja/ Tuojaz/Uvezeno od strane/Importälta/Importēja/Importavo/
Importert av/Gaimportteerd door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/
Uvozil/Importat av/إستيراد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



