

GIMA 43430



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China




KDB-506



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

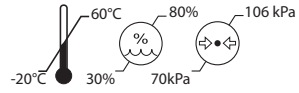

PRODUKTNAMN
Lyft- och förflyttningsanordning
Modell nr: KDB-506
Viktkapacitet: 125 Kg.

AVSEDD ANVÄNDNING:
Lift- och förflyttningsanordningen är för att flytta patienter med förlamning av den nedre kroppsdelen, ben- eller fotproblem eller äldre från sängar, rullstolar, stolar eller toalettstolar. Denna enhet befriade vårdgivares arbete mycket. Det förbättrar effektiviteten för omvårdnadsarbete, och minskar risker vid omvårdnad.

INDIKATIONER
Används endast för personer.

RENGÖRINGSMETODER/UNDERHÅLL
Rengör vid behov anordningen med varmt vatten eller gno alkohol och se till att svänghjulen är fria från smuts och hår. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klorid, eftersom det kan skada aluminium- och polyamidmaterial.
För att undvika eventuell rostbildning, se upp med följande punkter för bättre underhåll och för att förbättra dess funktion:
*Genom att ta bort korrosiva ämnen som duschgel, schampoo med mera efter varje användning.
*Ställ sedan produkten på ett ventilerat och torrt ställe, detta är också god praxis efter varje användning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNING
Läs och följ säkerhetsföreskrifterna som ges nedan, vilka kan göra arbetet enklare och felfritt.
Läs och förstå dessa instruktioner före användning.

VARNING - Riporta importanti informazioni di sicurezza relative a pericoli che potrebbero causare lesioni gravi.
VARSAMHET - Riporta informazioni utili per evitare di procurare danni al prodotto.
ANM - Riporta informazioni alle quali è necessario prestare particolare attenzione

VARNING
*Planera ALLTID dina lyftåtgärder innan du börjar.
*Utför ALLTID den DAGLIGA CHECKLISTAN innan du använder anordningen.
*Bekanta dig ALLTID med kontroller och säkerhetsfunktioner på anordningen innan du lyfter patienten.
*Använd INTE en skadad anordning.
*Installera ALLTID anordningen enligt instruktionerna.
*Kontrollera ALLTID att anordningens säkra arbetslast passar för patientens vikt
*Följ ALLTID instruktionerna i användarmanualen för att bearbeta anordningen.
*Lyft ALLTID patienten med svänghjulen låsta. Se till att rikta in reglaget med korrekt tyngdpunktscentrum.
*Försök INTE att flytta anordningen genom att skjuta den mot ställdon, hängare eller patient.
*Flytta ALLTID anordningen med tryckhandtaget.
*Håll ALLTID patienten i ett minimalt bekvämt läge före förflyttning.
*Flytta INTE den lastade anordningen över hastighet på 3km/h 0,8m/s.
*Flytta INTE på ojämn eller grov mark. Särskilt om den var belastad med en patient.
*Forcera INTE säkerhetskontroller. Alla kontroller är lätta att använda och kräver inte för stor kraft.
*Parkera INTE den lastade anordningen på sluttningar.
*Lyft INTE patienten om du inte är utbildad och kan göra detta.

TRANSPORT OCH FÖRVARING
Anordningens transport- och förvaringsmiljö ska vara enligt följande:
a) Temperaturområde: -20°C~+60°C.
b) Den relativa fuktigheten går från 30 % till 80 %.
c) Atmosfäriskt tryck går från 70kPa till 106kPa.

FÖRPACKNING:
Förpackningen är en sats i 1 kartong.

BORTSKAFFNING
Restriktioner för bortskaffning beror på den kontamination som uppstår under användning och är föremål för nationella eller lokala lagbestämmelser.

Alla allvarliga olyckor som rör den medicintekniska produkten som levererats från oss måste meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där ditt registrerade kontor ligger.

ETIKETTER, FÖRPACKNINGAR LOGOTYPDESIGN:

Symbol	Menande	Symbol	Menande
	Medicinsk utrustning i enlighet med förordning (EU) 2017/745		Medicinsk apparat
	Tillverkare		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Tillverkningsdatum		Förvaras åtskilt från solljus
	Batchnummer		Inte steril
	Varning: Läs och följ instruktionerna (varningarna) för användning noggrant		Produktkod

	Läs bruksanvisningen		Förvara på en sval, torr plats
	Importerad från		Temperaturgräns
	Fuktighetsgräns		Atmosfäriskt tryck
	Unik identifierare		

GIMA GARANTIVILLKOR
Gima 12-månaders standardgaranti B2B gäller.