

PREKRIVNA MIZA - Zahvaljujemo se vam za izbiro te prekrivne mize – L100.

1 Splošno

1.1 Simboli

V tem priročniku so uporabljene opozorilne besede, ki se nanašajo na tveganja ali nevarne postopke, ki so lahko vzrok za telesne poškodbe ali materialno škodo. Za definicije opozorilnih besed glejte spodnje informacije.

⚠ Opozorilo - Opozorilo označuje potencialno nevarno stanje, ki lahko, če se mu ne izognemo, povzroči smrt ali resne poškodbe.

⚠ Pomembno - Označuje nevarno stanje, ki bi lahko bilo vzrok za materialno škodo, če se mu ne izognemo.

ℹ Nudi koristne nasvete, priporočila in informacije za učinkovito uporabo brez težav.

1.2 Varnost

ℹ Na VSEH delih preverite morebitno prisotnost poškodb. Če opazite poškodbe zaradi prevoza, izdelka NE UPORABLJAJTE. Za nadaljnja navodila se obrnite na prevoznika ali prodajalca.

ℹ Omejitev teže - Omejitev vodoravne in navpične statične obremenitve za L100 znaša 25 kg (55 lbs).

⚠ Splošna opozorila

Tega izdelka ali katere koli razpoložljive dodatne opreme NE uporabljajte, ne da bi prej v celoti prebrali in razumeli ta navodila in morebitno dodatno gradivo z navodili, kot so uporabniški priročnik, servisni priročnik ali listi z navodili, priloženi temu izdelku ali dodatni opremi. Če opozoril, previdnostnih ukrepov ali navodil ne razumete, se pred uporabo te opreme obrnite na zdravstvenega delavca, prodajalca ali tehnično osebje - sicer lahko pride do poškodb ali škode.

Pred uporabo VEDNO preverite, ali je prekrivna miza pravilno zategnjena.

TEHNIČNE izboljšave izdelkov bodo vnesene v novo različico uporabniškega priročnika brez predhodnega obvestila. Če se videz in barva izdelkov spremenijo, to pomeni, da je prevladala narava.

⚠ Opozorilo o dodatkih

Izdelki IDEAL so posebej zasnovani in izdelani za uporabo skupaj z dodatki IDEAL. Dodatna oprema, ki so jo oblikovali drugi proizvajalci, ni bila preizkušena in ni priporočljiva za uporabo z izdelki IDEAL.


⚠ Opozorilo za sestavljanje

PRI sestavljanju sklopa stebra bodite vedno previdni, ker je vodoravna cev na svojem koncu ostra, zato se je ne dotikajte vse do dokončane sestavljanja, saj lahko pride do poškodb ali škode. Po vsakem prilagajanju, popravilu ali servisiranju in pred uporabo se prepričajte, da so vsi pritrdilni sestavni deli varni.

1.3 Predvidena uporaba

Posteljna mizica kot vrsta pohištva je namenjena uporabi kot premična namizna površina za branje, prehranjevanje ali odlaganje manjših osebnih predmetov, kot so očala, telefon ali knjige, da so zlahka dosegljivi.


2 Seznam delov (pakiranja)

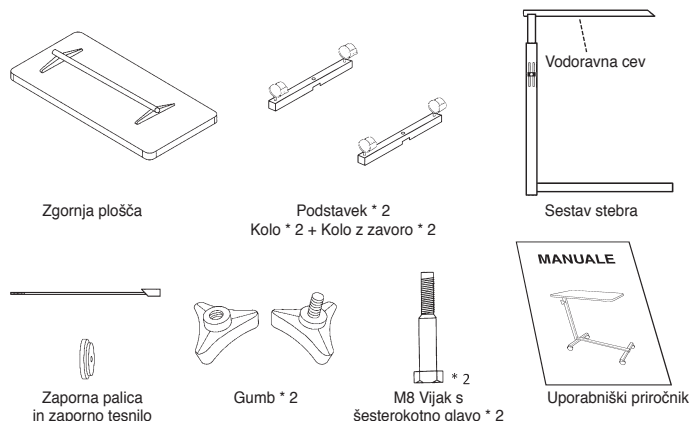

3 Sestavljanje prekrivne mize (ℹ glejte SLIKO 1)

- 1) Odprite konec škatle in izvlecite vsebino.
- 2) Zberite podstavek, zgornjo ploščo, sestav stebra, okovje in ta uporabniški priročnik.
- 3) Sestav stebra postavite na podstavek, nato podstavka vsakega posebej privijte s šestrobim vijakom M8, uporabite ključ 13 mm.
- 4) Zaporno palico vstavite v vodoravno cev in tesnilo na drugi strani, nato namestite gumb, na koncu pa vstavite v cev mizne plošče in gumb trdno privijte.
- 5) Višino mize prilagodite uporabnikovu udobnemu položaju in jo nato pritrdite z gumbom z vijakom.
- 6) Preverite zaporo kolesa, zaporo sprostite za premikanje in blokirajte v nasprotnem primeru.

⚠ Prosimo, bodite previdni in se pri sestavljanju se NE dotikajte ostrega konca cevi.

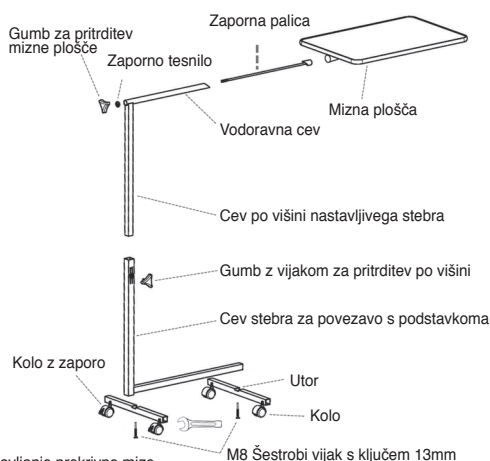


SLIKA 1 Sestavljanje prekrivne mize

3.1 Posteljna mizica je večinoma sestavljena iz naslednjih materialov:

- Vlakenne plošče srednje gostote (mizna ploskev)
- Jeklene cevi (okvir mize)
- Pritrdilni element (vijak, matica, gumb)
- Plastika (cevní vtič, stojalo za steklenice)

4 Uporaba prekrivne mize (ℹ glejte SLIKO 2)

- 1) Sprostite gumb z vijakom in prilagodite višino, nato pa zategnite in pritrdite, ko je miza nastavljena na željeno višino.
- 2) Sprostite gumb z vijakom, da mizno ploščo spustite na željeno višino ali jo vrnite v prvotni / najnižji položaj, nato zategnite in pritrdite.

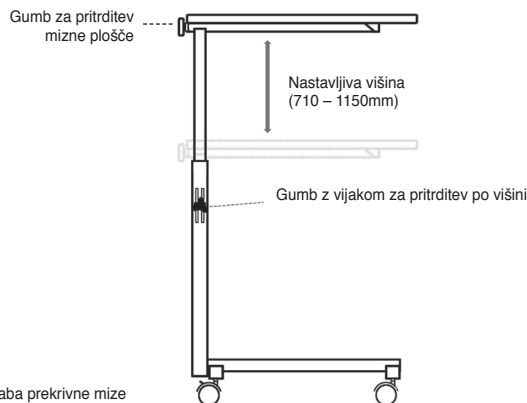

SLIKA 2 Uporaba prekrivne mize


ℹ Ta miza je zasnovana za uporabo kot premična površina mize za pacienta/stanovaleca za branje, prehranjevanje ali shranjevanje majhnih osebnih predmetov, kot so očala, telefon ali knjige, da so na dosegu roke.

Ta miza je namenjena za uporabo SAMO v zaprtih prostorih, v neposredni bližini usposobljenih negovalcev. Ni namenjen namestitvi električnih predmetov (kot so televizorji, računalniški monitorji, lonci za kavo itd.) in se je ne sme uporabljati v bližini odprtega ognja in prekomerne toplote.

Največja omejitev teže za ta izdelek je 25 kg (55 lbs); teža mora biti enakomerno porazdeljena po površini mize, da se ohrani stabilno stanje.

Mize NE preobremeniti, ker bi lahko prišlo do poškodovanja, materialne škode in/ali resnih poškodb. Uporabljajte SAMO po navodilih za predvideno uporabo. Tega izdelka se NE sme uporabljati: kot spalno površino; kot sprehajalco ali pripomoček za gibanje, kot pomoč osebi pri hoji, sedenju ali vstajanju; za preprečitev ali zadržanje padca osebe; ali kot pomoč pri prevozu oseb ali predmetov.

5 Mere (enota: mm) (ℹ glejte SLIKO 3)

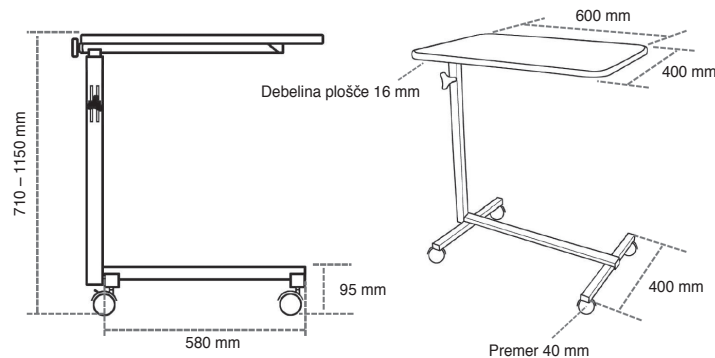

SLIKA 3 Mere

6 Parametri

Ime parametra	L100
Skupna dolžina	640 mm
Skupna širina	406 mm
Skupna višina (mizna plošča v najnižjem položaju)	710 mm
Horizontalna statična obremenitev	25 kg

Vertikalna statična obremenitev	25 kg
Horizontalna trdnost	10 kg
Vertikalni udar	10 kg
Neto teža	6,9 kg
Bruto teža	8,2 kg
Velikost škatle	650 x 64 x 670 mm

7 Čiščenje

Z redno nego in vzdrževanjem boste preprečili nepotrebno obrabo in poškodbe posteljne mizice.

7.1 Kovinske površine

Kljub kovinskemu okvirju z visokokakovostnim prašnim premazom, ki ščiti njegovo površino, je za običajno čiščenje bolje uporabiti suho in mehko krpo ali gobico za brisanje.

7.2 Plastika

Za običajno čiščenje plastične površine operite z mehko krpo, blagim detergentom in vodo. Dobro sperite in osušite z mehko krpo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih kuhinjskih čistil.

7.3 Mizna ploskev

Mizo nežno obrišite z mehko, čisto in vlažno krpo. Ne uporabljajte čistil, ki bi lahko poškodovale površino mize. Za popolnejše čiščenje čistite z blagim milom in malo vode, vodo pa čim prej obrišite, da bo mizna ploskev suha.

GARANCIJSKI POGOJI GIMA

Uveljavlja se standardno 12-mesečno GIMA B2B garancijo.

GIMA 27448

Uvozil:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

Proizvajalec:
Suzhou Ideal Medical Co., Ltd.
No. 88 Huachi Street,
Suzhou Industrial Park,
Suzhou (215000), Jiangsu, China

REF L100

