



Littmann®
Classic III™
Stethoscope



Priročnik za uporabo stetoskopa 3M™ Littmann® Classic III™

Čestitam vam za nakup novega stetoskopa
3M™ Littmann® Classic III™.

Littmannov stetoskop Classic III zagotavlja izjemno akustično občutljivost ter neverjetno vsestranskost. Inovativna oblika vključuje po eno nastavljivo enojno membrano na vsaki strani glave. Večja stran se uporablja pri odraslih bolnikih, manjša pa je zasnovana posebej za otroke. Poleg tega pa lahko stran, ki je namenjena otrokom, enostavno spremenite v klasičen zvon, tako da zamenjate nastavljivo membrano z nastavkom za zvon, ki preprečuje hladen občutek pri dotiku in je priložen stetoskopu. Za več informacij obiščite www.littmann.com.

Razlaga simbolov


 Glejte navodila za uporabo.

 Ne vsebuje naravnega gumiranega lateksa.

Navodila za uporabo


Stetoskop vstavite v ušesa

Slušalke stetoskopa so ukrivljene tako, da ustrezajo anatomiji tipičnega ušesnega kanala in se udobno prilegajo ter so zvočno zatesnjene. Ko si natikate slušalke v ušesna kanala, naj bosta olivi usmerjeni naprej.

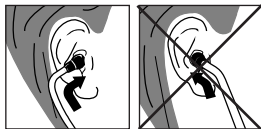


Prilagodite napetost slušalk

Napetost lahko nastavite tako, da se bodo slušalke tesno in udobno prilegale vašim ušesom.

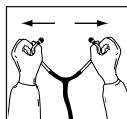

Da bi zmanjšali vzmetno napetost slušalk, ušesni cevki potegnite narazen. To ponavljajte, dokler ne dosežete želene napetosti.

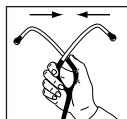


Da bi povečali vzmetno napetost slušalk, ušesni cevki potisnite skupaj. To ponavljajte, dokler ne dosežete želene napetosti.

Izberite aktivno stran glave stetoskopa


Stetoskop Littmann Classic III ima dvostransko glavo. Zvočno aktivna je lahko samo ena stran glave naenkrat, kar označuje oznaka na nastavku. Aktivno stran lahko spremenite tako, da zasučete glavo.

Nastavljiva membrana Littmann – poslušajte nizko- in visokofrekvenčne zvoke

Na obeh straneh glave je patentirana nastavljiva membrana Littmann, ki omogoča ojačenje nizko- in visokofrekvenčnih zvokov preprosto s prilaganjem pritiskanja na bolnika.

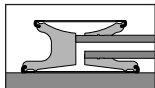

Nizke frekvence: Za ojačenje zvokov z nižjimi frekvencami na bolnika pritisčajte le narahlo.

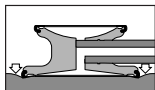

Visoke frekvence: Za ojačenje zvokov z višjimi frekvencami na bolnika pritisčajte bolj močno.

Pretvorba v klasičen odprti zvon



Manjšo stran glave lahko uporabljate skupaj z nastavljivo membrano Littmann ali pa jo spremenite v klasični odprti zvon, tako da uporabite nastavek za zvon, ki preprečuje hladen občutek pri dotiku in je priložen stetoskopu.



Za odstranjevanje nastavljive membrane Littmann z nohti palca in kazalca primite rob membrane ter membrano povlecite in dvignite z glave.



Za montažo nastavka za zvon, ki preprečuje hladen občutek pri dotiku, eno stran nastavka za zvon postavite na rob glave ter nastavek povlecite preko glave in okoli njenega roba.



Za vnovično namestitve nastavljive membrane Littmann odstranite ta nastavek, ki preprečuje hladen občutek. Upogljivi rob nastavljive membrane vstavite v utor na obročku in obroček počasi razginite okoli glave in preko njenih robov.


SI

Čiščenje, razkuževanje in shranjevanje

Stetoskop pred vsako uporabo očistite z robčki, ki vsebujejo 70 % izopropilni alkohol, ali pa uporabite robček za enkratno uporabo ter milnico in vodo. Za najboljšo prakso se je pri čiščenju stetoskopov, da bi odstranili organski material, izkazala uporaba robčka za enkratno uporabo.

2 % raztopina belila se lahko uporabi za dezinfekcijo stetoskopa. Vendar pa se stetoskopi, katerih cevke vsebujejo rdeči pigment (roza, barva burgundca, slive, breskve, maline, pomaranče ...), pri uporabi belila rahlo razbarvajo. Zaradi te lastnosti belila raztopino z belilom uporabljajte le redko in/ali če je to potrebno.

Nastavljivi membrani, nastavek za preprečevanje hladnega občutka in olive lahko snamete, če jih želite temeljito očistiti (vsi deli in površine morajo biti pred vnovično montažo popolnoma suhi). Olive s slušalk odstranite tako, da jih močno povlečete. Olive znova namestite tako, da manjši konec olive trdno potisnete na ušesno cevko.

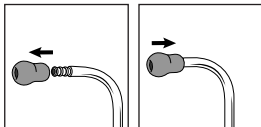

Stetoskopa ne potaplajte v kakršno koli tekočino.

Stetoskopa ne sterilizirajte z nobenim postopkom sterilizacije.

Stetoskopa ne izpostavljajte visoki vročini.

Program servisa in garancije za stetoskope Littmann

Svoj stetoskop preko spleta registrirajte na: <http://www.littmann.com/warranty-registration>

Stetoskop Littmann Classic III ima pet (5) let garancije, s čimer jamčijo, da je pripomoček brez napak v materialu in izdelavi. V garancijskem obdobju se popravila opravijo brezplačno, ko stetoskop vrnete družbi 3M, razen v primerih očitne zlorabe ali nenamerne poškodbe.


Za servis in popravila v ZDA glejte www.littmann.com/service ali pokličite 1-800-292-6298. Če niste v ZDA, glejte www.littmann.com, kjer najdete kontaktne informacije lokalnih predstavništev 3M.

3M, Littmann, logotip L Littmann, L, in Classic III so blagovne znamke družbe 3M.

Uporaba v Kanadi je licenčna.

© 2015, 3M. Vse pravice pridržane.



Made in U.S.A. by  **3M Health Care**,
2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144
(U.S.A.) 1-800-228-3957 Visit our website www.littmann.com



Not Made
With Natural
Rubber Latex

Consult
instructions
for use

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L,
and Classic III are trademarks of 3M.

Used under license in Canada.

© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany