

SL - NAVODILA ZA UPORABO KARTONSKI USTNIKI ZA ENKRATNO

NAMEN UPORABE: ustniki za enkratno uporabo so namenjeni za uporabo skupaj z opremo za testiranje pljučne funkcije in omogočajo bolniku, da opravi preiskavo brez neposrednega stika z opremo.

Pacient osebno manipulira z ustnikom, tako da ga vstavi v opremo. Ustnik je treba nanašati samo na nepoškodovano, čisto in zdravo kožo.

IDENTIFIKACIJA IZDELKA: identifikacijski podatki (referenca, serija in datum proizvodnje) so na nalepki, pritrjeni na škatlo.

UPORABA:

- Vedno upoštevajte navodila spirometra.
- Brez sile vstavite ustnik v senzor naprave (turbina ali pnevmotakometer). Nikoli ponovno ne uporabite ustnika, da pacienta ne izpostavite navzkrižni kontaminaciji.
- Ne odpirajte pred uporabo.
- Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.
- Naprava ni primerna za uporabo v neonatalni pediatriji.
- Hraniti na hladnem in suhem mestu.

ODSTRANJEVANJE IN VARNOST: po uporabi je treba izdelek odvreči v običajne zabojnike za nestrupene trdne odpadke ali med splošne bolnišnične odpadke.

KONTRAINDIKACIJE: glede na izkušnje in rezultate različnih analiz ni škodljivih učinkov zaradi pravilne uporabe izdelka.




SHRANJEVANJE: hraniti na hladnem in suhem mestu.

OPOZORILO:

- Pakiranje v individualno toplotno zavarjeno ovojnico (single-wrap) zagotavlja odsotnost bakterij, kar je redno kontrolirano po sistemu kakovosti proizvajalca. Če se medicinski pripomoček ponovno uporabi, obstaja nevarnost navzkrižne okužbe bolnika, ki ga ponovno uporabi.

- Če pripomoček ponovno uporabite, obstaja tveganje navzkrižne okužbe za bolnika, ki ga ponovno uporabi.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

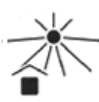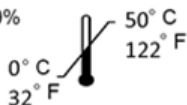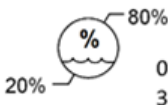

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750