

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following Ambu White Sensor electrodes:
WS, WS-RT, WP25, WP25A, WP25B, 0215M, 0315M, 0415M, 0715M, 2742*, 2742/RT*, 2837*, 3345C/RT*, 3351/
RT*, 3532*, 3532/RT*, 3552DUAL/RT*, 4200, 4300, 4242, 4440, 4500M, 4500M-H, 4530, 4535M, 4540,
4560M, 4570M, 4631/2, 4841P, 5050, 6000, 7041P, CMH/1,
Ambu Blue Sensor electrodes: BS-TAB-2300.

Instructions for use

Инструкции за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Instruções de utilização

Instrucţiuni de utilizare

Инструкция по применению

Návod na použitie

Navodila za uporabo

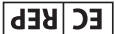
Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明

EU Importer:
Ambu A/S
Ballerupkøkken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 72 25 20 00
ambu.com

Made in India

 Medico Electrodes Ltd.
Noida, Uttar Pradesh - 201305, India
Plot 142A/1, 1, 2, 27, 28 & 29, Noida Special Economic Zone,
www.medicoelectrodes.com

[AN ISO 13485 COMPANY]

MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL LTD.

030320 _ V03 - 2021/06 - TSC 11087



Navodila za uporabo

Elektrode EKG

1.0 Predvidena uporaba

Elektroda se nanese na površino telesa, od koder odda električni signal v napravo za merjenje in snemanje elektrokardiograma ali vektorkardiograma.

1.2 Opozorila in svarila

Opozorila

- Površinske elektrode se smejo namestiti samo na nepoškodovano, čisto kožo (npr. ne na odprte rane oziroma poškodbe ali okuženo oziroma vneto območje).
- Samo za enkratno uporabo. Vnovična uporaba lahko povzroči kontaminacijo, ki vodi v infekcijo.

Pozor

- Med kirurškimi posegi morajo biti elektrode nameščene čim dlje od elektro-kirurškega območja, s čimer zmanjšate neželene radiofrekvenčni pretok, ki utegne povzročiti opekline.
- Elektrode smejo uporabljati le strokovnjaki oziroma osebe, ki so se prej posvetovale z zdravnikom, ki zna elektrode pravilno namestiti in uporabljati.
- Elektrod ne namakajte, spirajte ali sterilizirajte, saj lahko ti postopki pustijo na elektrodah škodljive ostanke ali povzročijo njihovo okvaro.
- Ob menjavi elektrod nove namestite na drug predel kože, da

1.3 Možni neželeni učinki

Možni neželeni učinki pri uporabi površinskih elektrod so kožne reakcije, kot so opekline, pordelost kože, srbenje in mehurčki.

2.0 Razlaga uporabljenih simbolov

Simboli za elektrode Ambu White/ Blue Sensor	Pomen	Simboli za elektrode Ambu White/ Blue Sensor	Pomen	Simboli za elektrode Ambu White/ Blue Sensor	Pomen
	Medicinski pripomoček		Mokri gel		Krpa
	Prepušča rentgenske žarke		Polimer		Pena
	Trdni gel		Del z uporabljenjo električno zaščito tipa BF		
	Pogoja uporaba pri magnetni resonanci. Samo statično magnetno polje z gostoto 1,5 ali 3 T. Najvišji prostorski gradient polja 25.000 G/cm ali 250 T/m. Najvišja povprečna stopnja specifične absorpcije (SAR) za celotno telo 2 W/kg za 15 minut slikanja. * Najvišji prostorski gradient polja 12.900 G/cm ali 129 T/m.				

3.0 Navodila za uporabo

- Po potrebi očistite mesta nanosa z milnico in vodo ter jih temeljito posušite.
- Samo za odrasle: Če je treba, obrijte dlake na preveč poraščenih predelih. Če je impedenca kože previsoka, samo nežno podrgnite.
- Postavitve elektrod običajno določijo zdravnik ali bolnišnično osebo oziroma je navedena v lokalnih predpisih/navodilih za izvedbo postopkov.
- Zaščitni ovojji imajo lahko ostre vogale, zato bodite pri odstranjevanju elektrod iz ovoja še posebej previdni. Odlepite elektrodu iz zaščitnega ovoja in jo položite na kožo. Zaščitni ovoj zavrzite takoj, ko odstranite elektrode.
- Ko uporabljate elektrode s priključki, je treba priključek postaviti tako, da vodilne žice potekajo v isti smeri proti opremi.
- Namestite elektrodo na kožo tako, da nežno pogladite lepljivi rob z gladkim in čvrstim krožnim gibom.
- Priključite vodilno žico iz merilne naprave EKG na elektrodo.
- Odstranjevanje elektrod: Previdno dvignite jeziček ali rob elektrode, pri čemer ohranajte nizek profil, in počasi povlecite elektrodo s kože ter držite in pritiskajte navzdol na novo izpostavljeno kožo med odstranjevanjem elektrode. Ko jo vlečete, naj bo elektrodo tesno ob površini kože. Ne odstranjujte elektrode pod kotom 45 stopinj, da se zmanjša tveganje za mehanske poškodbe.
- Če se samolepljene elektrode ne oprimejo več dobro kože, jih je treba zamenjati.
- Ostanki gela lahko odstranite s papirnato brisačo ali vodo.
- V odprti vrečki se lahko elektrode izsušijo, zato jo odprite le, ko jo zares potrebujete.
- Elektrode so za enkratno uporabo in jih je treba zavreči v skladu z lokalnim bolnišničnim protokolom.

4.0 Čas uporabe (v urah)

Številka artikla	Gelni sistem	Lepilni sistem	Senzorski material	Indikacija za bolnika	Možnosti – uporaba	Čas uporabe (ure)
BS-TAB-2300	Trdni gel	Trdni gel	Ag/AgCl	Za odrasle	Počitek	1/2
W5	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Kratkotrajno	24
W5/RT	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Kratkotrajno	24
W5P25	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Za otroke	Počitek/dolgotrajno	48
W5P30	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Odrasli/otroci	Počitek/dolgotrajno	48
0215M	Trdni gel	Trdni gel	Ag/AgCl	Za otroke	Počitek	1/2
0315M	Trdni gel	Trdni gel	Ag/AgCl	Za odrasle	Počitek	1/2
0415M	Trdni gel	Trdni gel	Ag/AgCl	Za odrasle	Počitek	1/2
0715M	Trdni gel	Trdni gel	Ag/AgCl	Za odrasle	Počitek	1/2
2742	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Odrasli/otroci	Počitek	24
2742/RT					Dolgotrajno**	48
2837	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Počitek	1/2
3245D/RT	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Počitek/dolgotrajno	48
3351/RT	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Stres/počitek/merjenje	48
3552	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Počitek	24
3552/RT					Dolgotrajno**	48
3552DUAL/RT					Počitek/dolgotrajno	48
4200	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Kratkotrajno	24
4300	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Kratkotrajno	24
4242	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Stres/dolgotrajno	48
4440	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Dolgotrajno	48
4500M	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Kratkotrajno	24
4500M-H	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Kratkotrajno	24
4530	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Počitek	24
4535M	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Kratkotrajno	24
4540	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Počitek	24
4560M	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Stresni test	24
4570M	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za otroke	Kratkotrajno	24
4831Q	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Odrasli/otroci	Kratkotrajno	24
4841P	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Kratkotrajno	24
5050	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Stres/dolgotrajno	48
6060	Mokri gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Stres/dolgotrajno	48
7841P	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Kratkotrajno	24
CM/1	Trdni gel	Aknil	Ag/AgCl	Za odrasle	Dolgotrajno	48

** Ploščati priključki

Ambu® je registrirana blagovna znamka podjetja Ambu A/S, Danska