



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA VETERINARIA - MEDIA**  
**DIGITAL VET SCALE - MEDIUM**  
**BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE**  
**BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA**  
**ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA**  
**VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT**  
**ΒΕΤΕΡΙΝΑΡΕΗ ΚΑΙΤΑΡ - СРЕДЕН**  
**VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR**  
**ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ**  
**ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN**  
**ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS**  
**SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA**  
**SCALA VETERINARĂ – MEDIE**  
**VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER**

**REF 6680 (Gima 27258) - 6681 (Gima 27259)**

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/  
Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător

Výrobca:

**Momert Zrt.**

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary


Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/  
Distribuoány/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

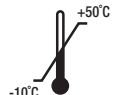

Pozorne si preštudujte návod na obsluhu skôr ako začnete výrobok používať. Návod uchovávajte na bezpečnom mieste pre ďalšie nahliadnutia. Zabezpečte, aby ďalší ľudia, ktorí výrobok používajú, boli oboznámení s týmito pokynmi.

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Uistite sa, či dodržiavate označenú polaritu batérie pri jej vkladaní a výmene.
- Ak sa zariadenie nebude používať dlhšie obdobie, batériu vyberte.
- Počas použitia nenechávajte jednotku bez dozoru.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Výrobok používajte iba na zamýšľaný účel špecifikovaný v návode na obsluhu.
- Jednotku používajte iba na stabilnej horizontálnej ploche.
- Jednotku pred čistením, montážou alebo demontážou krytu vypnite a vyberte batériu!
- Na čistenie jednotky nepoužívajte abrazívne alebo chemicky agresívne látky.
- Jednotku nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo, ak došlo k jej pádu, poškodeniu alebo bola vystavená kvapalinám. Jednotku zanešte do autorizovaného servisného strediska na preskúšanie a opravu.
- Jednotka je vhodná iba na použitie v domácnosti. Nie je určená na komerčnú prevádzku.
- Jednotku udržiavajte mimo tepelných zdrojov, ako sú radiátory, rúry atď. Nevystavujte ju priamemu slnečnému svetlu a vlhkosti.
- Nedotýkajte sa jednotky mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Výrobok je krehké meracie zariadenie. Zabráňte nárazu a pádu.
- Zariadenie neopravujte sami. Skontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.

### NEDODRŽANIE POKYNOV VÝROBCU MÔŽE VIESŤ K ODMIETNUTIU ZÁRUČNEJ OPRAVY!

#### ŠPECIFIKÁCIA:

- Presný merací systém
- Automatické vynulovanie
- Automatické vypnutie
- Ukazovateľ nízkeho výkonu
- Ukazovateľ preťaženia

#### TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie: 1pc 3V, CR2032 lítiová batéria (zahnutá)  
 Max. odmerateľná hmotnosť: 3-100 kg  
 Hmotnostné prírastky: 100 g  
 Veľkosť displeja: LCD priemer = 8,0 cm, 3,15 palca  
 Platforma: 6680 (GIMA 27258): 635 × 355 mm; 6681 (GIMA 27259): 830 × 620 mm  
 Meracie jednotky hmotnosti: kg, lb, st  
 Pracovná/Skladovacia teplota: 10-40 °C/-10-50 °C

#### NÁVOD NA OBSLUHU

Pred prvým použitím váh odstráňte izolačnú nálepku z batérie na zadnej strane váh.  
 Váhy položte na tvrdý rovný povrch. Na mäkkom povrchu (napríklad: na koberčeku ) by váhy mohli ukazovať nepresnú hodnotu.  
 Váhy spustíte klepnutím na stred platformy chodidlom.  
 Prvýkrát displej zobrazí prebiehajúcu „8“ a potom sa na displeji zobrazí „0,0“.  
 Čakajte, kým sa nezobrazí „0,0“!  
 Na váhy položte zvieratko.  
 Potom sa na displeji objaví hmotnosť vášho zvieratka blikajúca dvakrát. Nameranú hmotnosť môžete vidieť asi 10 sekúnd.  
 Ak sa po zapnutí váh neuskutoční žiadne váženie, po 60 sekundách sa automaticky vypnú.

#### VÝMENA BATÉRIE

Batéria sa musí vymeniť, keď sa na obrazovke displeja ukáže:



Otvorte držiak batérie na zadnej strane váh a opatrne vyberte batériu zatiahnutím čiernej plastovej pridržiavacej nálepky. Upevňovací štítok sa nachádza na hornej strane batérie. Nepretrhnite kovový štítok. Vymeňte batériu za novú. Vybitá batéria by sa mala odhodiť na vhodné miesto.

BATÉRIE NIE SU ZAHNUTÉ V ZÁRUCKE!

#### VAROVANIE PREŤAŽENIA

Ak sú váhy preťažené, zobrazí sa nasledujúce:



#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Povrch jednotky sa smie čistiť iba vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, ani tvrdé predmety, keďže môžu poškodiť povrch jednotky! Jednotku nikdy nečistite pod tečúcou vodou, nevyplachujte ju a neponárajte do vody!

#### OPRAVA A ÚDRŽBA

Akúkoľvek rozsiahlu údržbu alebo opravu, ktorá si vyžaduje prístup do vnútorných častí výrobku musí vykonávať odborné servisné stredisko.

#### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Obalové materiály a zastarané zariadenia by sa mali recyklovať.
- Prepravná škatuľa sa môže zlikvidovať ako triedený odpad.
- Polyetylénové vrecká by sa mali odovzdať na recykláciu.



**Likvidácia:** Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom. Používatelia musia zlikvidovať toto zariadenie tak, že ho zanesú do špecifického recyklačného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia.

#### ZÁRUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA

Platí 12-mesačná záruka štandardu B2B spoločnosti Gima.