



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviškai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

Digitálny stetoskop Littmann® CORE spoločnosti 3M™

Prehľadná príručka

Stiahnite si aplikáciu Eko z obchodu Apple App Store® alebo Google Play Store®.

Aktivujte bezdrôtovú technológiu Bluetooth® na svojom telefóne alebo tablete, spustíte aplikáciu a zapnete stetoskop CORE.


Eko

V balení

- Digitálny nastaviteľ Eco CORE a stetoskop Littmann® Cardiology IV™ od spoločnosti 3M™
- Prídavná súprava mäkkých tesniacich oliviek Littmann Snap Tight (malých) od spoločnosti 3M
- Nechladivé puzdro
- USB napájací kábel
- Prehľadná príručka

Olivky

Olivky vložte smerom dopredu.

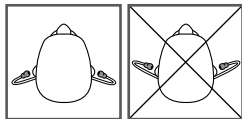

Hlasitosť

Na úpravu hlasitosti použite tlačidlá (+) a (-). K dispozícii je 7 úrovní hlasitosti.

Zapnutie a vypnutie

Keď je stetoskop CORE vypnutý, funguje ako nezosilnený stetoskop.

Ak chcete stetoskop CORE zapnúť, zatlačte vypínač dovnútra. Kontrolka začne blikať. V olivkách sa ozve zosilnený a odfiltrovaný zvuk.

Funkcie telemedicíny a umelej inteligencie

Aplikácia Eko má funkcie telemedicíny a umelej inteligencie, na využitie ktorých musíte mať predplatné softvéru (ak je k dispozícii, predáva sa zvlášť).

Predplatné si môžete nastaviť online na stránkach ekohealth.com

Aktívne potláčanie šumu

Stetoskop CORE má funkciu aktívneho potláčania šumu, ktorá odstraňuje hluk z okolitého prostredia. Aktívne potláčanie šumu môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Eko.



Notifikácie

⓪ (●) (bliká)

stetoskop CORE je zapnutý a vyhľadáva zariadenia

● (žltá)

stetoskop CORE je vypnutý a nabíja sa

(●●) (žltá)

stetoskop CORE má takmer vybitú batériu

○

stetoskop CORE je pripojený

● (zelená)


stetoskop CORE je plne nabitý

(●●) (modrá)

stetoskop CORE nahráva

Nahrávanie

Po pripojení k aplikácii Eko môžete tlačidlom (o) začať nahrávanie.

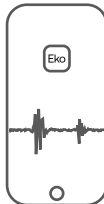

Nabíjanie

Pripojte mikro USB kábel k stetoskopu CORE a použite 5 V USB nabíjačku s certifikátom UL alebo označením CE. Úplné nabitie stetoskopu trvá približne 2 hodiny. Po úplnom nabití bude kontrolka svietiť na zeleno.

Návod na použitie

Pred použitím stetoskopu Littmann CORE si prečítajte návod na použitie. Návod nájdete na stránke: ekohealth.com/getstarted
Viac informácií o zariadeniach 3M nájdete na stránke HCBGregulatory.3M.com

Servis a podpora

V rámci USA nájdete informácie na stránke littmann.com/service alebo môžete zatelefonovať na číslo 1-800-228-3957. V prípade, že sa nachádzate mimo USA, navštívte stránku www.littmann.com, kde nájdete kontaktné informácie vašej miestnej kancelárie spoločnosti 3M.



Apple App Store je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play sú obchodnými značkami spoločnosti Google LLC.
Bluetooth® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Bluetooth SIG.
LBL 143 Rev B

System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

3M Company
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA

MD

CE

EC REP **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

Eko Devices, Inc.
1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA

MD

CE

0537

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.
Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11
34-8726-3344-0