

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA. PRED UPORABO SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.

KONTRAINDIKACIJE: Ni primerno za osebe, težje od 110 kg (242 lbs) - Ni primerno za uporabo na ledenih ali spolzkih površinah. - Ni primerno za osebe, alergične na lateks.


NAVODILA ZA UPORABO: Da razprete palico, pritrite ročaj in pustite, da se zložljivi deli droga razprejo proti tlom. Da bi preprečili padce, morate vedno preveriti, ali so posamezni segmenti droga (sl. 1) varno pritrjeni na svoje mesto.

OPOZORILO: NE razstavljajte telesa palice Trusty Cane™. V palici je elastična vrvica. Nenadzorovana sprostitve elastične vrvice v notranjosti lahko povzroči hude poškodbe nezaščitene delov telesa, zlasti oči. Če se elastična vrvica prereže, obrabi ali poškoduje, prenehajte z uporabo. Vrvce NE raztegujte več, kot je potrebno za razstavljanje ali sestavljanje segmentov.

Za najavljanje višine vaše palice Trusty Cane™: Sprostite vrtljivo zaporo (sl. 2) tako, da jo večkrat zavrtite v smeri urinega kazalca. Pritisnite zaporni gumb (sl. 3) in potegnite ročaj navzgor, da ga podaljšate, ali potisnite ročaj navzdol, da ga skrajšate. Ne pozabite ponovno zategniti vrtljive zapore, ko palico Trusty Cane™ nastavite na željeno višino.

OPOZORILO: Da bi preprečili padce, vedno preverite, ali so posamezni segmenti droga varno zaklenjeni na svojem mestu in ali je zaporni gumb povsem zaskočen. Da bi zložili palico Trusty Cane™: Palico Trusty Cane™ lahko enostavno zložite v priročno potovalno velikost, tako da ločite 4 posamezne dele droga. Držite vsak sklop segmentov droga v bližini spoja in jih potegnite narazen (sl. 4). Posamezni deli droga se bodo lepo zložili skupaj narazen (sl. 5).

Za uporabo lučk na vaši palice Trusty Cane™: Gumb na vrhu ročaja palice Trusty Cane™ (sl. 6) vklopi luči. S prvim pritiskom na gumb se vklopijo lučka z drugim pritiskom pa se izklopijo. Lučke se bodo avtomatsko ugasnile po 20 minutah.

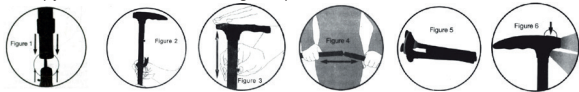

Vzdrževanje vaše palice Trusty Cane™: Za zamenjavo baterij uporabite križni izvijač, da odvijete pokrovček predela za baterije pod ročajem palice Trusty Cane™. Odstranite vse iztrošene baterije in jih ustrezno odstranite. Uporabite 3 baterije AAA in poravnajte + in -, kot je prikazano, sicer lučke ne bodo svetile. Ponovno vstavite in zategnite vijak na pokrovu za baterijo. Redno pregledujte palico za znake obrabe, vključno z obrabo elastične vrvice ali obrabo gumijastih nogic. Če opazite znake obrabe, takoj prenehajte z uporabo.

OPOZORILO: Ne mešajte starih in novih baterij. Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) ali akumulatorskih (nikelj-kadmijevih) baterij.

GARANJSKI POGOJI DRUŽBE GIMA: Velja 12-mesečna standardna garancija B2B družbe Gima.

Gima 43044 - 43045

REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por/Hergestelt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootaja/Valmistaja/Proizvodat/Gyártó/Razots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilverlad av/تولید شده توسط/
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/
Importado por/Εισαγυγμένο από/Bieseno ot/Dovezeno uživatelem/Importet
af/Importatja/ Tuojaz/Uvezeno od strane/Importälta/Importatja/Importat
af/Importiert av/Geimporteerd door/Importowane przez/Importat de/Dovázal/
Uvozil/Importat av/توريد بواسطة/
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



