

**X36-1 LETTINO DA VISITA ELETTRICO**  
**X36-1 ELECTRIC EXAMINATION TABLE**  
**X36-1 DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE**  
**X36-1 CAMILLA DE EXPLORACIÓN ELÉCTRICA**  
**X36-1 ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGSLIEGE**  
**X36-1 MESA DE EXAME ELÉTRICA**  
**X36-1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ**  
**X36-1 ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАСА ЗА ПРЕГЛЕД**  
**X36-1 ELEKTRICKÝ VYŠETŘOVACÍ STŮL**  
**X36-1 ELEKTRISK UNDERSØGELSESELEJE**  
**X36-1 ELEKTRILINE LÄBIVAATUSLAUD**

**X36-1 SÄHKÖINEN TUTKIMUSPÖYTÄ**  
**X36-1 ELEKTROMOS VIZSGÁLÓASZTAL**  
**X36-1 ELEKTRINĚ APŽIŮROS KUŠETĚ**  
**X36-1 ELEKTRISKAIS IZMEKLĒŠANAS GALDS**  
**X36-1 ELEKTRISCHE ONDERZOEKSTAFEL**  
**X36-1 ELEKTRYCZNY STÓŁ DO BADAŃ**  
**X36-1 CANAPEA ELECTRICĂ DE EXAMINARE**  
**X36-1 ELEKTRICKÝ VYŠETROVACÍ STŮL**  
**X36-1 ELEKTRIČNA PREGLEDNA MIZA**  
**X36-1 ELEKTRISKT UNDERSÖKNINGSBORD**

**X36-1 طاولة الفحص الكهربائية**

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - BENUTZERHANDBUCH - MANUAL DO USUÁRIO - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - BRUGERVEJLEDNING - KASUTUSJUHEND - KÄYTTÖOHJE - PRIRUČNIK ZA UPOTREBU - FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ - NAUDOJIMO VADOVAS - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA - GEBRUIKERSHANDLEIDING - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - POUŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA - PRIROČNIK ZA - ANVÄNDARHANDBOK UPORABO - دليل المستخدم

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.
- Всички сериозни инциденти, които са настъпили във връзка с доставеното от нас медицинско изделие, трябва да се сигнализират на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която производителят е установен.
- Je třeba nahlásit jakoukoli vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s námi dodávaným zdravotnickým prostředkem, výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém máte sídlo.
- Du skal rapportere enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med det medicinske udstyr leveret af os, til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du befinder dig.
- Peate teatama kõigist meie poolt tarnitud meditsiiniseadmega seotud tõsistest vahejuhtumitest tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus te asute.
- Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinnällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.
- Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi.
- A gyártónak, illetve a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának jelezni kell bármilyen olyan súlyos balesetet, amely az általunk szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatban történt.
- Privalote pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje esate įsisteigęs, kompetentingai institucijai apie bet kokį rimtą incidentą, įvykusį dėl mūsų tiekiamų medicinicos prietaisų.
- Par nopietnu negadījumu, kas notiek saistībā ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentā iestādei, kurā negadījums ir radies.
- Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.
- Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.
- Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.
- Každú vážnu udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s nami dodanou zdravotníckou pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte sídlo.
- O vsakršni hujši nesreči, do katere bi prišlo v povezavi z medicinskim pripomočkom, ki smo vam ga dobavili, je treba obvestiti pristojne oblasti v državi v kateri imate sedež.
- Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvariga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.



**Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd**  
 No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,  
 Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China  
 Made in China

**REF**


**X36-1**

EC REP

**SUNGO Europe B.V.**  
 Fascinat Boulevard 522, Unit 1.7,  
 2909VA Capelleaan den IJssel, The Netherlands



**Gima S.p.A.**  
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
 www.gimaitaly.com

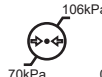

## SLOVENSKI

### PREDVIDENA UPORABA

Pregledna miza je ključnega pomena za udobje pacienta pri poškodbah, travmah ali šoku.

#### OPOZORILO

O vsakem resnem dogodku, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in / ali pacient sedež.


#### 1. Način uporabe



|               |                                |    |             |
|---------------|--------------------------------|----|-------------|
| Velikost mize | Dolžina                        | mm | 1960±10     |
|               | Širina                         |    | 680±10      |
|               | Višina mize od tal             |    | 470-910 ±10 |
| Teža          | Maksimalna teža pacienta       | kg | 180         |
| Teža          | Največja dovoljena obremenitev | kg | 200         |

#### 1.1 Nastavljanje višine

Celotno pregledno mizo je mogoče krmiliti z ročnim upravljalnikom

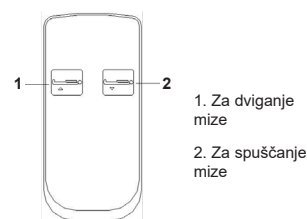

### 2. Električna pregledna miza-vzdrževanje

1. Za varno uporabo pregledne mize je treba redno izvajati varnostne preglede. Priporočamo, da jo pregledate vsakih šest mesecev, da se prepričate, da spoji niso zrahljani in da vse funkcije delujejo normalno.
2. Ko se ogroditve pregledne mize postara in doseže določeno obdobje vzdrževanja, je mogoče kovinske dele mize ter plastične dele okvirja iz nerjavnega jekla reciklirati.
3. Med uporabo se izogibajte praskanju plošče s predmeti z ostrimi robovi ali noži ter jo pogosto čistite, da ostane čista in suha.
4. Če se plošča nehote umaže, priporočamo, da jo očistite. Za čiščenje pregledne mize ne uporabljajte alkalnih ali korozivnih čistil, saj lahko povzročijo rjavenje površine iz nerjavnega jekla.

### 3. Pregledna miza-čiščenje

1. Pri čiščenju krpo, namočeno v nevtrarno čistilo, razredčeno z vodo, dobro ožemite in obrišite površino, nato s krpo, namočeno v čisto vodo, odstranite ostanke čistila, na koncu pa površino obrišite s suho krpo.
2. Ne uporabljajte hlapnih snovi (razredčila, hlapna sredstva, bencin ipd.), saj lahko povzročijo kemične reakcije in poškodujejo pregledno mizo.
3. Pri čiščenju z razkužilom ga pred uporabo vedno razredčite na predpisano koncentracijo. Glede na sestavo lahko razkužilo povzroči korozijo kovinskih ali plastičnih delov ter druge nezaželene pojave, kot so razbarvanje in deformacija. Zato priporočamo naslednjo sestavo razkužila:

0,05~0,2 % razkužila na osnovi amonijevega klorida  
0,05~0,2 % razkužila s kloriranim fenilom  
0,05 % raztopine diklofenak etana  
0,05~0,2 % razkužila na osnovi natrijevega hipoklorita

Ne uporabljajte dimnih sterilizatorjev, avtoklavov ter ne uporabljajte metila (fenola) za čiščenje vzglavne plošče in noge pregledne mize. To lahko povzroči korozijo, razbarvanje in obrabo.

Opomba: Pri čiščenju pregledne mize ali menjavi prevlek pregledne mize še posebej pazite na vogale, robove in vijake okvirja, da se ne opraskate.

#### 4. Pakiranje, transport, shranjevanje

1. Pregledna miza se pakira v skladu s pogodbo ali standardom proizvoda.
2. Med transportom pakirne mize se izogibajte hitremu premikanju, močnim tresljajem ter zagotovite zaščito pred sončno svetlobo in dežjem.
3. Od datuma prodaje, če je izdelek poškodovan ali okvarjen kljub pravilni namestitvi in uporabi v skladu s specifikacijami, izdelek uživa enoletno brezplačno garancijo in doživiljenjsko vzdrževanje ob predložitvi »potrdila« ali računa.
4. Od datuma nakupa, če izdelek v enem letu zaradi težav s kakovostjo resnično ne deluje pravilno ali je poškodovan, bo podjetje uporabnikom zagotovilo brezplačno popravilo izdelka.
5. Doživiljenjske storitve proizvajalca: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.

#### 5. Poprodajne storitve

1. Ustrezni hranite dokumentacijo in račune, ki so priloženi stroju. Te dokumente boste morali predložiti ob uveljavljanju garancije in vzdrževanju pri podjetju.
2. Če med uporabo pride do kakršnih koli težav, se pravočasno obrnite na naše podjetje, da vam bomo lahko zagotovili natančno in hitro tehnično podporo tervzdrževanje.
3. Od datuma prodaje, če je izdelek poškodovan ali okvarjen kljub pravilni namestitvi in uporabi v skladu s specifikacijami, izdelek uživa enoletno brezplačno garancijo in doživiljenjsko vzdrževanje ob predložitvi »potrdila« ali računa.
4. Od datuma nakupa, če izdelek v enem letu zaradi težav s kakovostjo resnično ne deluje pravilno ali je poškodovan, bo podjetje uporabnikom zagotovilo brezplačno popravilo izdelka.
5. Doživiljenjske storitve proizvajalca: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.

#### EMC

- 1) Ta izdelek zahteva posebne previdnostne ukrepe glede elektromagnetne združljivosti (EMC) in mora biti nameščen ter dan v obratovanje v skladu z navodili za EMC. Ta enota je lahko občutljiva na prenosno in pomično RF komunikacijsko opremo.
- 2) \* Ne uporabljajte mobilnega telefona ali drugih naprav, ki oddajajo elektromagnetna polja, v bližini enote. To lahko povzroči nepravilno delovanje enote.
- 3) Pozor: Ta enota je bila natančno testirana in pregledana, da se zagotovi pravilno delovanje in učinkovitost!
- 4) \* Pozor: Tega stroja ne smete uporabljati v neposredni bližini ali v na drugi opremi. Če je uporaba v bližini ali zlaganje nujno, je treba stroj opazovati, da se preveri njegovo normalno delovanje v konfiguraciji, v kateri bo uporabljen.

| Guidance and Manufacturer's Declaration – Electromagnetic Immunity                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The V8v8c is intended for use in the following electromagnetic environment.<br>The customer or user of the V8v8c should make sure it is used in such an environment |            |                                                                                                                                                                                                                  |
| Emission test                                                                                                                                                       | Compliance | Electromagnetic Environment Guidance                                                                                                                                                                             |
| RF Emission to CISPR 11                                                                                                                                             | Group 1    | The bed uses RF energy for its internal function                                                                                                                                                                 |
| RF Emission to CISPR 11                                                                                                                                             | Class B    |                                                                                                                                                                                                                  |
| Harmonics according to IEC 61000-3-2                                                                                                                                | Class A    | The bed is intended for use in all types of establishment including residential and similar user that are directly connected to a public supply network that also serves buildings used for residential purposes |
| Voltage fluctuations/ flicker acc. to IEC 61000-3-3                                                                                                                 | Complies   |                                                                                                                                                                                                                  |

| Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The V8v8c is intended for use within healthcare facility environment.<br>Users or customers must use bed in this environment |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Immunity test                                                                                                                | IEC 60601-1-2<br>EN 60601-1-2<br>Test level                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Electromagnetic Environment Guidance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Electrostatic discharge (ESD).....<br>IEC 61000-4-2<br>/EN 61000-4-2                                                         | Contact discharge: +8kV<br><br>Air discharge: +2kV, +4kV, +8kV, +15kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contact discharge: +8kV<br><br>Air discharge: +2kV, +4kV, +8kV, +15kV<br><br>Floor should be made of wood and concrete or be tiled with ceramic tiles. If the floor is covered with synthetic flooring material, the relative air humidity must be at least 30%<br><br>Can be used when higher ESD levels are present                                                                                                                               |
| Electrical<br>fast transient/burst IEC 61000-4-4<br>/EN 61000-4-4                                                            | +2kV Power supply line<br><br>+1kV Input/Output lines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +2kV Power supply line<br><br>The quality of the supply voltage should be equivalent to that of a typical business or hospital environment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Surge<br>IEC 61000-4-5<br>/EN 61000-4-5                                                                                      | Line - line: +0.5kV, +1.0kV<br><br>Line - ground: +0.5kV, +1.0kV, +2.0kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Line - line: +0.5kV, +1.0kV<br><br>Line - ground: +0.5kV, +1.0kV, +2.0kV<br><br>The quality of the supply voltage should be equivalent to that of a typical business or hospital environment.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Power Frequency Magnetic Fields<br>IEC 61000-4-8<br>/EN 61000-4-8                                                            | 30 A/m<br><br>50Hz/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 A/m<br><br>50Hz/60Hz<br><br>Magnetic fields with a network frequency should be equivalent to those to be found in a typical business or hospital environment.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Voltage Dips IEC 61000-4- 11<br>/EN 61000-4-11                                                                               | 0% UT: 0.5 cycles<br><br>Phase: 00, 450, 900, 1350, 1800, 2250, 2700, 3150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0% UT: 0.5 cycles<br><br>Phase: 00, 450, 900, 1350, 1800, 2250,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              | 0% UT: 1 cycle<br><br>70% UT: 25/30 cycles Single phase: 00<br><br>0% UT ; 300 cycle<br><br>The quality of the supply voltage should be equivalent to that of a typical business or hospital environment.<br><br>If the person using the bed requires that the bed functions must continue despite any interruptions in the energy supply, it is recommended that the bed be connected to an uninterruptible electricity supply or a battery | 0% UT: 1 cycle<br><br>70% UT: 25/30<br><br>cycles Single phase: 00<br><br>0% UT ; 300 cycle<br><br>The quality of the supply voltage should be equivalent to that of a typical business or hospital environment.<br><br>If the person using the bed requires that the bed functions must continue despite any interruptions in the energy supply, it is recommended that the bed be connected to an uninterruptible electricity supply or a battery |

|                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short interruptions IEC 61000-4-11<br>/EN 61000-4-11               | 0% UT: 250/300 cycles | 0% UT: 250/300 cycles<br><br>The quality of the supply voltage should be equivalent to that of a typical business or hospital environment.<br><br>If the person using the bed requires that the bed functions must continue despite any interruptions in the energy supply, it is recommended that the bed be connected to an uninterruptible electricity supply or a battery |
| Note: UT is the AC Power voltage before applying in the test level |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                        |              |                                                                |            |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| The V8v8c is intended for use in an electromagnetic environment that used wireless RF transceiver. Electromagnetic interference can be prevented by maintaining the minimum distance between RF transceiver and V8v8c depend on the maximum output and frequency of the communication device as recommended below. |                                              |                        |              |                                                                |            |                   |              |
| Immunity test                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IEC 60601-1-2<br>/EN 60601-1-2<br>Test level | Compliance level (V/m) | Band d (MHz) | Service                                                        | Modulation | Maximum power (W) | Distance (m) |
| Enclosure port to RF wireless communication equipment IEC 61000-4-3<br>/EN 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                               | 27V/m<br>385MHz                              | 27                     | 380-390      | TETRA 400                                                      |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28V/m<br>450MHz                              | 28                     | 430-470      | GMRS 460, FRS 460                                              |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9V/m<br>710MHz                               | 9                      | 704-787      | LTE Band 13, 17                                                |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9V/m<br>745MHz                               |                        |              |                                                                |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9V/m<br>780MHz                               |                        |              |                                                                |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28V/m<br>810MHz                              | 28                     | 800-960      | GSM 800/900, TETRA 800, iDen 820, CDMA 850, LTE Band 5         |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28V/m<br>870MHz                              |                        |              |                                                                |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28V/m<br>930MHz                              |                        |              |                                                                |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28V/m<br>1720MHz                             | 28                     | 1700-1990    | GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1,3, 4,25; UMT S |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28V/m<br>1845MHz                             |                        |              |                                                                |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28V/m<br>1970MHz                             |                        |              |                                                                |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28V/m<br>2450MHz                             | 28                     | 2400-2570    | Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n RFID 2450, LTE band 7            |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9V/m<br>5240MHz                              | 9                      | 5100-5800    | WLAN 802.11 a/n                                                |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9V/m<br>5500MHz                              |                        |              |                                                                |            |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9V/m<br>5785MHz                              |                        |              |                                                                |            |                   |              |

| Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity                                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The V8v8c is intended for use in the following electromagnetic environment.<br>The customer or user of the V8v8c should make sure it is used in such an environment. |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Immunity test                                                                                                                                                        | IEC 60601-1-2<br>/EN 60601-1-2<br>Test level            | Compliance level                                        | Electromagnetic Environment - Guidance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RF Conductivity<br>IEC 61000-4-6<br>EN 61000-4-6                                                                                                                     | 3V<br>0.15MHz-80MHz                                     | 3V<br>0.15MHz-80MHz                                     | Field intensity from the fixed RF transmitter determined by a field investigation of the magnetic field must be lower than the compliance level of the respective frequency band.<br><br>Near devices with the following symbol, interference could occur.<br><br> |
|                                                                                                                                                                      | 6V in ISM bands between 0.15MHz- 80MHz<br>80%AM at 1kHz | 6V in ISM bands between 0.15MHz- 80MHz<br>80%AM at 1kHz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Radioactive RF electromagnetic field<br>IEC 61000-4-3<br>/EN 61000-4-3                                                                                               | 3V/M<br>80MHZ-2.7GHz<br>80%AM at 1kHz                   | 3V/M<br>80MHZ-2.7GHz<br>80%AM at 1kHz                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

a. Intenzivnosti magnetnega polja iz fiksni oddajnikov, kot so bazna postaja za radijsko (mobilno/ radijsko) telefonijo, kopenski mobilni radio, radioamater, radijsko oddajanje AM in FM ter televizijsko oddajanje, ni mogoče natančno napovedati zgolj teoretično. Za določitev elektromagnetnega okolja fiksnega oddajnika RF je priporočljivo preveriti elektromagnetno polje na mestu, kjer se uporablja postelja. Če intenzivnost magnetnega polja na mestu uporabe V8v8c presega zgoraj navedeno stopnjo skladnosti z RF, je treba spremljati, ali V8v8c deluje pravilno. Če se zazna nenavadno premikanje, je treba po potrebi sprejeti dodatne ukrepe, na primer spremeniti smer ali položaj V8v8c.

b. Te smernice morda ne veljajo v vseh situacijah. Na elektromagnetno širjenje namreč vpliva absorpcija in odbijanje od konstrukcij, predmetov in ljudi.

**PLATI 12-MESAČNA ŠTANDARDNA B2B ZÁRUKA SPOLOČNOSTI GIMA.**  
UVELJAVLJA SE STANDARDNO 12-MESEČNO GIMA B2B GARANCIJO.

**Simboli - Symbols - Symboles - Symbole - Símbolos - Símbolos - Σύμβολα - Символи - Symboly - Symboler - Symboldid - Symbolit - Simboli - Szi mbó lumok - Simboliai - Simboli - Symboler - Symbolen - Symbolika - Simboluri - Symboly - Simboli - Symboler**

الرموز

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>IT</b> - Fabbricante <b>GB</b> - Manufacturer <b>FR</b> - Fabricant <b>DE</b> - Hersteller <b>ES</b> - Fabricante <b>PT</b> - Fabricante <b>GR</b> - Κατασκευαστής <b>BG</b> - производител <b>CZ</b> - Výrobce <b>DA</b> - Fabrikant <b>EE</b> - Tootja <b>FI</b> - Valmistaja <b>HR</b> - Proizvođač <b>HU</b> - Gyártó <b>LT</b> - Gamintojas <b>HR</b> - Ražotājs <b>NO</b> - Produsent <b>NL</b> - Fabrikant <b>PL</b> - Producent <b>RO</b> - Producător <b>SK</b> - Výrobca <b>SL</b> - Proizvajalec <b>SV</b> - Tillverkare<br><b>SA</b> - الشركة المصنعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>IT</b> - Codice prodotto <b>GB</b> - Product code <b>FR</b> - Code produit <b>DE</b> - Code produit <b>ES</b> - Código de producto <b>PT</b> - Código do produto <b>GR</b> - Κωδικός προϊόντος <b>BG</b> - Код на продукта <b>CZ</b> - Kód produktu <b>DA</b> - Produktkode <b>EE</b> - Tootekood <b>FI</b> - Tuotekoodi <b>HR</b> - Šifra proizvoda <b>HU</b> - Termék kódja <b>LT</b> - Prekės kodas <b>LV</b> - Produkta kods <b>NO</b> - Produktkode <b>NL</b> - Productcode <b>PL</b> - Kod produktu <b>RO</b> - Cod produs <b>SK</b> - Kód produktu <b>SL</b> - Šifra izdelka <b>SV</b> - Produktkod<br><b>SA</b> - رمز المنتج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>IT</b> - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea <b>GB</b> - Authorized representative in the European Community <b>FR</b> - Représentant autorisé dans la Communauté Européenne <b>DE</b> - Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft <b>ES</b> - Representante autorizado en la Comunidad Europea <b>PT</b> - Representante autorizado na Comunidade Europeia <b>GR</b> - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα <b>BG</b> - Упълномощен представител в Европейската общност <b>CZ</b> - Autorizovaný zástupce v Evropském společenství <b>DA</b> - Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab <b>EE</b> - Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses <b>FI</b> - Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä <b>HR</b> - Ovlašten predstavnik u Europskoj zajednici <b>HU</b> - Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségből <b>LT</b> - Įgaliotas atstovas Europos bendrijoje <b>LV</b> - Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā <b>NO</b> - Autorisert representant i Det europeiske fellesskap <b>NL</b> - Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap <b>PL</b> - Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej <b>RO</b> - Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană <b>SK</b> - Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve <b>SL</b> - Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti <b>SV</b> - Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen<br><b>SA</b> - الممثل المعتمد في المجموعة الأوروبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>IT</b> - Importato da <b>GB</b> - Imported by <b>FR</b> - Importé par <b>DE</b> - Importiert von <b>ES</b> - Importado por <b>PT</b> - Importado por <b>GR</b> - Εισαγωγής από <b>BG</b> - Внесено от <b>CZ</b> - Dovezeno uživatelem <b>DA</b> - Importeret af <b>EE</b> - Importija <b>FI</b> - Tuojja <b>HR</b> - Uvezeno od strane <b>HU</b> - Importálta: <b>LT</b> - Importavo <b>LV</b> - Importēja <b>NO</b> - Importert av <b>NL</b> - Geïmporteerd door <b>PL</b> - Importowane przez <b>RO</b> - Importat de <b>SK</b> - Dovážal <b>SL</b> - Uvozi <b>SV</b> - Importerad av<br><b>SA</b> - مستورد بواسطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>IT</b> - Dispositivo medico <b>GB</b> - Medical device <b>FR</b> - Dispositif médical <b>DE</b> - Medizinisches Gerät <b>ES</b> - Dispositivo medico <b>PT</b> - Dispositivo médico <b>GR</b> - Ιατρική συσκευή <b>BG</b> - Медицинско изделие <b>CZ</b> - Lékařské zařízení <b>DA</b> - Medicinsk udstyr <b>EE</b> - Meditsiini-seade <b>FI</b> - Lääketieteellinen laite <b>HR</b> - Medicinski uređaj <b>HU</b> - Orvosi eszköz <b>LT</b> - Medicinos prietaisai <b>LV</b> - Medicīnas ierīce <b>NO</b> - Medisinsk utstyr <b>NL</b> - Medisch apparaat <b>PL</b> - Urządzenie medyczne <b>RO</b> - Dispozitiv medical <b>SK</b> - Lékařská pomůcka <b>SL</b> - Medicinski pripomoček <b>SV</b> - Medicinsk apparat<br><b>SA</b> - جهاز طبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>IT</b> - Smaltimento RAEE <b>GB</b> - WEEE disposal <b>FR</b> - Élimination des DEEE <b>DE</b> - WEEE-Entsorgung <b>ES</b> - Eliminación de RAEE <b>PT</b> - Eliminação de REEE <b>GR</b> - Απόρριψη ΑΗΗΕ <b>BG</b> - Изхвърляне на ОЕЕО <b>CZ</b> - likvidace OEEZ <b>DA</b> - Bortskaffelse af WEEE <b>EE</b> - WEEE kõrvaldamine <b>FI</b> - WEEE hävittäminen <b>HR</b> - odlaganje WEEE <b>HU</b> - WEEE ártalmatlanítása <b>LT</b> - EEJ atliekų šalinimas <b>LV</b> - EEJA utilizācija <b>NO</b> - EE-avhending <b>NL</b> - AEEA-verwijdering <b>PL</b> - Utylizacja WEEE <b>RO</b> - eliminarea DEEE <b>SK</b> - likvidácia OEEZ <b>SL</b> - Odstranjevanje OEEO <b>SV</b> - WEEE-avfallshantering<br><b>SA</b> - التخلص من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>IT</b> - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> - Warning: Read and follow the instructions (warnings) for use carefully <b>FR</b> - Avertissement : Lisez et suivez attentivement les instructions (avertissements) d'utilisation. <b>DE</b> - Warnung: Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen (Warnhinweise) sorgfältig <b>ES</b> - Advertencia: Lea y siga atentamente las instrucciones (advertencias) de uso. <b>PT</b> - Aviso: Leia e siga as instruções (avisos) de uso com atenção <b>GR</b> - Προειδοποίηση: Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες (προειδοποιήσεις) χρήσης <b>BG</b> - Предупреждение: Прочетете и следвайте внимателно инструкциите (предупрежденията) за употреба <b>CZ</b> - Upozornění: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití <b>DA</b> - Advarsel: Læs og følg brugsanvisningen (advarslerne) omhyggeligt <b>EE</b> - Hoiatus: Lugege kasutusjuhised (hoiatused) hoolikalt läbi ja järgige neid <b>FI</b> - Varoitus: Lue käyttöohjeet (varoitukset) huolellisesti ja noudata niitä <b>HR</b> - Upozorenje: Pažljivo pročitajte i slijedite upute (upozorenja) za uporabu <b>HU</b> - Figyelmeztetés: Olvassa el és kövesse figyelmesen a használati utasításokat (figyelmeztetéseket). <b>LT</b> - Įspėjimas: atidžiai perskaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijų (įspėjimų). <b>LV</b> - Brīdinājums: uzmanīgi izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas (brīdinājumus). <b>NO</b> - Advarsel: Les og følg bruksanvisningen (advarslerne) nøye <b>NL</b> - Waarschuwing: Lees en volg de instructies (waarschuwingen) voor gebruik zorgvuldig <b>PL</b> - Ostrzeżenie: Przeczytaj uważnie instrukcje (ostrzeżenia) dotyczące użytkowania i postępuj zgodnie z nimi <b>RO</b> - Avertisment: Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile (avertismente) de utilizare <b>SK</b> - Upozornenie: Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny (upozornenia) na použitie <b>SL</b> - Opozorilo: natančno preberite in upoštevajte navodila (opozorila) za uporabo <b>SV</b> - Varning: Läs och följ instruktionerna (varningarna) för användning noggrant<br><b>SA</b> - تحذير: اقرأ واتباع التعليمات (التحذيرات) للاستخدام بعناية |
|  | <b>IT</b> - Seguire le istruzioni per l'uso <b>GB</b> - Follow the instructions for use <b>FR</b> - Suivre les instructions d'utilisation <b>DE</b> - Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung <b>ES</b> - Sigue las instrucciones de uso. <b>PT</b> - Siga as instruções de uso <b>GR</b> - Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης <b>BG</b> - Следвайте инструкциите за употреба <b>CZ</b> - Postupujte podle návodu k použití <b>DA</b> - Følg brugsanvisningen <b>EE</b> - Järgige kasutusjuhendit <b>FI</b> - Noudata käyttöohjeita <b>HR</b> - Slijedite upute za uporabu <b>HU</b> - Kövesse a használati utasítást <b>LT</b> - Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis <b>LV</b> - Izpildiet lietošanas instrukcijas <b>NO</b> - Følg bruksanvisningen <b>NL</b> - Volg de instructies voor gebruik <b>PL</b> - Postępuj zgodnie z instrukcją użycia <b>RO</b> - Urmați instrucțiunile de utilizare <b>SK</b> - Postupujte podľa návodu na použitie <b>SL</b> - Sledite navodilom za uporabo <b>SV</b> - Följ bruksanvisningen<br><b>SA</b> - اتباع تعليمات الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>IT</b> - Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>GB</b> - Medical device compliant with Regulation (EU) 2017/745 <b>FR</b> - Dispositif médical conforme au Règlement (UE) 2017/745 <b>DE</b> - Medizinprodukt gemäß Verordnung (EU) 2017/745 <b>ES</b> - Dispositivo médico que cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 <b>PT</b> - Dispositivo médico em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 <b>GR</b> - Ιατροτεχνολογικό προϊόν συμμορφούμενο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 <b>BG</b> - Медицинско изделие, отговарящо на Регламент (ЕС) 2017/745 <b>CZ</b> - Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) 2017/745 <b>DA</b> - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 <b>EE</b> - Määrusele (EL) 2017/745 vastav meditsiini-seade <b>FI</b> - Asetuksen (EU) 2017/745 mukainen lääkinnällinen laite <b>HR</b> - Medicinski uređaj uskladen s Uredbom (EU) 2017/745 <b>HU</b> - Az (EU) 2017/745 rendeletnek megfelelő orvostechnikai eszköz <b>LT</b> - Medicinos prietaisai, atitinkantis Reglamentą (ES) 2017/745 <b>LV</b> - Medicīnas ierīce, kas atbilst Regulai (ES) 2017/745 <b>NO</b> - Medisinsk utstyr i samsvar med forordning (EU) 2017/745 <b>NL</b> - Medisch hulpmiddel dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 <b>PL</b> - Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 <b>RO</b> - Dispozitiv medical conform Regulamentului (UE) 2017/745 <b>SK</b> - Zdravotnícka pomôcka v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745 <b>SL</b> - Medicinski pripomoček skladen z Uredbo (EU) 2017/745 <b>SV</b> - Medicinsk utrustning i enlighet med förordning (EU) 2017/745<br><b>SA</b> - جهاز طبي متوافق مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745 |
|    | <b>IT</b> - Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> - Store in a cool, dry place <b>FR</b> - Conserver dans un endroit frais et sec <b>DE</b> - An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren <b>ES</b> - Conservar en un lugar fresco y seco <b>PT</b> - Armazene em local fresco e seco <b>GR</b> - Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος <b>BG</b> - Съхранявайте на хладно и сухо място <b>CZ</b> - Skladujte na chladném a suchém místě <b>DA</b> - Opbevares på et køligt, tørt sted <b>EE</b> - Hoida jahedas ja kuivas kohas <b>FI</b> - Säilytä viileässä, kuivassa paikassa <b>HR</b> - Čuvati na hladnom i suhom mjestu <b>HU</b> - Tárolja hűvös, száraz helyen <b>LT</b> - Laikyti vėsioje, sausoje vietoje <b>LV</b> - Uzglabāt vēsā, sausā vietā <b>NO</b> - Oppbevares på et kjølig, tørt sted <b>NL</b> - Op een koele, droge plaats bewaren <b>PL</b> - Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu <b>RO</b> - A se păstra într-un loc răcoros și uscat <b>SK</b> - Skladujte na chladnom a suchom mieste <b>SL</b> - Hraniti na hladnem in suhem mestu <b>SV</b> - Förvara på en sval, torr plats<br><b>SA</b> - تخزينها في مكان بارد وجاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>IT</b> - Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> - Store away from sunlight <b>FR</b> - Conserver à l'abri du soleil <b>DE</b> - Vor Sonnenlicht schützen <b>ES</b> - Almacenar lejos de la luz solar <b>PT</b> - Armazene longe da luz solar <b>GR</b> - Φυλάσσετε μακριά από το φως του ήλιου <b>BG</b> - Да се съхранява далеч от слънчева светлина <b>CZ</b> - Skladujte mimo dosah slunečního záření <b>DA</b> - Opbevares væk fra sollys <b>EE</b> - Hoida eemal päikesevalgusest <b>FI</b> - Säilytettävä poissa auringonvalolta <b>HR</b> - Čuvati dalje od sunčeve svetlosti <b>HU</b> - Tárolja napfénytől távol <b>LT</b> - Laikyti atokiau nuo saulės spindulių <b>LV</b> - Glabāt prom no saules gaismas <b>NO</b> - Oppbevares unna sollys <b>NL</b> - Uit de buurt van zonlicht bewaren <b>PL</b> - Przechowywać z dala od światła słonecznego <b>RO</b> - A se păstra departe de lumina soarelui <b>SK</b> - Skladujte mimo dosahu slnečného žiarenia <b>SL</b> - Hraniti ločeno od sončne svetlobe <b>SV</b> - Förvaras åtskillt från solljus<br><b>SA</b> - يخزن بعيدا عن أشعة الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>IT</b> - Limite di pressione atmosferica <b>GB</b> - Atmospheric pressure limit <b>FR</b> - Limite de pression atmosphérique <b>DE</b> - Luftdruckgrenze <b>ES</b> - Limite de presión atmosférica <b>PT</b> - Limite de pressão atmosférica <b>GR</b> - Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης <b>BG</b> - Граница на атмосферното налягане <b>CZ</b> - Mezní hodnota atmosférického tlaku <b>DA</b> - Atmosfærisk trykgrænse <b>EE</b> - Atmosfäärirõhu piir <b>FI</b> - Ilmanpaineen raja <b>HR</b> - Granica atmosferskog tlaka <b>HU</b> - Légköri nyomás határértéke <b>LT</b> - Atmosferos slėgio riba <b>LV</b> - Atmosfēras spiediena robeža <b>NO</b> - Atmosfærisk trykkgrense <b>NL</b> - Limiet atmosferische druk <b>PL</b> - Dopuszczalne ciśnienie atmosferyczne <b>RO</b> - Limita presiunii atmosferice <b>SK</b> - Hranica atmosférického tlaku <b>SL</b> - Omejeitev atmosferskega tlaka <b>SV</b> - Atmosfäriskt tryckgräns<br><b>SA</b> - حد الضغط الجوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>IT</b> - Limite di umidità <b>GB</b> - Humidity limit <b>FR</b> - Limite d'humidité <b>DE</b> - Luftfeuchtigkeitsgrenze <b>ES</b> - Limite de humedad <b>PT</b> - Limite de umidade <b>GR</b> - Όριο υγρασίας <b>BG</b> - Ограничение на влажността <b>CZ</b> - Limit vlhkosti <b>DA</b> - Fugtgrænse <b>EE</b> - Niiskuse piirang <b>FI</b> - Kosteusraja <b>HR</b> - Granica vlažnosti <b>HU</b> - Páratartalom határérték <b>LT</b> - Drėgmės riba <b>LV</b> - Mitruma robeža <b>NO</b> - Fuktighetsgrense <b>NL</b> - Vochtigheidslimiet <b>PL</b> - Limit wilgotności <b>RO</b> - Limita de umiditate <b>SK</b> - Hranica vlhkosti <b>SL</b> - Omejeitev vlažnosti <b>SV</b> - Fuktighetsgräns<br><b>SA</b> - حد الرطوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>IT</b> - Limite di temperatura <b>GB</b> - Temperature limit <b>FR</b> - Limite de température <b>DE</b> - Temperaturgrenze <b>ES</b> - Limite de temperatura <b>PT</b> - Limite de temperatura <b>GR</b> - Όριο θερμοκρασίας <b>BG</b> - Температурна граница <b>CZ</b> - Teplotní limit <b>DA</b> - Temperaturgrænse <b>EE</b> - Temperatuuri piirang <b>FI</b> - Lämpötilaraja <b>HR</b> - Ograničenje temperature <b>HU</b> - Hőmérséklet korlát <b>LT</b> - Temperatūros riba <b>LV</b> - Temperatūras ierobežojums <b>NO</b> - Temperaturgrense <b>NL</b> - Temperatuurlimiet <b>PL</b> - Limit temperatury <b>RO</b> - Limită de temperatură <b>SK</b> - Teplotný limit <b>SL</b> - Temperaturna omejeitev <b>SV</b> - Temperaturgräns<br><b>SA</b> - حد درجة الحرارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>IT</b> - Identificatore unico dispositivo <b>GB</b> - Unique device identifier <b>FR</b> - Identifiant unique de l'appareil <b>DE</b> - Eindeutige Gerätekennung <b>ES</b> - Identificador de dispositivo único <b>PT</b> - Identificador exclusivo do dispositivo <b>GR</b> - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής <b>BG</b> - Уникален идентификатор на устройството <b>CZ</b> - Jedinčný identifikátor zařízení <b>DA</b> - Unik enhedsidentifikator <b>EE</b> - Seadme kordumatu identifikator <b>FI</b> - Ainutlaatu-inen laitetunniste <b>HR</b> - Jedinstveni identifikator uređaja <b>HU</b> - Egyedi eszközazonosító <b>LT</b> - Unikalus įrenginio identifikatorius <b>LV</b> - Unikāls ierīces identifikators <b>NO</b> - Unik enhetsidentifikator <b>NL</b> - Unieke apparaat-ID <b>PL</b> - Unikalny identyfikator urządzenia <b>RO</b> - Identificator unic de dispozitiv <b>SK</b> - Jedinčný identifikátor zariadenia <b>SL</b> - Enolični identifikator naprave <b>SV</b> - Unik enhetsidentifiereare<br><b>SA</b> - معرف الجهاز الفريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>IT</b> - Numero di lotto <b>GB</b> - Batch number <b>FR</b> - Numéro de lot <b>DE</b> - Chargennummer <b>ES</b> - Número de lote <b>PT</b> - Número do lote <b>GR</b> - Αριθμός παρτίδας <b>BG</b> - Партиден номер <b>CZ</b> - Číslo šarže <b>DA</b> - Batchnummer <b>EE</b> - Partii number <b>FI</b> - Erän numero <b>HR</b> - Broj serije <b>HU</b> - Tételszám <b>LT</b> - Partijos numeris <b>LV</b> - Partijas numurs <b>NO</b> - Batchnummer <b>NL</b> - Batchnummer <b>PL</b> - Numer partii <b>RO</b> - Numărul lotului <b>SK</b> - Číslo šarže <b>SL</b> - Številka serije <b>SV</b> - Batchnummer<br><b>SA</b> - رقم الدفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |