



Littmann®
Classic III™
Stethoscope



3M™ Littmann® Classic III™ Stetoskop Kullanım Kılavuzu

Yeni 3M™ Littmann® Classic III™ Stetoskopu satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Littmann Classic III stetoskop, olağanüstü çok yönlülükle birlikte yüksek akustik hassasiyet sunar. Yenilikçi tasarımı, gövdenin her iki tarafında ayarlanabilir tek parçalı bir diyafram sunar; büyük taraf yetişkin hastalar için kullanılabilirken, küçük taraf özellikle pediatrik değerlendirme için faydalıdır. Bununla birlikte, gövdenin pediatrik tarafı, satın aldığınız stetoskopta bulunan üşütmeyen çan halkası, ayarlanabilir diyaframla değiştirilerek geleneksel bir çana dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için www.littmann.com web sitesini ziyaret edin.

Sembol Açıklamaları

 Kullanım talimatlarına başvurun.

 Doğal kauçuk lateks içermez.

Kullanım Talimatları


Stetoskopu Kulaklarınıza Yerleştirin

Stetoskop kulaklığı, normal kulak kanalının anatomisini tamamlayan bir açığı sahiptir ve rahat, akustik olarak ses geçirmez bir şekilde uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kulaklarınıza yerleştirdiğinizde kulaklık öne doğru bakmalıdır.




Kulaklık Gerginliğini Ayarlayın

Gerekirse, kulaklarınıza sıkıca ama rahat bir şekilde uyum sağlaması için kulaklığın gerginliğini ayarlayabilirsiniz.

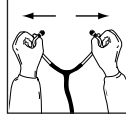

Kulaklıktaki yayın gerginliğini azaltmak için kulaklık borularını çekerek birbirinden uzaklaştırın. İstenen gerginlik elde edilene kadar tekrarlayın.

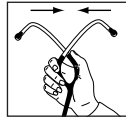


Kulaklıktaki yayın gerginliğini artırmak için, kulaklık borularını birbirine doğru iterek sıkıştırın. İstenen gerginlik elde edilene kadar tekrarlayın.

Gövdenin Etkin Tarafını Seçin


Littmann Classic III stetoskop çift taraflı gövde özelliğine sahiptir. Gövde tutma yeri üzerinde bir işaretle tanımlandığı gibi herhangi bir zamanda gövdenin sadece bir tarafı akustik olarak etkindir. Etkin tarafı değiştirmek için gövdeyi döndürün.

Littmann Ayarlanabilir Diyafram - Düşük ve Yüksek Frekanslı Sesleri Dinleyin

Gövdenin her iki tarafı, hastaya uygulanan basıncı kolayca ayarlayarak düşük veya yüksek frekanslı sesleri ön plana çıkarmanızı sağlayan patentli Littmann ayarlanabilir diyafram ile donatılmıştır.

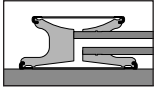

Düşük frekanslar: Düşük frekanslı sesleri ön plana çıkarmak için, hastaya hafif basınç uygulayın.

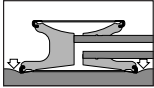

Yüksek frekanslar: Yüksek frekanslı sesleri ön plana çıkarmak için, hastaya kuvvetli basınç uygulayın.

Geleneksel Açık Çana Dönüştürün



Gövdenin küçük tarafı, Littmann ayarlanabilir diyafram ile birlikte kullanılabilir veya satın aldığınız stetoskopa dahil olan üşütmeyen lastik halkaya sahip geleneksel açık çana çevrilebilir.



Littmann ayarlanabilir diyaframı çıkarmak için, diyaframın kenarını başparmak ve işaret parmağınızla sıkıştırın; diyaframı gövdeden çekip çıkarın.



Üşütmeyen çan halkasını takmak için, halkanın bir tarafını gövde çemberine yerleştirin ve gerdirek gövde çemberine oturtun.




Littmann ayarlanabilir diyaframı yeniden takmak için üşütmeyen çan halkasını çıkarın. Ayarlanabilir diyaframın esnek kenarını, gövdenin çember oluşuna yerleştirin ve çemberi gövde kenarı etrafında ve üzerinde yavaşça çevirin.

Temizleme, Dezenfeksiyon ve Saklama

Stetoskopunuzu her hastadan sonra %70'lik izopropil alkolle silerek veya sabun ve suyla birlikte tek kullanımlık bir temizlik mendili kullanarak temizleyin. Organik maddeyi temizlemek için stetoskopunuzu temizlerken tek kullanımlık bir temizlik mendili kullanmak en iyi uygulamadır.

Stetoskopunuzu dezenfekte etmek için %2'lik çamaşır suyu çözeltisi kullanılabilir. Ancak, hortum renginde kırmızı pigmentler içeren stetoskoplarda (Şarap Rengi, Pembe, Erik Rengi, Şeftali Rengi, Ahududu Rengi, Turuncu, vb.), çamaşır suyuna maruz bırakıldıktan sonra hafif bir renk solmasıyla karşılaşılabilir. Çamaşır suyunun bozucu yapısından dolayı, çamaşır suyu çözeltisini sadece sınırlı bir bazda ve/veya gerektiğinde kullanın.

Ayarlanabilir diyaframlar, üşütmeyen çan halkası ve kulaklıklar, kapsamlı temizlik için çıkarılabilir (tüm parçaların ve yüzeylerin yeniden birleştirme öncesi kuru olduğundan emin olun). Kulaklıkları çıkarmak için sıkıca çekin. Kulaklıkları takmak için, kulaklığın küçük tarafını yerine tam olarak oturana kadar kulaklık borusu üzerine itin.

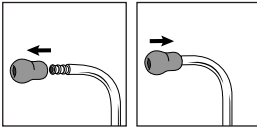

Stetoskopunuzu herhangi bir sıvıya batırmayın.

Stetoskopunuzu herhangi bir sterilizasyon işlemine maruz bırakmayın.

Stetoskopunuzu aşırı ısıda saklamaktan kaçının.

Littmann Stetoskop Servis ve Garanti Programı

Lütfen stetoskopunuzu çevrimiçi

olarak şu adrese kaydedin:

<http://www.littmann.com/warranty-registration>

Littmann Classic III stetoskop, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı beş (5) yıl süreyle garantilidir.

Garanti süresi içinde onarımlar, açık kötüye kullanım veya yanlışlıkla oluşan hasar durumları dışında, stetoskopun 3M'e geri gönderilmesi üzerine ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

ABD'de servis ve onarım için, lütfen

www.littmann.com/service web sitesini ziyaret edin veya 1-800-292-6298 numaralı telefonu arayın. ABD dışındaysanız, yerel 3M ofisinizin irtibat bilgileri için lütfen www.littmann.com web sitesini ziyaret edin.

3M, Littmann, L Littmann logosu, L ve Classic III, 3M'in ticari markalarıdır.

Kanada'da lisanslı olarak kullanılır.

© 2015, 3M. Tüm hakları saklıdır.



Made in U.S.A. by  **3M Health Care**,
2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144
(U.S.A.) 1-800-228-3957 Visit our website www.littmann.com



Not Made
With Natural
Rubber Latex



Consult
instructions
for use

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L,
and Classic III are trademarks of 3M.
Used under license in Canada.
© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3



3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany