


Marks	Designations	A	B	C	D	E	F	G	H	Weight	
3005**	Open Standard seatplate	86 cm	51.5 cm	60.5 cm	72 cm	52 cm	38 cm	39 cm	58 cm	6.6 kg	130 kg
3003**	Open Full seatplate										
3015**	Open Adjustable with standard seatplate	86/97 cm	51.5 cm	60.5 cm	72/83 cm	52/63 cm	38 cm	39 cm	58 cm	6.8 kg	130 kg
3014**	Open Adjustable with full seatplate										
3300**	Club with standard seatplate	91 cm	42 cm	54 cm	67 cm	45 cm	50 cm	44 cm	53 cm	8 kg	130 kg
3000**	Club with full seatplate										
3400**	Confort with standard seatplate	91 cm	42 cm	54 cm	67 cm	45 cm	50 cm	44 cm	53 cm	9 kg	130 kg
3100**	Confort with full seatplate										
3030**	Even with standard seatplate	87.5 cm	51.5 cm	64.5 cm	75 cm	51 cm	38.5 cm	40 cm	42 cm	7.5 kg	130 kg
3031**	Even with full seatplate										
3200**	New club with standard seatplate	84 cm	53 cm	61 cm	73 cm	52 cm	35 cm	40 cm	49 cm	7 kg	130 kg
3201**	New club with full seatplate										
3001**	Club XXL with standard seatplate	92 cm	65 cm	71 cm	67 cm	46.5 cm	46 cm	44 cm	53 cm	10 kg	160 kg
3101**	Confort XXL with standard seatplate									10.5 kg	
3062**	Club XXL with full seatplate	92 cm	55 cm	71 cm	67 cm	46.5 cm	46 cm	44 cm	53 cm	10 kg	160 kg
3162**	Confort XXL with full seatplate									10.5 kg	
3046**	Best Up	94.5 cm	44 cm	47 cm	54 cm	48.5 cm	50 cm	39.5 cm	45 cm	9.4kg	130kg
3646**	Best Up XXL	88 cm	75 cm	87 cm	75 cm	56 cm	59 cm	44 cm	59 cm	9.5kg	160 kg

Dimension of the hole: Width = 21 cm Depth = 25.5 cm

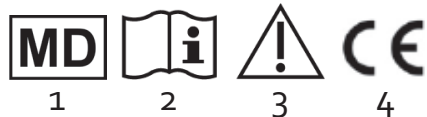

	FR	EN	DE	ES	
	Signification des symboles	Explanation of symbols	Zeichenerklärung	Explicación de los símbolos	
1	Dispositif Medical	Medical Device	Medizinprodukt	Dispositivo médico	
2	Lire le mode d'emploi avant l'utilisation.	Read the instruction manual before use	Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen!	Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo	
3	Respecter les instructions de sécurité!	Observe the safety instructions!	Sicherheitshinweise beachten!	Siga las instrucciones de seguridad	
4	Conformité CE	CE conformity	CE-Konformität	Conformidad con la normativa CE	
	PT	PL	HU	TR	
	Significado dos símbolos	Objaśnienia symboli	Szimbólumok jelentése	Sembollerin açıklamaları	
1	Dispositivo médico	Wyrób medyczny	Orvosi eszköz	Tıbbi cihaz	
2	Antes de utilizar, leia, por favor, o manual.	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót	Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz	
3	Siga as instruções de segurança	Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa.	Tartsa be a biztonsági utasításokat!	Güvenlik uyarılarını dikkate alınız	
4	Certificado CE	Deklaracja CE	CE megfeleléség	CE uygunluğu	
	IT	NL	SI	HR	GR
	Significato dei simboli	Verklaring van de symbolen	Pomen simbolov	Objašnjenje simbola	Επεξήγηση Συμβόλων
1	Dispositivo Medico	Medisch hulpmiddel	Medicinski pripomoček	Medicinski uređaj	Ιατρική Συσκευή
2	Prima dell'uso leggere le relative istruzioni!	Voor gebruik de handleiding lezen.	Pred uporabo preberite navodila	Pročitati korisničke upute prije uporabe	Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση
3	Osservare le istruzioni per la sicurezza	Veiligheidsinstructies respecteren	Upoštevajte varnostna navodila!	Pažljivo pogledajte sigurnosne upute	Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας!
4	CE conformità	CE conformiteit	CE Certifikat	CE-Deklaracija	CE Συμμόρφωση

**TR-** Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Talimatlara uyulmalı ve özenle saklanmalıdır! Ürün başka kişiler tarafından kullanıldığı takdirde, kullanacak kişiler herhangi bir kullanımdan önce aşağıdaki talimatlardan haberdar edilmelidirler.

#### 1. Güvenlik uyarıları

- ♥ Cihazı ayarlamak ve uygun şekilde kullanmak için her zaman uzman satıcınıza danışınız.
- ♥ Ürün dışarıda saklanmamalı, güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır (Araba içerisinde güneşe maruz bırakılmaya dikkat edilmelidir!!).
- ♥ Aşırı sıcaklıklarda (yaklaşık 38°C veya 100°F üzerinde ya da 0°C veya 32°F altında) kullanılmamalıdır.
- ♥ Ürünü oluşturan parçaların tamamı (vidalar, borular, çerçeve..) düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- ♥ Oturağı yerleştirmeden oturmamaya dikkat ediniz.

- ♥ Bütün eklemlerin iyice sıkıştırılmış olduğunu kontrol ediniz. Oturağın yerinde olduğunu kontrol etmeden oturmayınız.
- ♥ Öngörülen amacı dışında ürünü kullanmayınız: örneğin sandalye üzerinde ayağa kalkmayınız.
- ♥ Etiket üzerinde veya kılavuzda belirtilen ağırlık kısıtlamalarına HER ZAMAN uyunuz.
- ♥ Ürün modifiye edilmemelidir. İhtiyaç duyulduğunda, onarım için yalnızca orijinal parçaları kullanılmalıdır. Yalnızca ehil bir personel, ürünü tamir etmek için yetkilidir.
- ♥ Ürünü açıp monte ettikten sonra, AÇIK pozisyonda kilitli olduğundan ve kullanımdan önce zemin üzerinde sabit olduğundan emin olunuz. Bazı modeller monte edilmiş halde teslim edilir.
- ♥ Klozetli sandalyenizin üzerine HİÇBİR ŞEY asmayınız. Bu, dengeyi kaybetmenize ve düşmenize neden olabilir.
- ♥ Uzun süreli kullanılmadığı takdirde, ürününüzü uzman satıcınıza kontrol ettiriniz.
- ♥ Sandalye içeride kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve dışarıda muhafaza edilmemelidir.
- ♥ Hasta, sandalye üzerinde oturduğu esnada kovanı takmayınız ne de çıkarmayınız: cinsel organında ciddi yaralanma riski bulunmaktadır!
- ♥ Kolçakları katlanabilen modellerde, parmak kısırmalarını önlemek için çok dikkatli olunuz.
- ♥ Kullanmadan önce sandalyeyi kontrol ediniz, tereddüt ettiğinizde kullanmayınız ve uzman satıcınız ile konu hakkında iletişime geçiniz.
- ♥ Sandalyeyi yalnızca yatay ve sabit bir zemin üzerinde kullanınız.
- ♥ Sandalyenin kolçakları üzerine oturmak yasaktır.
- ♥ Devrilmeyi önlemek için üzerindeki eğilmeyiniz.
- ♥ Bu tıbbi cihaz ile bağlantılı tüm ciddi kazalar cihaz üreticisine ve kullanıcının bulunduğu ülkenin yetkili mercilerine bildirilmelidir.

#### 2. Kullanım amacı, Endikasyonlar, Kontraendikasyonlar

##### Kullanım amacı:

Klozetli sandalyeler, tuvalete ulaşmakta güçlük çeken kişilerin ihtiyaçlarını buldukları yerde giderebilmeleri için evlerde ya da bakım evlerinde kullanılabilir. Standart, katlanabilir ve tekerlekli tüm modeller iç mekan kullanımı içindir.

##### Endikasyonlar:

Ev içerisinde tuvalete ulaşamayacak durumda olan kişiler için kullanılır  
Beden kontrolünde zorluk - Denge kaybı - Felç - Yürüme güçlüğü - Genel zayıflık - Strese bağlı idrar inkontinansı - Dışkı inkontinansı - Kronik diyare

##### Kontraendikasyonlar:

Kullanılmaması gereken durumlar:

Ciddi kognitif bozukluk - Ciddi denge kaybı - Oturma bozukluğu

#### 3. Kurulum

Ürünün hizmete sunulması, yalnızca ehil bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Emin olmadığınız bir konu hakkında bilgi almak için satıcınız ile iletişime geçiniz.

##### Kova kurulumu

Kova iki şekilde takılabilir ve çıkartılabilir:

1. Çıkarma/takma desteğine geçirek oturağın sağ veya sol tarafından (XXL modeller için tek olanak budur).
  2. Oturağı sırtlığa doğru kaldırarak yukarıdan.
- Kovayı taşımadan önce kapağı ile örtülmesi tavsiye edilir.

##### Oturak kurulumu

Çerçeveye iki klips ile sabitlenmiş oturak, temizlenmek veya değiştirilmek için kolaylıkla çıkar, resim [A].

Oturağı çıkarmak için klipsleri açınız, resim [B]. Tekrar yerleştirmek için iki klipsleri sandalyenin arkasında bulunan boruya geçiriniz, resim [C].

Kapak ile deliği kapatarak sandalye normal bir sandalye olarak kullanılabilir.

Kiralama: Sandalye, bakımı düzenli ve doğru bir şekilde tutulduysa, eksiksiz bir temizlenmenin ve dezenfeksiyonun ardından tekrar kiralamaya verilebilir. İhtiyaç durumunda oturağı ve kovayı değiştiriniz. Dikkat: kullanım kılavuzu bu ürüne dahildir ve tekrar kiralama işleminde ürün ile teslim edilmelidir.

#### 4. Bakım

Ürün, temiz ve kuru bir bez ile düzenli olarak temizlenmelidir. Dikkat: İdrar oldukça aşındırıcıdır ve çelik boruları hızlıca bozar. Dolayısıyla, sandalyeyi günlük temizlemeyi ve kurutmayı gerektirir.

#### 5. Malzeme

Ürün, epoksi boya kaplama bir çerçeveden, kapaklı bir oturaktan ve kapaklı bir kovanı oluşmaktadır. Bazı modellerde kolçakları katlanabilmektedir. Pamuk kaplı ağaçtan ve PVC ile donatılmıştır.

#### 6. Atık Arıtma

Geçerli mevzuata uygun olarak ürünü atık yerine bırakınız.

#### 7. Teknik Özellikler

1. sayfada bulunan çizelgeye bakınız.

Ürün, satın alma tarihinden itibaren üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.  
Biyoyumludur. Kullanım süresi : 2 sene.