



Перед використанням прочитайте керівництво з експлуатації (1) і (2).


1 Установлення елементів живлення

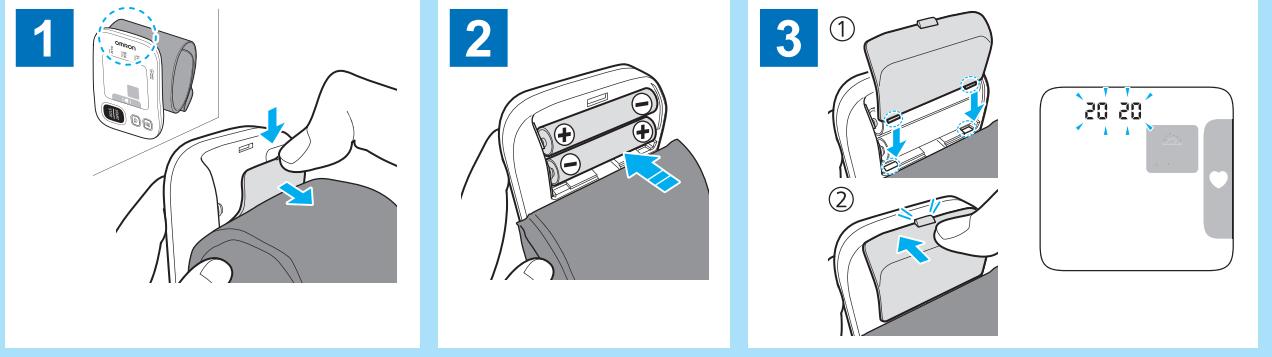


2 Установка дати та часу

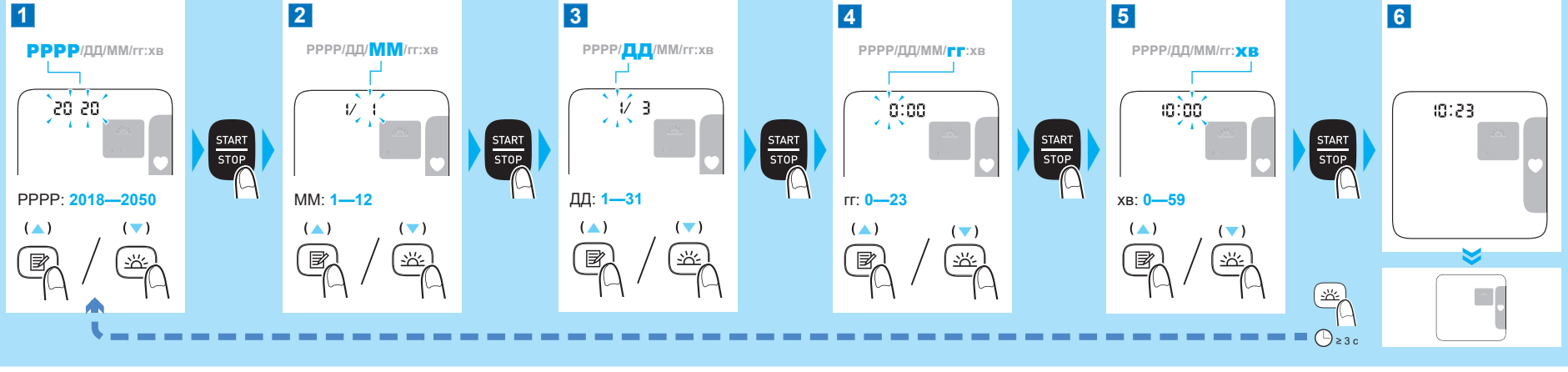





3 Закріплення манжети на зап'ястку

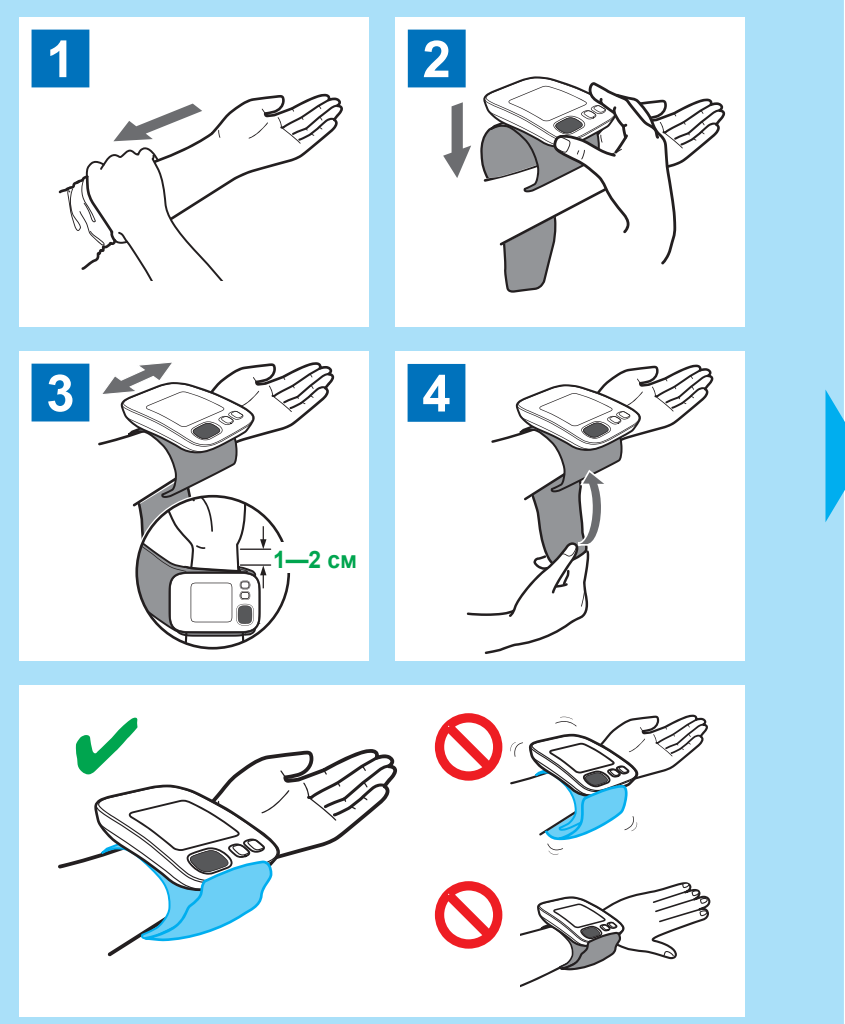


4 Сидіння в правильному положенні

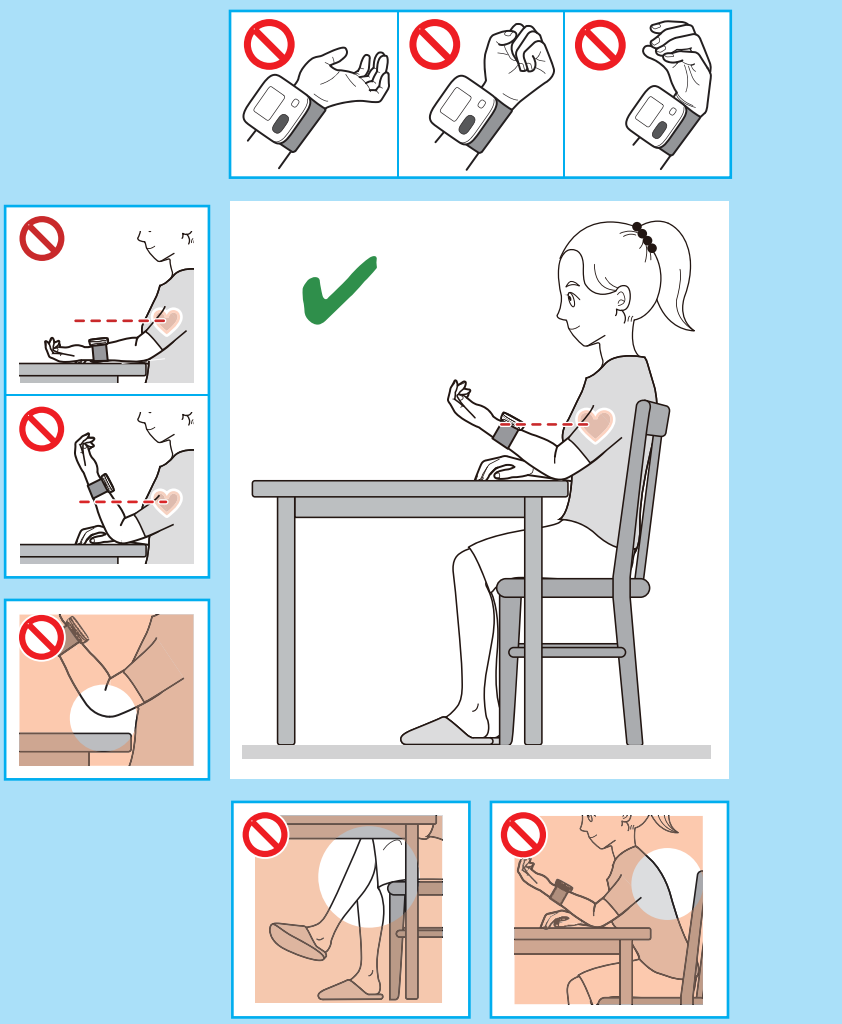

5 Виконання вимірювання

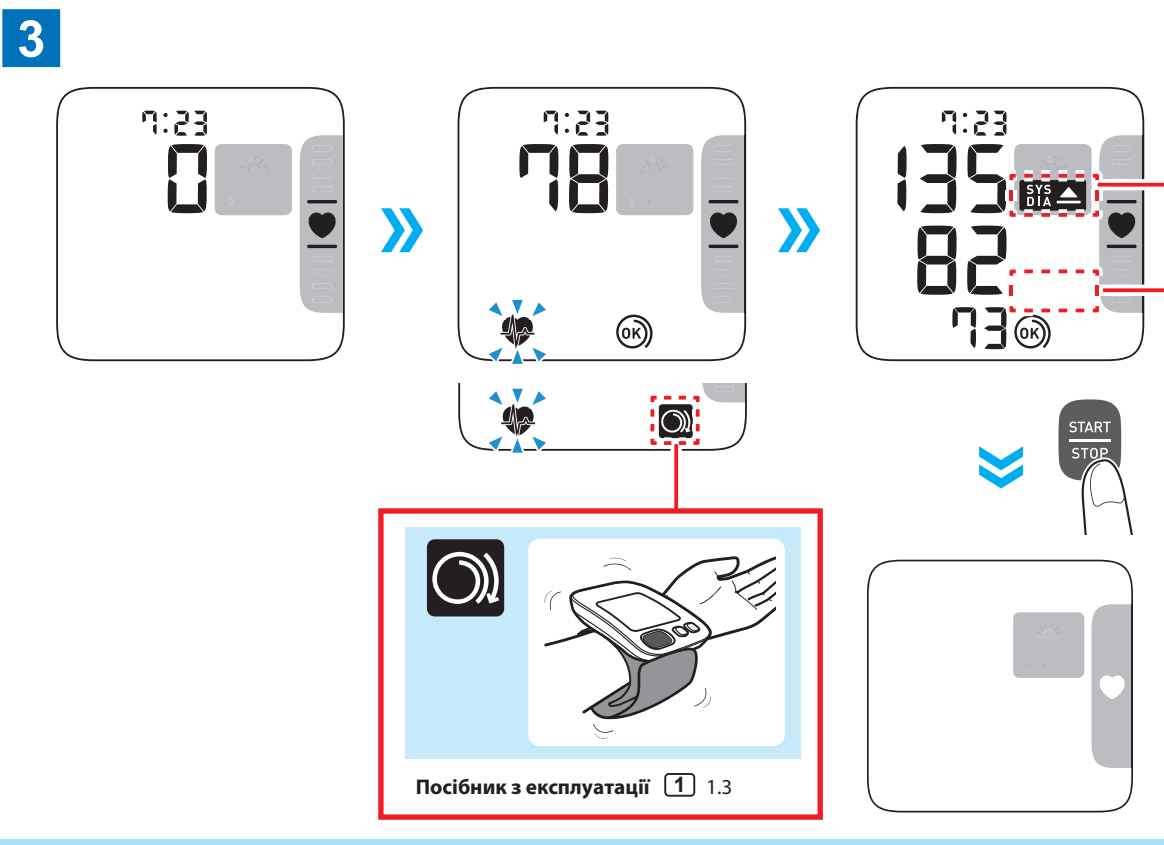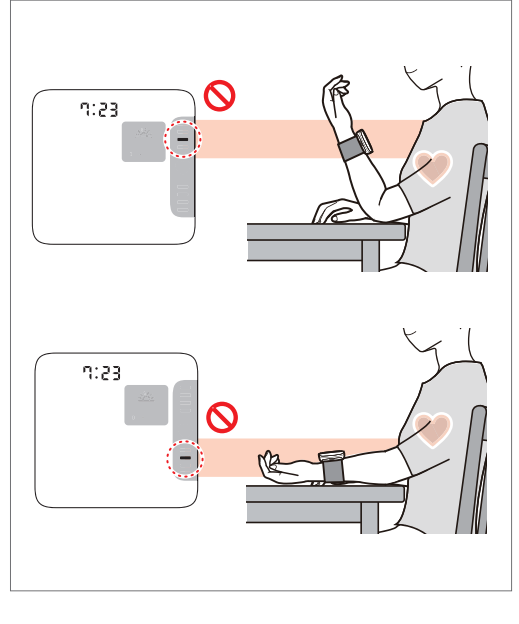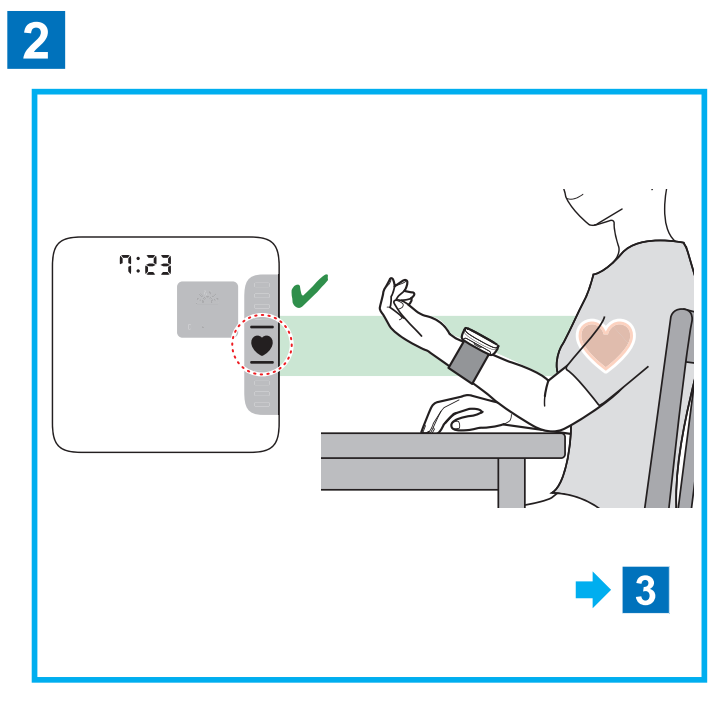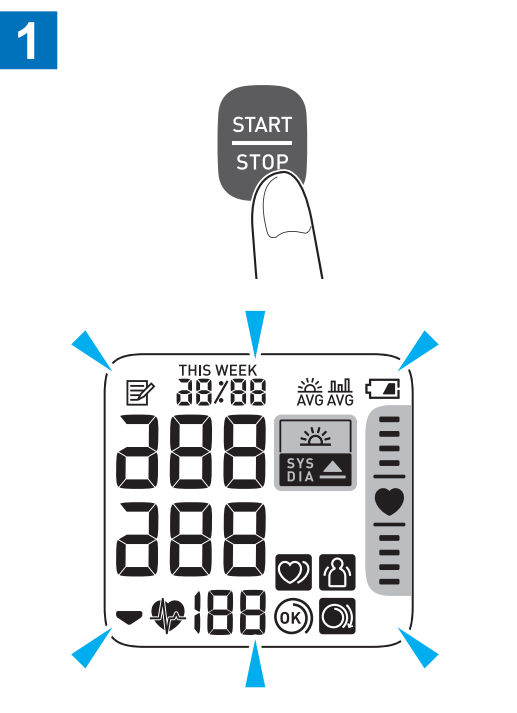

SYS ≥ 135 mmHg
DIA ≥ 85 mmHg → **SYS DIA**
Посібник з експлуатації 1 1.3


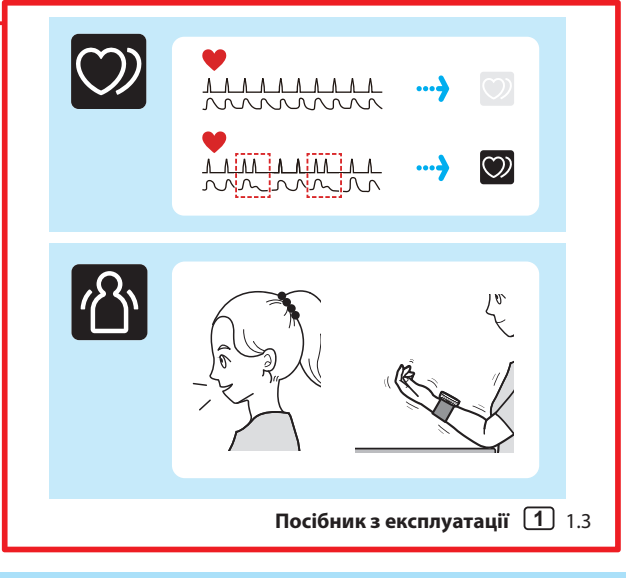


Посібник з експлуатації 1 1.3


Посібник з експлуатації 1 1.3



Перегляд вимірювань, що зберігаються в пам'яті

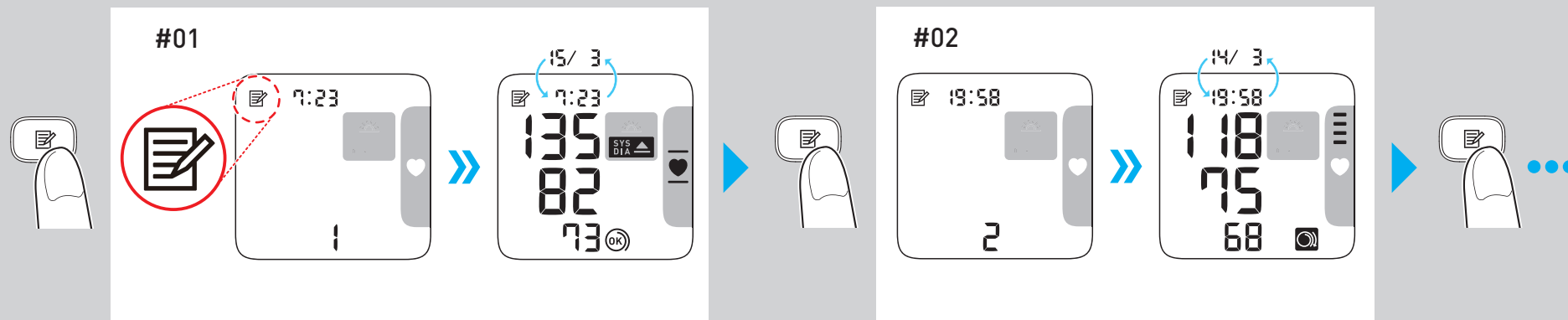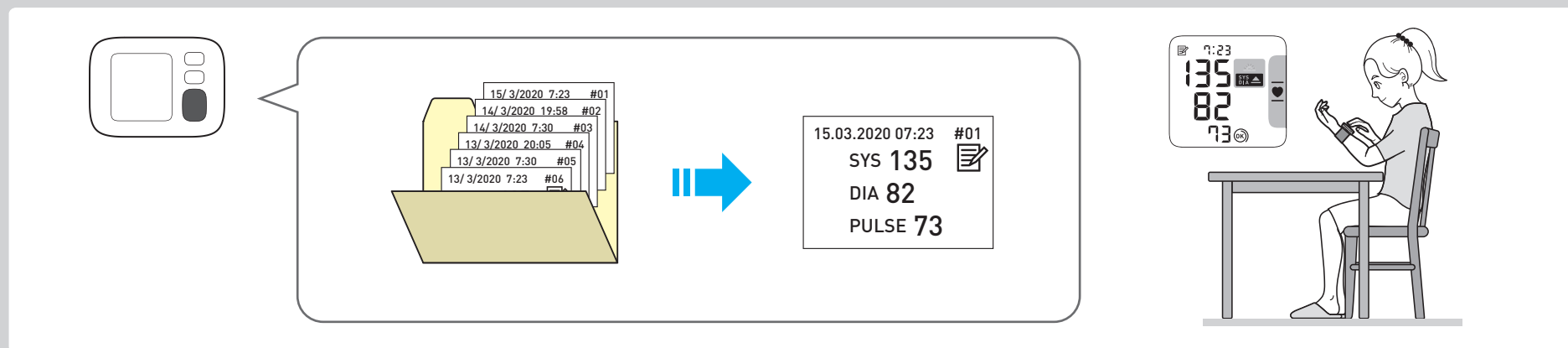

Видалення всіх показань, що зберігаються в пам'яті

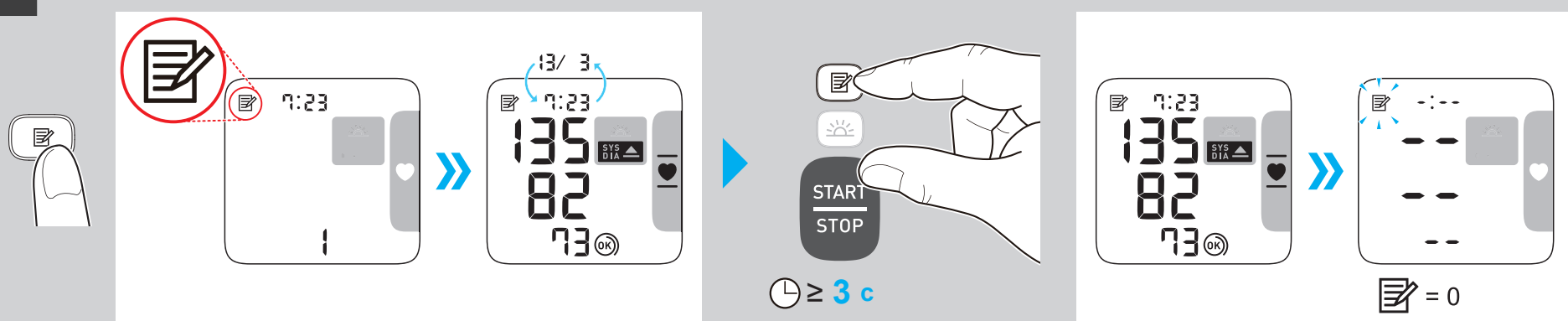

Пояснення позначок

	Ступінь захисту від ураження електричним струмом (струмом витоку) для робочої частини типу BF
 13.5-21.5cm	Вказує на правильне положення вимірювача на зап'ястку. Допустима довжина окружності зап'ястка
IP XX	Ступінь захисту від проникнення пилу та вологи за IEC 60529
CE	Маркування CE
UK CA	Маркування UKCA (UK Conformity Assessed)
SN	Серійний номер
UDI	Унікальний ідентифікатор пристрою
MD	Медичний пристрій

	Обмеження температури
	Обмеження відносної вологості
	Обмеження атмосферного тиску
	Див. посібник з експлуатації.
	Чітко дотримуйтеся вказівок посібника з експлуатації заради своєї безпеки
	Елемент живлення / батареяка
	Постійний струм
	Дата виробництва

Виробник 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 ЯПОНІЯ
Представник в ЄС EC REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, НІДЕРЛАНДИ www.omron-healthcare.com
Імпортер в ЄС	
Виробничі потужності	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, В'єтнам
Дочірні компанії	Імпортер у Великій Британії та відповідальна особа у Великій Британії OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Дата випуску	2022-06-27