

90.00mm

Value&Safe

Mascherina filtrante  
Con elastico - bianca  
Μάσκα Φιλτραρίσματος  
Με βρόχους αυτιών - λευκή  
Mască filtrantă  
Cu prindere după urechi - albă  
Maska z filtrem  
Z pętlą na uszy - biała  
Filtrační maska  
S ušními smyčkami - bílá



FFP2 NR  
>94%

20  
Pezzi  
Τεμάχια  
Bucăți  
Sztuk  
Kusů

Questa mascherina respiratoria è adatta per proteggere contro gli aerosol solidi e liquidi non tossici - NON STERILE, MONOUSO, ANTIPOLVERE - 42,8% TNT, 28,6% cotone ad aria calda, 28,6% tessuto meltblown - Non utilizzare oltre il periodo di validità.

Αυτή η μάσκα αναπνευστικής προστασίας είναι κατάλληλη για χρήση ενάντια στα μη τοξικά στερεά και υγρά αερολύματα - ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ - 42,8% TNT, 28,6% βαμβάκι ζεστού αέρα, 28,6% ύφασμα meltblown - Μην το συνθλίβετε υπερβολικά κατά τη μεταφορά για να μην προκληθεί ζημιά στη συσκευασία. Ισχύς 3 ετών, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος.

Masca de protecție este adecvată pentru a asigura protecția împotriva particulelor netoxice lichide și solide - NESTERILĂ, DE UNICĂ FOLOSINTĂ, ANTI PRAF - 42,8% TNT, 28,6% bumbac cu aer cald, 28,6% țesătură netesută - Nu strângeți excesiv în timpul transportului pentru a evita deteriorarea ambalajului. Valabilitate 3 ani, a nu se utiliza dincolo de perioada de valabilitate.

Przedmiotowa maska jest odpowiednia do ochrony przed nietoksycznymi pyłnymi i stałymi aerozolami - NIESTERYLNA, JEDNORAZOWA, PRZECIWPYLLOWA - 42,8% TNT, 28,6% bawełna na gorące powietrze, 28,6% materiał meltblown - Nie ścisnąć nadmiernie podczas transportu, aby uniknąć uszkodzenia opakowania. Ważność 3 lata, nie używać po upływie terminu ważności.

Tento respirátor je vhodný pro ochranu před netoxickými pevnými a kapalnými aerosoly - NESTERILNÍ, JEDNORAZOVÁ, PROTI PRACHU - 42,8% TNT, 28,6% horkovzdušná bavlna, 28,6% tkanina meltblown - Během přepravy nadměrně nestlačujte, aby nedošlo k poškození balení. Použitelnost 3 roky, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

EU: 2016/425 - EN 149:2001 + A1:2009



#### Per indossare

1. Posizionare il nasello sul naso e la maschera sul mento.
  2. Tirare gli elastici dietro le orecchie e sistemare la maschera.
  3. Adattare il nasello al naso.
  4. Verificare l'aderenza al viso.
- ATTENZIONE**
- a. È prevedibile un rischio se il prodotto viene utilizzato in ambiente chirurgico o con esposizione significativa a liquidi e fluidi corporei o altri fluidi pericolosi, se viene utilizzato in un ambiente clinico dove esiste un alto livello di rischio di infezione per inalazione o se viene utilizzato in presenza di una fonte di calore intenso o di un gas infiammabile.
  - b. Il prodotto non è pensato per l'uso in un ambiente anossico o un ambiente subacqueo.
  - c. Verificare l'integrità prima dell'uso.
  - d. Il prodotto non è un respiratore.
  - e. La mascherina non elimina il rischio di contrarre malattie o infezioni.
  - f. L'uso scorretto e la conservazione errata del prodotto possono comportare disturbi.
  - g. Non usare oltre il periodo di validità.
  - h. Non usare se la confezione è danneggiata.
  - i. Non usare con l'ossigeno e usare solo in area ventilata con ossigeno >19% e per un turno di lavoro. Modifiche, danni, capelli e barba riducono l'efficacia. In caso di malore abbandonare l'area di lavoro e raggiungere zone di aria fresca. Evitare uso in zone altamente contaminate o a rischio di esplosione.
  - l. La mascherina è monouso, non deve essere utilizzata per più di un turno lavorativo.

#### Για να τη φορέσετε

1. Τοποθετήστε το ρινικό έλασμα πάνω στη μύτη και τη μάσκα στο πηγούνι.
  2. Τραβήξτε τα λάστιχα πίσω από τα αυτιά και προσαρμόστε τη μάσκα.
  3. Προσαρμόστε το ρινικό έλασμα στη μύτη.
  4. Ελέγξτε την πρόσφυση στο πρόσωπο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ**
- a. Υπάρχει πιθανότητα κινδύνου εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε χειρουργικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με σημαντική έκθεση σε οσμητικά υγρά ή άλλα επικινδύνα υγρά, εάν χρησιμοποιείται σε κλινικό περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο κινδύνου μόλυνσης λόγω εισπνοής ή εάν χρησιμοποιείται υπό την παρουσία πηγής έντονης θερμότητας ή εύφλεκτου αερίου.
  - b. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ανοξικό περιβάλλον και σε συνθήκες κάτω από το νερό.
  - c. Επαληθεύστε την ακεραιότητα του προϊόντος πριν από τη χρήση.
  - d. Το προϊόν δεν είναι αναπνευστήρας.
  - e. Η μάσκα δεν ελαττώνει τον κίνδυνο προσβολής από ασθένειες ή μόλυνσεις.
  - f. Η λανθασμένη χρήση και η εσφαλμένη αποθήκευση του προϊόντος ενδέχεται να συνεπάγονται διαταραχές.
  - g. Επαληθεύστε την ακεραιότητα πριν της διάρκειας ισχύος.
  - h. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.
  - i. Μην τη χρησιμοποιείτε με οξυγόνο και φοράτε την μόνο σε αεριζόμενο χώρο με οξυγόνο >19% και για μία μόνο βάρδια εργασίας. Τροποποιήσεις, φθορές, μολλιά και γένια μειώνουν την αποτελεσματικότητα. Σε περίπτωση δυσφορίας εγκαταλείψτε τον χώρο εργασίας και μεταβείτε σε χώρο με καθαρό αέρα. Αποφύγετε τη χρήση σε χώρους με υψηλά επίπεδα μόλυνσης ή με κίνδυνο έκρηξης.
  - l. Η μάσκα είναι μιας χρήσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από μία βάρδια εργασίας.

#### Pentru folosire

1. Poziționați partea superioară pe nas și masca pe bărbie
  2. Trageți elasticile în spatele urechilor și așezați masca
  3. Adaptați partea superioară la nas
  4. Verificați potrivirea pe față.
- ATENȚIE**
- a. Un risc este previzibil dacă produsul este utilizat într-un mediu chirurgical sau cu expunere semnificativă la fluide corporale și alte fluide periculoase, dacă este utilizat într-un ambient clinic în care există un nivel ridicat de risc de infecție prin inhalare sau dacă este utilizat în prezența unei surse de căldură intensă sau a unui gaz inflamabil
  - b. Produsul nu este destinat folosirii într-un mediu lipsit de oxigen și într-un mediu subacvatic.
  - c. Verificați integritatea înainte de utilizare.
  - d. Produsul nu este un aparat respirator.
  - e. Masca nu elimină riscul de a contracta boli sau infecții.
  - f. Utilizarea incorectă și depozitarea incorectă a produsului poate duce la tulburări.
  - g. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate.
  - h. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.
  - i. A nu se utiliza cu oxigen și doar într-o zonă ventilată cu oxigen >19% și pentru un singur schimb de lucru.
  - Modificările, deteriorările, părul și barba reduc eficiența produsului. În caz de stare de rău, părăsiți zona de lucru și deplasați-vă într-o zonă cu aer proaspăt. Evitați folosirea măștii în zone puternic contaminate sau în zone ce prezintă pericol de explozi.
  - l. Masca este de unică folosință și nu trebuie utilizată mai mult de un schimb de lucru.


#### Zakładanie maski

1. Umieść nosek na nosie, a maskę na brodzie.
  2. Załóż gumki za uszy i dopasuj maskę.
  3. Dopasuj nosek do nosa.
  4. Sprawdź przyleganie maski do twarzy.
- UWAGA**
- a. Przewidywalne jest ryzyko, jeśli produkt jest używany w warunkach chirurgicznych lub w przypadku znacznego narażenia na cieple i płynny ustrojowej i inne niebezpieczne płyny, jeśli jest używany w warunkach klinicznych, w których istnieje wysokie ryzyko zakażenia przez drogi oddechowe lub jeśli jest stosowany w obecności źródła intensywnego ciepła lub łatwopalnego gazu.
  - b. Produkt nie jest odpowiedni do używania w środowiskach anabotowych i w środowisku wodnym.
  - c. Przed użyciem należy sprawdzić integralność maski.
  - d. Produkt nie jest respiratorem.
  - e. Maska nie eliminuje ryzyka zarażenia się chorobami czy infekcjami.
  - f. Nieprawidłowe użytkowanie i nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować dolegliwości.
  - g. Nie stosować po upływie okresu ważności.
  - h. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
  - i. Nie stosować z tlenem i wyłącznie w wentylowanym pomieszczeniu z tlenem >19% i przez jedną zmianę. Zmiany, uszkodzenia, włosy i broda zmniejszają skuteczność. W przypadku złego samopoczucia opuść miejsce pracy i wyjdź na świeże powietrze. Unikaj stosowania w obszarach silnie zanieczyszczonych lub w którym istnieje ryzyko wybuchu.
  - l. Maska jest przeznaczona do jednorazowego użytku i nie powinna być używana dłużej niż przez jedną zmianę roboczą.

#### Způsob nasazení

1. Umístěte nosní svorku na nos a masku na bradu.
  2. Vytáhněte gumičky za uši a upravte polohu masky na obličej.
  3. Přizpůsobte nosní díl nosu.
  4. Zkontrolujte těsnost k obličej.
- POZORNOST**
- a. Existuje předvídatelné riziko, jestliže je výrobek používán v chirurgickém prostředí nebo s významnou expozicí tělních tekutin nebo jiných nebezpečných kapalin, je-li používán v klinickém prostředí, kde je vysoké riziko infekce inhalací, nebo pokud se používá v přítomnosti zdroje intenzivního tepla nebo hořlavého plynu.
  - b. Výrobek není určen pro použití v anoxickém prostředí a pod vodou.
  - c. Před použitím zkontrolujte neporušenost.
  - d. Výrobek není respirátor.
  - e. Maska nevylučuje riziko přenosu nemoci nebo infekcí.
  - f. Nesprávné použití a nesprávné skladování výrobku může vést k narušením.
  - g. Nepoužívejte po uplynutí doby platnosti.
  - h. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.
  - i. Nepoužívejte s kyslíkem a pouze ve větraném prostoru s obsahem kyslíku > 19 % a po dobu jedné směny. Úpravy, poškození, vlasy a vousy snižují jeho účinnost. V případě nevolnosti opusťte pracovní prostor a přemístěte se do oblasti s čerstvým vzduchem. Nepoužívejte ve vysoce kontaminovaných nebo potenciálně výbušných oblastech.
  - l. Respirátor je na jedno použití a nesmí se používat déle než jednu pracovní směnu.

509558 Rev. 15 - 12/23  
Size 18x9x11,3 cm

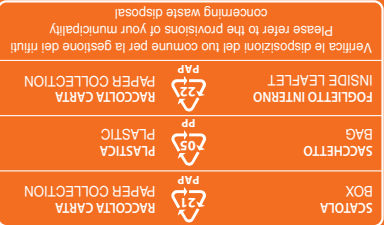

LG&I Technological Center (APPLUS)  
Campus UAB,  
Ronda de la Font del Carme s/n,  
E-08193, Bellaterra (Barcelona), Spain

Organismo notificato  
Κοινωνικη Οργανωση  
Οργανισμοι Οργανισμοι  
Organism notified  
Regulation UE: 2016/425  
Requisiti UE: 2016/425  
Regulation UE: 2016/425  
Requisiti UE: 2016/425



REF LK-Z006 (GIMA 20733)

Marca: XIQUE / Etiqueta: XIQUE / Marca: XIQUE

Marka: XIQUE / Znakka: XIQUE

Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd  
Tongcheng City, Anhui Province  
Made in China

Importato da / Importat de  
Importat de / Importat de  
Importat de / Importat de  
Importat de / Importat de

Organismo notificato  
Κοινωνικη Οργανωση  
Οργανισμοι Οργανισμοι  
Organism notified  
Regulation UE: 2016/425  
Requisiti UE: 2016/425  
Regulation UE: 2016/425  
Requisiti UE: 2016/425

STERN E  
-30°C  
-40°C  
-80%  
-80%

0370