


iHealth[®] Wave

Ενεργοποιηθείτε. Κινηθείτε. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις σας




92

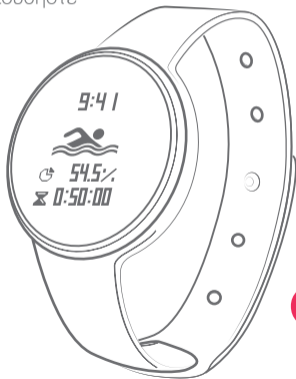

ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΑΣ

93

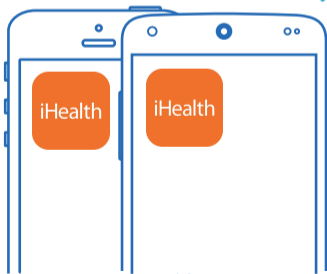

Είναι η συσκευή του κινητού σας συμβατή;
Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο
www.ihealthlabs.com/support για
να το διαπιστώσετε!


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναζήτηση & Download "iHealth Myvitals"
από το App Store ή το Google Play

1 Σύρετε το δάχτυλό σας επάνω από το Κέντρο ελέγχου και ενεργοποιήστε το *Bluetooth*


2 Ανοίξετε την εφαρμογή και δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό

94

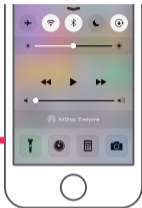


iOS

Σύρετε προς τα κάτω το Κέντρο Ελέγχου και ενεργοποιήστε το *Bluetooth*

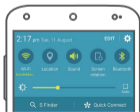



ANDROID

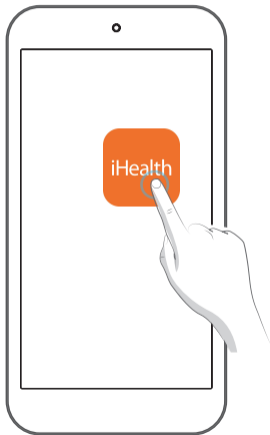

3 Επιλέξτε "Ιχνηλάτες Δραστηριότητας"

4 Επιλέξτε "Wave (AM4)"

95

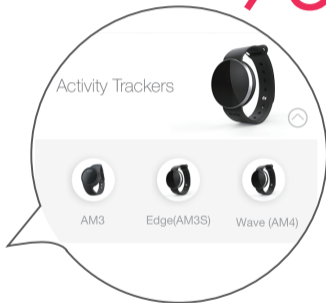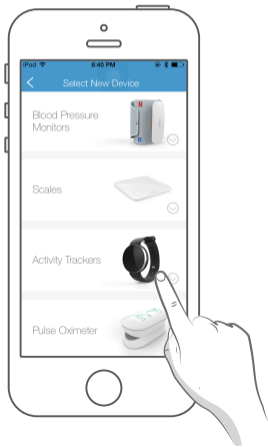



5 Επιλέξτε "Επόμενο"



6 Σύνδεση με τη συσκευή σας



96

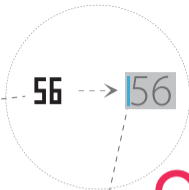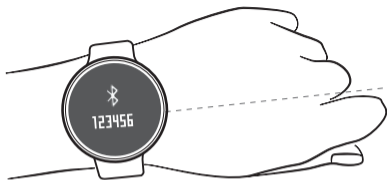


97

7 Εισαγάγετε τα 2 τελευταία ψηφία από τα 6 ψηφία που δείχνει η λειτουργία tracker.

Αν δεν βλέπετε τα 6 ψηφία, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Home (σε iOS) ή πηγαίνετε στο μενού εφαρμογών (σε Android) και σύρετε το δάχτυλό σας πάνω από την εφαρμογή, για να την κλείσετε τελείως.


Επαναλάβετε τα βήματα από το βήμα 2.

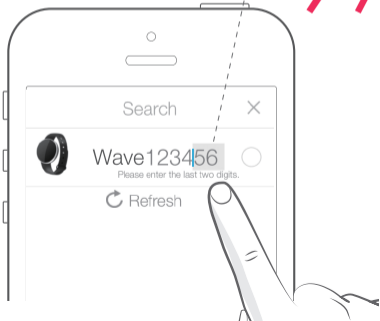

8

Σύνδεση επιτυχής
Κάντε κλικ στο "ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ"
για να συγχρονίσετε τα δεδομένα
στην εφαρμογή και το
Σύννεφο (Cloud)

98

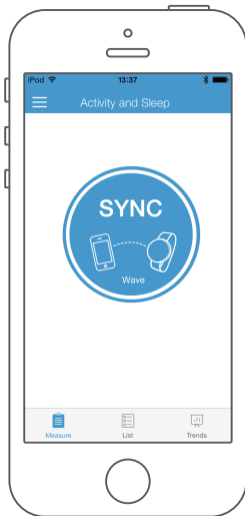

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στο "Ρύθμιση των
Συσκευών Μου" μπορείτε
να ορίσετε μία υπενθύμιση
για να παραμείνετε
δραστήριοι

99



ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Προπόνηση



Αφού περπατήσετε ή τρέξετε συνεχόμενα για πάνω από 10 λεπτά, θα δημιουργηθεί μία συνοπτική παρουσίαση με τα επιμέρους δεδομένα της γυμναστικής σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

Λειτουργία ύπνου

100



Παρακολουθήστε αυτόματα την ποιότητα του ύπνου και της γυμναστικής σας. Στο "Ρύθμιση των Συσκευών Μου" μπορείτε να επιλέξετε δόνηση ως ξυπνητήρι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε το Wave για να παρακολουθείτε σας κολυπήσουν.

Το Wave αναγνωρίζει αυτόματα διάφορα στυλ κολύμβησης όπως ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο.



- ▶ Το πρόγραμμα κολύμβησης μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί από το μενού "Ρυθμίστη των Συσκευών Μου".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕΕ

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των Κανονισμών της ΟΕΕ. Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

- (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές,
- (2) πρέπει να μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες μπορούν να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Τυχόν αλλαγές ή μετατροπές που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τη iHealth Lab Inc μπορούν να ανατρέξουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί την παρούσα συσκευή.

Σημείωση: Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπισθεί για ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β, σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών της ΟΕΕ. Τα όρια αυτά ώστε να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοκυμάτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δε θα προκληθούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αν η παρούσα συσκευή προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, πράγμα που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, προτείνεται να προσπαθήσετε να απαλλαγείτε από τις παρεμβολές εκτελώντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων.

Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με το(τα) πρότυπο(α) RSS της Industry Canada για απαλλαγή αδειάς. Η λειτουργία διέπεται από τους παρακάτω δύο όρους:

- (1) η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και
- (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται κάθε είδους παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής



WAARSCHUWING

GEVAAR OP ONTPLOFFING ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN
DOOR EEN ONJUIST TYPE.

Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies.

Hierbij verklaart [iHealth Lab Inc.] dat deze [AM4 WAVE] voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Een conformiteitsverklaring voor Richtlijn 1999/5/EG en alle iHealth-certificerings- en voorschriftendocumenten kunnen worden gedownload via de volgende link:<https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~+40°C

Contact en klantenservice:

Geproduceerd voor iHealth Lab Inc.

iHealth Lab Inc.

719N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

Tel: +1-855-816-7705 www.ihealthlabs.com



Geproduceerd voor iHealth Lab Europe

3 rue Tronchet, 75008, Parijs, Frankrijk

www.ihealthlabs.eu support@ihealthlabs.eu



ANDON HEALTH CO., LTD.

No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.

Tel: 86-22-60526161

103

Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο
www.ihealthlabs.com
για περισσότερες πληροφορίες

iHealth[®] Wave

104