



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA DIGITALE IN VETRO**  
**GLASS DIGITAL SCALE**  
**PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE**  
**GLASPERSONENWAAGE**  
**BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL**  
**BALANÇA DIGITAL DE VIDRO**  
**ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**  
**SZKLANA WAGA CYFROWA**  
**چاگز ن م یلای جید نازی م**  
**DIGITAALINEN LASIVAACA**  
**STAKLENA DIGITALNA VAGA**  
**ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG**  
**CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ**  
**DIGITAL GLASVÁG**

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**  
**USE AND MAINTENANCE BOOK**  
**INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN**  
**BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN**  
**MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**  
**MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO**  
**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**  
**PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI**  
**KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS**  
**PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE**  
**HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ**  
**MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE**  
**ANVÄNDNINGSG- OCH UNDERHÅLLSMANUAL**

**REF** GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)

Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por/Hergestellt von/Zrobione przez/Ἐτιασμένο από/  
**GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS.CO.LTD.**  
Jin'an Road , Minzhong, Zhongshan 528441, China  
Made in China

Importato e distribuito da/Imported and distributed by  
**GIMA S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com



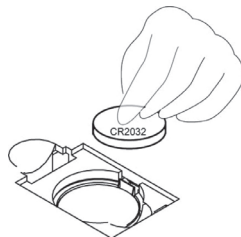
**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- Auto ON
- Auto OFF
- Μονάδα μέτρησης βάρους: kg, lb, st:lb
- Ικανότητα φορτίου: 150kg/330lb/23st:8lb
- Κλίμακα: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb, ≥20st)
- Μήνυμα υπερφόρτωσης: “ — — — — ”
- Μήνυμα άδειας μπαταρίας “Lo”
- Τροφοδοσία: 1 x μπαταρία CR2032

ΟΘΟΝΗ LCD

**ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

- Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι +/- είναι σωστά.
  - Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο για να διευκολυνθεί η αφαίρεση της μπαταρίας από τη θέση της, αν χρειαστεί
- Αφαιρέστε τη μονωτική ταινία πριν από τη χρήση.

**ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ****ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Πατήστε το πλήκτρο UNIT για να ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια, αφήστε να σβήσει η ζυγαριά αυτόματα.
3. Ανεβείτε απευθείας στη βάση της ζυγαριάς. Η οθόνη θα αναβοσβήνει μέχρι να προσδιοριστεί το βάρος. Μετά από 10 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται αυτόματα.
4. Αν δεν χρησιμοποιηθεί, σβήνει αυτόματα
5. Όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αποθηκεύεται σε οριζόντια θέση χωρίς να ακουμπήσετε πάνω κάποιο αντικείμενο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:**

Μη χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά πάνω σε χαλί

Για να εξασφαλιστεί ο ακριβής προσδιορισμός του βάρους, όταν μετακινείτε τη ζυγαριά συνιστούμε να την ενεργοποιήσετε (ή να την αγγίξετε) και να περιμένετε να σβήσει. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανεβείτε στη ζυγαριά για να μετρήσετε το βάρος σας. Διαφορετικά, θα μπορούσε να προσδιορίσει μεγαλύτερο βάρος.

**ΧΩΝΕΥΣΗ:**

Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα απορύματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες στους χώρους συγκέντρωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία του δήμου παραμονής σας, το τμήμα χώνευσης τοπικών απορυμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Σε περίπτωση λανθασμένης χώνευσης υπάρχει κίνδυνος εφαρμογής κυρώσεων βάσει των κρατικών νόμων.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA**

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.