



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE IN VETRO
GLASS DIGITAL SCALE
PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
GLASPERSONENWAAGE
BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL
BALANÇA DIGITAL DE VIDRO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
SZKLANA WAGA CYFROWA
جاجز نم يلاتي جيدي نازيم
DIGITAALINEN LASIVAAKA
STAKLENA DIGITALNA VAGA
ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG
CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ
DIGITAL GLASVÁG

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
ANVÄNDNINGS- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

REF GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)


Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por/Hergestellt von/Zrobione przez/Φτιαγμένο από/
ZHONGSHAN TRANSTEK ELECTRONICS CO., LTD
Zone E, No.105, Dongli Road, Torch Development District
528437 Zhongshan, Guangdong, China
Made in China

Importato e distribuito da/Imported and distributed by
GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



لتبديل البطارية

- التأكد من أن الأقطاب +/- صحيحة.
- استخدام أداة ملائمة لتسهيل عملية إزالة البطارية من موضعها الخاص إذا كانت هناك ضرورة.
- يرجى إزالة الشريحة العازلة قبل الاستعمال.

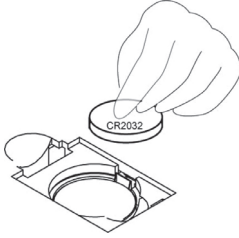

شاشة عرض كاملة LCD



الميزات والخصائص

- تشغيل أوتوماتيكي (Auto ON)
- إطفاء أوتوماتيكي (Auto OFF)
- وحدة القياس للوزن: كغم، رطل، حجر: رطل (kg, lb, st:lb)
- القدرة: 150 كغم / 330 رطل / 23 حجر: 8 رطل
- السلم: 0.1kg/0.2lb/0.2lb (1lb, ≥20st)
- بلاغ فرط العبء: "—" "—"
- بلاغ بطارية فارغة الشحنة: "Lo"
- بطارية: 1 x بطارية CR2032

مفاتيح الوظائف



إرشادات الاستعمال

- <1> الضغط على المفتاح UNIT لتشغيل واختيار الوحدة.
- <2> وضع الميزان على سطح متين ومسطح، والانتظار حتى ينطفئ الميزان أوتوماتيكيا.
- <3> الصعود مباشرة على قاعدة الميزان. شاشة العرض تتذبذب حتى يتم تحديد الوزن. بعد 10 ثواني تنطفئ أوتوماتيكيا.
- <4> في حالة عدم الاستخدام، تنطفئ أوتوماتيكيا.
- <5> خلال فترات عدم الاستخدام يتوجب حفظه بالوضع الأفقي دون وضع أي غرض فوقه.

تحذيرات:



عدم استخدام الميزان على سجاد
لهدف ضمان التبيين الدقيق للوزن، عند القيام بازاحة الميزان ننصح بتشغيله (أو مسّه) وانتظار انطفائه. بعد ذلك يكون بإمكانكم الصعود على الميزان لقياس وزنكم. في الحالة العكسية، من الممكن أن يكشف وزن أكبر.



التصريف

ممنوع تصريف المنتج هذا بالوحدة إلى النفايات المنزلية الأخرى. من واجب المستهلكين القيام بتصريف الأجهزة المراد التخلص منها بإحضارها إلى مراكز التجميع المشار إليها والخاصة في تجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واستغلالها من جديد. للحصول على المعلومات الإضافية الخاصة في مراكز التجميع، التوجه إلى بلدية مكان الإقامة، مركز خدمة تصريف النفايات المحلية أو إلى الحانوت الذي لديه تم الشراء. في حالة التصريف الخاطئ، قد تفرض الغرامات، بموجب القوانين الوطنية.

شروط الضمان GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيم GIMA لمدة 12 شهر.