



Littmann®
Classic III™
Stethoscope



3M™ Littmann® Classic III™ Stetoskop Brugervejledning

Tillykke med dit nye 3M™ Littmann® Classic III™ stetoskop.

Littmann Classic III stetoskopet giver høj akustisk følsomhed kombineret med enestående alsidighed. Det moderne design tilbyder en flydende, enkeltstøbt membran på hver side af bryststykket. Den store side kan bruges til voksne patienter, mens den lille side er velegnet til børn. Desuden kan den lille side af bryststykket nemt konverteres til en traditionel klokke ved blot at udskifte membranen med den kuldefri gummiring, som leveres sammen med stetoskopet. For yderligere oplysninger, besøg www.littmann.com.

Symbolforklaring



Se brugsanvisningen.




Ikke fremstillet i naturgummilatex.

Brugsanvisning


Sæt stetoskopet i ørene

Stetoskopbøjlerne er anatomisk designet med en korrekt vinkel til en typisk øregang og designet til at give en behagelig, akustisk og tæt tilpasning i ørene. Øreoliven skal være rettet fremad, når du indsætter dem i ørene.

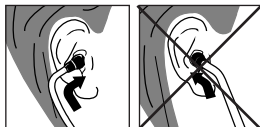


Indstil bøjlernes spænding

Hvis nødvendigt kan du indstille bøjlernes spænding for at sikre en tæt, men behagelig, tilpasning til dine ører.

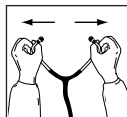

For at mindske fjederspændingen på bøjlerne skal øreslangerne trækkes fra hinanden. Gentag indtil den ønskede spænding opnås.

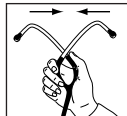


For at øge fjederspændingen på bøjlerne skal øreslangerne klemmes sammen. Gentag indtil den ønskede spænding opnås.

Vælg den aktive side af bryststykket


Littmann Classic III stetoskopet har et dobbeltsidet bryststykke. Kun én side af bryststykket er aktivt ad gangen. Dette kan ses med et mærke på stilken. Drej bryststykket for at skifte den aktive side.

Littmann flydende membran – lyt til lav- og højfrekvente lyde

Begge sider af bryststykket er udstyret med Littmanns flydende membran, som giver mulighed for at fremhæve enten lav- eller højfrekvente lyde afhængig af trykket, som påføres på patienten.

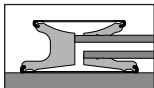

Lavfrekvente lyde: For at fremhæve lavfrekvente lyde, skal der påføres meget lidt tryk på patienten.

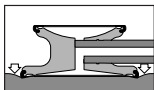

Højfrekvente lyde: For at fremhæve højfrekvente lyde, skal der påføres større tryk på patienten.

Skift til traditionel åben klokke



Den lille side af bryststykket kan bruges med Littmanns flydende membran, eller den kan konverteres til en traditionel åben klokke med den kuldefri gummiring, som leveres sammen med stetoskopet.



For at fjerne Littmanns flydende membran, klem kanten af membranen med en tommel- og pegefinger, og træk og løft membranen af bryststykket.



For at montere klokkens kuldefri gummiring, placer den ene side af gummiringen på kanten af bryststykket og stræk den over og rundt om bryststykkets kant.



Klokens kuldefri gummiring skal fjernes før den flydende membran kan sættes på igen. Indsæt den fleksible ende af den flydende membran i udfræsningen på kanten og rul langsomt kanten rundt og over bryststykkets kant.


DK

Rengøring, desinfektion og opbevaring

Rens dit stetoskop mellem hver patient med enten en 70 % isopropylalkoholserviet eller med en engangsserviet med sæbevand. Det er bedste praksis, at bruge en engangsserviet når stetoskopet renses, for at fjerne organisk materiale.

Der kan anvendes en 2 % blegemiddelopløsning til at desinficere dit stetoskop. Dog kan stetoskoper med rødt pigment i slangens farve (bourgogne, pink, blomme, fersken, hindbær, orange, osv.) opleve en let affarvning efter rensning med blegemiddel. På grund af blegemiddels destruktive sammensætning må der kun bruges blegemiddelopløsning begrænset, og/eller når det er absolut nødvendigt.

De flydende membraner, klokkens kuldefri gummiring og øreoliven kan aftages for grundig rengøring (sørg for at alle dele og overflader er tørre før de sættes på igen). Træk hårdt i øreoliven, for at fjerne dem fra bøjlerne. Når øreoliven skal sættes på igen, presses den lille side hårdt ind på bøjlerne, indtil de klikker på plads.

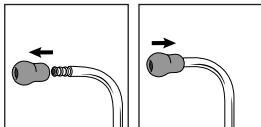

Stetoskopet må ikke dypes i væske.

Stetoskopet må ikke udsættes for en steriliseringsproces.

Udgå at opbevare stetoskopet under ekstremt varme forhold.

Littmann service og garantiprogram

Stetoskopet bør registreres online på:
<http://www.littmann.com/warranty-registration>

Littmann Classic III stetoskopet har en 5-årig garanti, som dækker materiale- og fabrikationsfejl i garantiperioden. Reparationer i garantiperioden foretages uden beregning ved returnering af stetoskopet til 3M, dog ikke hvis stetoskopet viser tydelige tegn på misbrug eller skade.

For service og reparation i USA, besøg venligst www.littmann.com/service eller ring på 1-800-292-6298. Hvis du er uden for USA, besøg venligst www.littmann.com for kontaktoplysninger for dit lokale 3M kontor.

3M, Littmann, L Littmann logoet, L, og Classic III er varemærker tilhørende 3M.

Anvendt under licens i Canada.

© 2015, 3M. Alle rettigheder forbeholdt.



Made in U.S.A. by  **3M Health Care**,
2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144
(U.S.A.) 1-800-228-3957 Visit our website www.littmann.com



Not Made
With Natural
Rubber Latex

Consult
instructions
for use

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L,
and Classic III are trademarks of 3M.
Used under license in Canada.
© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3



3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany