



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TEST RAPIDO DI GRAVIDANZA MIDSTREAM HCG (URINA)
PER AUTODIAGNOSI**

**HCG PREGNANCY RAPID TEST MIDSTREAM (URINE)
FOR SELF TEST**

**TEST DE GROSSESSE RAPIDE HCG (URINE)
POUR AUTODIAGNOSTIC**

**HCG SCHWANGERSCHAFTS-SCHNELLTEST MIDSTREAM (URIN) PA-
CKUNGSBEILAGE FÜR SELBSTTEST**

**TEST DE EMBARAZO RÁPIDO EN FORMATO MIDSTREAM (ORINA)
HORMONA GCH**

**TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ MIDSTREAM HCG (URINA)
PARA AUTODIAGNÓSTICO**

**SZYBKI TEST CIĄŻOWY HCG TYPU MIDSTREAM (STRUMIENIOWY)
ULOTKA INFORMACYJNA DO TESTÓW SAMODZIELNEGO UŻYTKU**

**ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ MIDSTREAM HCG (ΟΥΡΩΝ) ΓΙΑ
ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ**

REF

GIMA 29097 FHC-F103H

GIMA 29098 FHC-F103H



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yin Hai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou - 310018, P.R. China
Made in China



MedNet EC-REP GmbH,
Borkstrasse 10 - 48163 Muenster
Germany

Importato da, imported by, importé par, importado por,
importado por, importiert von, Εισάγεται από,
Importowane przez,
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 0123



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το τεστ εγκυμοσύνης ταχείας ανίχνευσης ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) με στικ midstream είναι ένας ταχύς χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποιοτική ανίχνευση της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης στα ούρα, με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση εγκυμοσύνης.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Το τεστ εγκυμοσύνης ταχείας ανίχνευσης ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) με στικ midstream είναι ένας ταχύς ανοσοπροσδιορισμός πλευρικής ροής ενός βήματος για την ποιοτική ανίχνευση της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) στα ούρα, το οποίο βοηθά στην ανίχνευση της εγκυμοσύνης. Η εξέταση χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό αντισωμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός μονοκλωνικού αντισώματος hCG, για την επιλεκτική ανίχνευση αυξημένων επιπέδων hCG. Ο προσδιορισμός διεξάγεται με την προσθήκη ούρων στο υδρόφιλο στικ και τη λήψη του αποτελέσματος από τις έγχρωμες γραμμές.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Η εξέταση περιέχει σωματίδια αντι-hCG και αντι-hCG επικαλυμμένα στη μεμβράνη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν από την εκτέλεση της εξέτασης, διαβάστε όλες τις πληροφορίες σε αυτό το ένθετο συσκευασίας.

- Μην χρησιμοποιείτε το τεστ μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη θήκη από φύλλο αλουμινίου.
- Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος στους 2-30 °C ή 35,6-86 °F. Μην καταψύχετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το τεστ εάν η θήκη έχει σχιστεί ή υποστεί ζημιά.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Για in vitro διαγνωστική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για εσωτερική χρήση.
- Μην ανοίγετε τη θήκη από φύλλο αλουμινίου του στικ midstream εξέτασης μέχρι να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εξέταση.
- Το χρησιμοποιούμενο στικ midstream εξέτασης θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το κιτ μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο (2-30 °C). Μην ανοίγετε τη θήκη μέχρι να είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το δείγμα ούρων θα πρέπει να συλλεχθεί σε καθαρό και στεγνό περιέκτη. Προτιμάται ένα δείγμα πρώτων πρωινών ούρων, καθώς γενικά περιέχει την υψηλότερη συγκέντρωση hCG. Ωστόσο, είναι δυνατή η χρήση δειγμάτων ούρων που συλλέγονται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Τα δείγματα ούρων που εμφανίζουν ορατά σωματίδια θα πρέπει να υποβάλλονται σε φυγοκέντρηση, σε διήθηση ή να αφήνονται να κατακαθίσουν για τη λήψη καθαρού δείγματος για εξέταση.

Εάν δεν μπορεί να γίνει αμέσως η ανίχνευση στο δείγμα ούρων, αυτό θα πρέπει να φυλαχτεί σε θερμοκρασία 2-8 °C για έως και 48 ώρες πριν από την εξέταση. Για φύλαξη παρατεταμένης διάρκειας, τα δείγματα μπορούν να

καταψυχθούν και να φυλαχθούν σε θερμοκρασία κάτω των -20 °C. Τα καταψυγμένα δείγματα πρέπει να αποψύχονται και να αναμειγνύονται πριν από την εξέταση.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	
• Στικ midstream εξέτασης	• Ένθετο συσκευασίας
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ	
• Χρονόμετρο	• Περιέκτης συλλογής δείγματος

ΟΔΗΓΙΕΣ


Αφήστε το τεστ και το δείγμα ούρων να περιέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου (15-30 °C) πριν από την εξέταση.

1. Αφαιρέστε το στικ midstream από τη θήκη από φύλλο αλουμινίου και πραγματοποιήστε την εξέταση με αυτό αμέσως εντός μίας ώρας.
2. Αφαιρέστε το καπάκι του στικ midstream και κρατήστε το στικ midstream με τρόπο ώστε να τοποθετήσετε το απορροφητικό άκρο στη ροή των ούρων ή τοποθετήστε το απορροφητικό άκρο ($\geq 2/3$) μέσα στο δείγμα ούρων σε έναν καθαρό συλλέκτη για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ουρείτε στο παράθυρο αποτελέσματος.

3. Καλύψτε το καπάκι του στικ midstream, στη συνέχεια, τοποθετήστε το προϊόν σε ένα καθαρό και σταθερό τραπέζι και ξεκινήστε αμέσως το χρονόμετρο.
4. Διαβάστε το αποτέλεσμα στα 3 λεπτά. Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά από 10 λεπτά.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

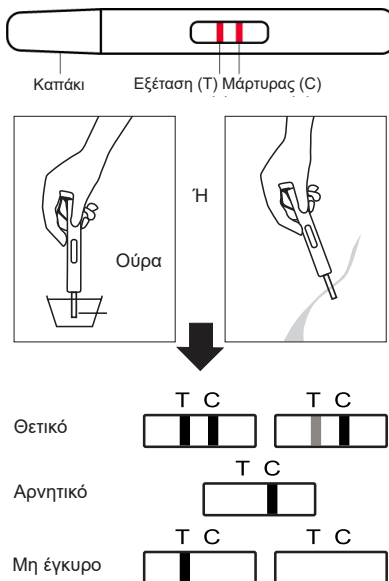

ΘΕΤΙΚΟ: Εμφανίζονται δύο έγχρωμες γραμμές. Η μία γραμμή θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή γραμμής ελέγχου (C) και η άλλη γραμμή θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή γραμμής εξέτασης (T). Η μία γραμμή μπορεί να είναι πιο αχνή από την άλλη, δεν χρειάζεται να έχουν την ίδια ένταση. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον είστε έγκυες.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Εμφανίζεται μία έγχρωμη γραμμή στην

περιοχή γραμμής ελέγχου (C). Δεν εμφανίζεται γραμμή στην περιοχή της γραμμής εξέτασης (T). Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν είστε έγκυος.

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ: Το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο εάν δεν εμφανίζεται έγχρωμη γραμμή στην περιοχή γραμμής ελέγχου (C), ακόμα και εάν εμφανίζεται γραμμή στην περιοχή γραμμής εξέτασης (T). Θα πρέπει να επαναλάβετε την εξέταση χρησιμοποιώντας ένα νέο στικ midstream εξέτασης.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εξέταση περιέχει ένα μάρτυρα για τη διαδικασία. Μια έγχρωμη γραμμή που εμφανίζεται στην περιοχή της γραμμής ελέγχου (C) υποδηλώνει εσωτερικό μάρτυρα για τη διαδικασία. Επιβεβαιώνει τον επαρκή όγκο δείγματος, την επαρκή διαπνοή της μεμβράνης και τη σωστή τεχνική στη διαδικασία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Υπάρχει η πιθανότητα αυτό το στικ midstream εξέτασης να δώσει ψευδή αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν λάβετε οποιαδήποτε ιατρική απόφαση.

1. Φάρμακα που περιέχουν hCG (π.χ., Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) μπορούν να δώσουν ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Το αλκοόλ, τα από του στόματος αντισυλληπτικά, τα παυσίπονα, τα αντιβιοτικά ή οι ορμονικές θεραπείες που δεν περιέχουν hCG δεν θα πρέπει κανονικά να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της εξέτασης.
2. Τα πολύ αραιωμένα δείγματα ούρων, όπως υποδεικνύεται από το χαμηλό ειδικό βάρος, ενδέχεται να μην περιέχουν αντιπροσωπευτικά επίπεδα hCG. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει υποψία εγκυμοσύνης, θα πρέπει να συλλεχθεί δείγμα πρώτων πρωινών ούρων 48 ώρες αργότερα και να υποβληθεί σε εξέταση.
3. Πολύ χαμηλά επίπεδα hCG (κάτω των 50 mIU/mL) υπάρχουν στα δείγματα ούρων σύντομα μετά την εμφύτευση. Ωστόσο, δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός κυήσεων που πρώτου τριμήνου τερματίζεται για φυσικούς λόγους, ένα ασθενώς θετικό αποτέλεσμα εξέτασης είναι πρέπει να επιβεβαιώνεται με επανάληψη της εξέτασης με δείγμα πρώτων πρωινών ούρων που συλλέγεται 48 ώρες αργότερα.
4. Αυτή η εξέταση ενδέχεται να παράγει ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Ορισμένες άλλες καταστάσεις, πέραν της εγκυμοσύνης, όπως η τροφοβλαστική νόσος και ορισμένες μη τροφοβλαστικές νεοπλασίες, όπως όγκοι των όρχεων, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του μαστού και καρκίνος του πνεύμονα, προκαλούν αυξημένα επίπεδα hCG.2,3 Συνεπώς, η παρουσία hCG στα ούρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση εγκυμοσύνης, εκτός εάν έχουν αποκλειστεί οι συγκεκριμένες καταστάσεις.
5. Αυτή η εξέταση ενδέχεται να παράγει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν όταν τα επίπεδα της hCG είναι κάτω από το επίπεδο ευαισθησίας της εξέτασης. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει υποψία εγκυμοσύνης, θα πρέπει να συλλεχθεί δείγμα πρώτων πρωινών ούρων 48 ώρες αργότερα και να υποβληθεί σε εξέταση. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία εγκυμοσύνης και η εξέταση εξακολουθεί να παράγει αρνητικά αποτελέσματα, απευθυνθείτε σε ιατρό για περαιτέρω διάγνωση.
6. Αυτή η εξέταση παρέχει μια πιθανολογούμενη διάγνωση εγκυμοσύνης. Μια επιβεβαιωμένη διάγνωση εγκυμοσύνης θα πρέπει να πραγματοποιείται από ιατρό μόνο μετά την αξιολόγηση όλων των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Πώς λειτουργεί το στικ midstream εξέτασης;

Το τεστ εγκυμοσύνης ταχείας ανίχνευσης ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) με στικ midstream ανιχνεύει μια ορμόνη στα ούρα σας που παράγει ο οργανισμός σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (hCG-ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη). Η ποσότητα της ορμόνης εγκυμοσύνης αυξάνεται καθώς εξελίσσεται η εγκυμοσύνη.

2. Πόσο σύντομα μετά την υποψία ότι είμαι έγκυος μπορώ να κάνω το τεστ;

Μπορείτε να κάνετε το τεστ στα ούρα σας ήδη από την πρώτη ημέρα που δεν θα έχετε περίοδο. Μπορείτε να κάνετε το τεστ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ωστόσο, εάν είστε έγκυος, τα πρώτα πρωινά ούρα περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα ορμόνης εγκυμοσύνης.

3. Πρέπει να κάνω το τεστ με τα πρώτα πρωινά ούρα; Αν και μπορείτε να κάνετε το τεστ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, τα πρώτα πρωινά σας ούρα είναι συνήθως τα πιο συμπυκνωμένα κατά τη διάρκεια και θα περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα hCG.

4. Πόσο ορθό είναι το τεστ;

Διεξήχθη μια κλινική αξιολόγηση για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν με χρήση του τεστ εγκυμοσύνης ταχείας ανίχνευσης ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) με στικ midstream με ένα άλλο εμπορικά διαθέσιμο τεστ hCG ούρων. Η κλινική δοκιμή καταναλωτών περιελάμβανε 608 δείγματα ούρων: αμφότεροι οι προσδιορισμοί κατέδειξαν 231 θετικά και 377 αρνητικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν συνολική ορθότητα > 99% του τεστ εγκυμοσύνης ταχείας ανίχνευσης ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) με στικ midstream, σε σύγκριση με το άλλο τεστ hCG ούρων.

5. Πόσο ευαίσθητο είναι το τεστ;

Το τεστ εγκυμοσύνης ταχείας ανίχνευσης ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) με στικ midstream ανιχνεύει την hCG στα ούρα σε συγκέντρωση 20 mIU/mL ή μεγαλύτερη. Η εξέταση έχει προτυποποιηθεί με βάση το Διεθνές Πρότυπο του ΠΟΥ. Η προσθήκη LH (300 mIU/mL), FSH (1.000 mIU/mL) και TSH (1.000 μIU/mL) σε αρνητικά (0 mIU/mL hCG) και θετικά (20 mIU/mL hCG) δείγματα δεν κατέδειξε διασαυρούμενη αποτελεσματικότητα.

6. Τι θα πρέπει να κάνω εάν το αποτέλεσμα δείχνει ότι είμαι έγκυος;

Αυτό σημαίνει ότι τα ούρα σας περιέχουν hCG και πιθανότητα είστε έγκυος. Επισκεφθείτε τον ιατρό σας για να επιβεβαιώσετε ότι είστε έγκυος και να συζητήσετε τα επόμενα βήματα.

7. Πώς μπορώ να ξέρω ότι το τεστ εκτελέστηκε σωστά;

Η εμφάνιση μιας έγχρωμης γραμμής στην περιοχή της γραμμής ελέγχου (C) σας δείχνει ότι ακολούθησατε σωστά τη διαδικασία της εξέτασης και ότι απορροφήθηκε η κατάλληλη ποσότητα ούρων.

8. Τι θα πρέπει να κάνω εάν το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν είμαι έγκυος;

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ανιχνευθεί hCG στα ούρα σας και πιθανότητα δεν είστε έγκυος. Εάν δεν σας έρθει περίοδος εντός μίας εβδομάδας από την προβλεπόμενη ημερομηνία, επαναλάβετε την εξέταση με νέο στικ midstream εξέτασης. Εάν λάβετε το ίδιο αποτέλεσμα μετά την επανάληψη της εξέτασης και εξακολουθείτε να μην έχετε περίοδο, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ιατρό σας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Steier JA, P Bergsjö, OL Myking Human chorionic gonadotropin in

maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, *Obstet Gynecol.* 1984; 64(3): 391-394

2. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, *Obstet. Gynecol.* 1977; 50(2): 172-181

3. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms", *Ann. Intern Med.* 1973; 78(1): 39-45

ΟΡΟΙ ΕΠΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

Indice dei simboli - Symbol index - Index des symboles - Índice de símbolos- índice de símbolo - Symbolindex - Ευρετήριο συμβόλων - Indeks symboli

	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός PL - Producent
	IT - Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB - Don't use if package is damaged FR - Ne pas utiliser si le colis est endommagé ES - No usar si el paquete está dañado PT - Não use se o pacote estiver danificado DE - Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist GR - Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη PL - Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις) PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi
	IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consultar as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania
	IT - Dispositivo monouso, non riutilizzare GB - Disposable device, do not re-use FR - Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES - Dispositivo monouso, no reutilizable PT - Dispositivo descartável, não reutilizar DE - Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden GR - Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου PL - Jedno urządzenie, nie używaj ponownie
	IT - Limite di temperatura GB - Temperature limit FR - Limite de température ES - Límite de temperatur PT - Limite de temperatura DE - Temperaturgrenzwert GR - Διατηρείται μεταξύ -10 και 49°C PL - Przechowyj pomiędzy i ° C
	IT - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB - Authorized representative in the European community FR - Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES - Representante autorizado en la Comunidad Europea PT - Representante autorizado na União Europeia DE - Autorisierter Vertreter in der EG GR - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση PL - Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως PL - Data ważności
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος PL - Numer katalogowy

	IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer GR - Αριθμός παρτίδας PL - Kod partii SE - Satsnummer RO - Număr de lot HR - Broj serije
	IT - Dispositivo medico-diagnostico in vitro conforme alla direttiva 98/79/CE GB - In vitro diagnostic medical device compliant with Directive 98/79 / EC FR - Dispositif médical de diagnostic in vitro conforme à la directive 98/79/CE ES - Producto sanitario para diagnóstico in vitro conforme con la Directiva 98/79/CE PT - Dispositivo médico de diagnóstico in vitro em conformidade com a Diretiva 98/79 / CE DE - In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/CE GR - Διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν in vitro που συμμορφώνεται με την οδηγία 98/79 /CE PL - Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro zgodny z dyrektywą 98/79 /CE
	IT - Dispositivo medico-diagnostico in vitro GB - In vitro diagnostic medical device FR - Uniquement pour usage diagnostique in vitro ES - Producto sanitario para diagnóstico in vitro PT - Dispositivo médico de diagnóstico in vitro DE - Nur zum Gebrauch für In-vitro-Diagnostika GR - Μόνο για διαγνωστική χρήση σε δοκιμαστικό σωλήν PL - Wyłącznie do diagnostyki in vitro
	IT - Contiene <n> di test GB - Contains sufficient for "n" tests FR - Contiens suffisant pour "n" tests ES - Contiene <n> de test PT - Contém <n> de teste DE - Enthält <n> Tests GR - Περιέχει <n> τέστ PL - Liczba testów w zestawie