


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑΣ

1. Αφαιρέστε τη μίνι πεταλιέρα από τη συσκευασία με προσοχή. Δείτε εικόνα 1.
2. Τοποθετήστε τη μίνι πεταλιέρα στο πάτωμα και έπειτα συνδέστε το βιδωτό κουμπί Α στο επάνω μέρος, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.
3. Περιστρέψτε το βιδωτό κουμπί Α ώστε να σφίξει κατάλληλα ο άξονας Β (προς τα αριστερά σφίγγει, ενώ προς τα αριστερά χαλαρώνει). Ενεργοποιήστε το κουμπί της οθόνης C και περιστρέψτε τον άξονα Β. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως τη συσκευή. Δείτε εικόνα 3. (δείτε τις οδηγίες της οθόνης για λεπτομέρειες.)
4. Τραβήξτε τον περίο Ο προς τα μέσα μετά από τη χρήση και τυλίξτε όπως φαίνεται στην εικόνα 5.
5. Σημείωση:
(1) Ελέγξτε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά τοποθετημένη και ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο προτού τη χρησιμοποιήσετε.
(2) Θυμηθείτε ότι η πίεση πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο επίπεδο στην αρχή της χρήσης και έπειτα μπορείτε να την αυξήσετε στο επιθυμητό επίπεδο.
(3) Προβλεπόμενοι χρήστες: ενήλικες, παιδιά, ηλικιωμένοι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρείτε να σταθείτε όρθιοι επάνω στη μίνι πεταλιέρα, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

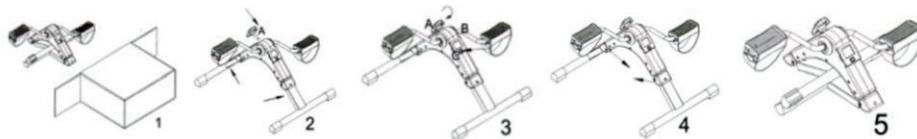

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΙ ΜΕ (ΧΡΟΝΟΣ) -----00: 00-99:59MIN
COUNT (ΜΕΤΡΗΣΗ)-----0-9999
REPS/MIN (ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ)-----0-9999
CALORIE (ΘΕΡΜΙΔΕΣ) -----0-9999KAL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ:

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε και να κλειδώσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία που επιθυμείτε. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 4 δευτερόλεπτα για να γίνει επαναφορά των τιμών όλων των λειτουργιών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

AUTO ON/OFF: The system turns on when any key is depressed or when it sensor an input from the speedsensor. The monitor will be automatically shut off if there is no any signal coming in 4 minutes.


FUNCTION:

TIME (ΧΡΟΝΟΣ) Πατήστε το κουμπί MODE μέχρι η ένδειξη « > » να δείξει το λήμμα TIME. Όταν ο αισθητήρας ταχύτητας εντοπίσει εισερχόμενο σήμα, ξεκινά τη μέτρηση και αυτόματα αθροίζει τον χρόνο άσκησης κατά την έναρξη της άσκησης. **COUNT (ΜΕΤΡΗΣΗ)** Όταν η ένδειξη «>» δείχνει το λήμμα COUNT, ο υπολογιστής εμφανίζει τα βήματα. Όταν ο αισθητήρας ταχύτητας εντοπίσει εισερχόμενο σήμα, ξεκινά η μέτρηση και αυτόματα αθροίζει τον αριθμό των ασκήσεων κατά την έναρξη της γυμναστικής. **REPS/MIN (ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ)** Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι η ένδειξη « > » να δείξει το λήμμα REPS/MIN. Όταν ο αισθητήρας ταχύτητας εντοπίσει εισερχόμενο σήμα, ξεκινά τη μέτρηση και αυτόματα αθροίζει τον αριθμό των ασκήσεων κατά την έναρξη της γυμναστικής. **CALORIE (ΘΕΡΜΙΔΕΣ)** Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι η ένδειξη « > » να δείξει το λήμμα CAL. Όταν ο αισθητήρας ταχύτητας λάβει εισερχόμενο σήμα, αρχίζει τη μέτρηση και αυτόματα αθροίζει τις θερμίδες κατά την έναρξη της γυμναστικής. **SCAN** Όταν η ένδειξη «>» δείχνει το λήμμα SCAN, ο υπολογιστής εμφανίζει αυτόματα τις ακόλουθες λειτουργίες με τη σειρά που αναφέρονται: TIME (ΧΡΟΝΟΣ) -----COUNT (ΜΕΤΡΗΣΗ) -----STRIDES (ΒΗΜΑΤΑ) -----CALORIES (ΘΕΡΜΙΔΕΣ)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Προδιαγραφές Μπαταρίας: 1.5V, LR44 (1 τμχ) - 2. Αν η οθόνη δεν ανάβει σωστά, επανατοποθετήστε τις μπαταρίες. - 3. Διαδικασία τοποθέτησης μπαταριών:

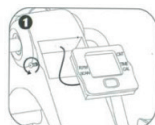


Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες σε κάθε πλευρά της μονάδας οθόνης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε προσεκτικά τη μονάδα οθόνης από την υποδοχή της.

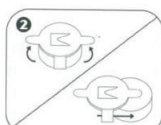

Στο πίσω μέρος της μονάδας οθόνης, σφίξτε τις βιελτιές της μπαταρίας και σιύρετε προς τα έξω την μπαταρία.

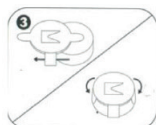

Τοποθετήστε μια καινούργια μπαταρία 1.5V AG13, με τον θετικό πόλο προς τα κάτω και κλείστε τις βιελτιές.

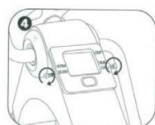

Επανατοποθετήστε τη μονάδα οθόνης στην υποδοχή της και ασφαλίστε την με τη βίδα υποδοχής της.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151