

LACCIO EMOSTATICO JETPULL

JETPULL TOURNIQUET

GARROT JETPULL

TORNIQUETE JETPULL

VENENSTAUER JETPULL

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

- ⚠ Only the **REF** number 25723 is latex free, **REF** 25722 and 25724 contain latex; for further information, contact the manufacturer HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH
- ⚠ Solo **REF** 25723 è privo di lattice, **REF** 25722 e 25724 contengono lattice; per ulteriori informazioni, contattare il fabbricante HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH
- ⚠ Seule la **REF** 25723 est sans latex, les **REF** 25722 et 25724 contiennent du latex; pour plus d'informations, contactez le fabricant HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH
- ⚠ Solo el **REF** 25723 está libre de látex, las **REF** 25722 y 25724 contienen látex; para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH
- ⚠ Nur die **REF** 25723 ist latexfrei, **REF** 25722 und 25724 enthalten Latex; für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH



HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH

In den Faltern 13 - 65232 Taunusstein

Made in Germany

info@holtscche-med.com

www.holtscche-med.com



25722 - 25723 - 25724



Gima S.p.A.


Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

GIMA 25722 - 25723 - 25724




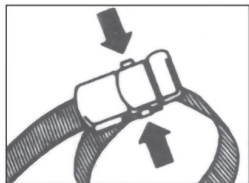


IT Aprire
GB Open
FR Ouvrir
ES Abrir
DE Öffnen



IT Chiudere
GB Close
FR Fermer
ES Cerrar
DE Anlegen

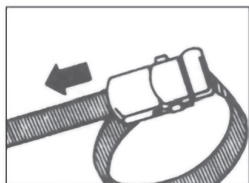

IT Stringere
GB Tighten
FR Tirer
ES Apretar
DE Festziehen

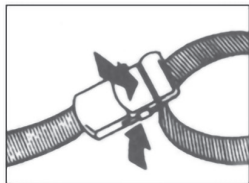

IT Rilasciare lentamente
GB Slow release
FR Desserrer légèrement
ES Lenta liberación
DE Langsam lösen/

ITALIANO

Questo prodotto ha un sistema di apertura di sicurezza in due tempi:

1. Rilasciare la tensione della cinghia premendo il pulsante striato.
2. Premere i due bottoni laterali.

Il sistema di bloccaggio si aprirà automaticamente. Jetpull® può essere lavato in lavatrice fino a 90°C o trattato con disinfettanti appropriati senza alcool.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

ENGLISH

This device has a two-step special security opening mechanism:

1. Release by pushing down the ribbed key.
2. Then simply press the lateral push buttons.

The closure will automatically open.

Our Tourniquets can be machine washed up to 90°C or treated with appropriate non-alcoholic disinfectants.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

FRANÇAIS

Ce dispositif comporte un mécanisme de sécurité en deux étapes:

1. Dégager le garrot en tirant la clé striée vers le bas.
2. Presser les boutons latéraux de poussoir.

La fermeture s'ouvre automatiquement.

Notre garrot peut être lavé en machine jusqu'à 90°C ou peut être traité avec des désinfectants appropriés sans alcool.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

ESPAÑOL

Este dispositivo tiene un mecanismo de apertura de seguridad especial de dos pasos:

1. Liberar empujando hacia abajo la llave acanalada.
2. A continuación, basta con pulsar los botones laterales.

El cierre se abrirá automáticamente. Nuestros torniquetes pueden lavarse a máquina hasta 90°C o tratarse con desinfectantes adecuados sin alcohol.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

DEUTSCH

Der Venenstauer hat einen speziellen 2-Schritt-Sicherheitsverschluss:

1. Lösen der Spannung des Bandes durch das Herunterdrücken der geriffelten Taste.
2. Zusammendrücken der beiden seitlich gegenüberliegenden Druckknöpfe.

Der Verschluss öffnet automatisch.

Unsere Venenstauer sind bei 90°C waschbar oder mit geeigneten nicht alkoholischen Desinfektionslösungen zu behandeln.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

REF	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto DE Erzeugniscode
LOT	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote DE Chargennummer
	IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante DE Hersteller
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación DE Herstellungsdatum
	IT Distributore GB Distributor FR Distributeur ES Distribuidor DE Verteiler
CE	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745
MD	IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario DE Medizinprodukt
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso DE Gebrauchsanweisung beachten
UDI	IT Identificatore univoco del dispositivo GB Unique device identifier FR Identifiant unique de l'appareil ES Identificador de dispositivo único DE Eindeutige Kennung des Geräts