



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA SIRIO con altimetro - 150 KG

SIRIO SCALE with height meter - 150 KG

Modello/Model:ZT-150A (GIMA 27305)

Fabbricante/Manufacturer/

Wuxi Weigher Factory Co., Ltd.

Majiaqiao, Guangfeng, Guangyi – 214011 Wuxi, Jiangsu

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA - scale8@aliyun.com

Made in China

Importato da/Imported by/

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) – Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



SPECIFICHE

Tipo	ZT-150A
Portata Max.	150 kg
Divisione	0.5 kg
Altimetro	85-210 cm
Divisione Altimetro	0.1 cm
Dimensioni Base	370 x 270 mm (LXW)
Dimensioni Complessive	680 x 275 x 1080 mm (LXW XH)
Peso	13 kg

INSTALLAZIONE

APERTURA: Ricordare sempre che il materiale di imballaggio (carta, cellophane, punti, nastro adesivo, ecc.) può tagliare e/o ferire se non viene maneggiato con cura. È necessario rimuoverlo con mezzi adeguati e avere cura di tenerlo fuori dalla portata di persone non responsabili; lo stesso vale per gli strumenti utilizzati per rimuovere gli imballaggi (forbici, coltelli, ecc.).

Collegare la testa di pesatura con i tre dadi M6 e le rondelle $\varnothing 6$. (Fig. 1)

Agganciare la lama della testa di leva con la calotta di carico. (Fig. 2)

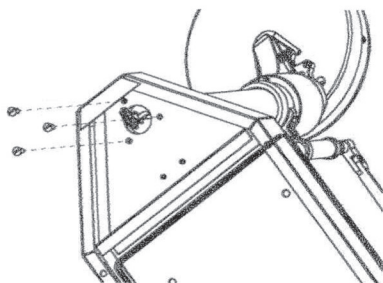


Fig. 1

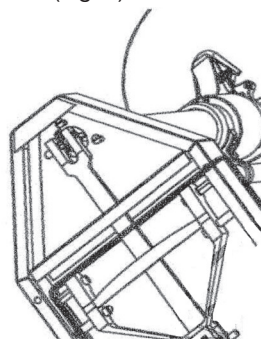


Fig. 2

FUNZIONAMENTO

La bilancia deve essere controllata periodicamente, in particolare quando viene spostata, seguendo le istruzioni riportate di seguito:

- Accertarsi che la bilancia si trovi su una superficie rigida e piana. Salire e scendere dalla bilancia alcune volte per allineare tutte le parti interne.
- Regolazione dello zero

L'indicatore deve puntare sulla posizione "0". In caso di deviazione, regolare l'indicatore ruotando la vite sotto il quadrante (Fig. 3).



Fig. 3

OPERAZIONI DI PESATURA

Questa bilancia è ben costruita, con grande precisione e alta sensibilità. Il suo impianto di carico è costituito da un meccanismo a leva, da lame e cuscinetti e da una piattaforma che garantisce stabilità, precisione e durata. La piattaforma è ricoperta da un foglio di plastica per evitare lo scivolamento e per proteggere il meccanismo interno da urti. Il quadrante auto indicante è dotato di un indicatore di facile lettura, che mostra il peso preciso sia nel sistema metrico che in quello britannico grazie a un indicatore collegato al meccanismo a leva per mezzo di ingranaggi e di una molla a spirale.

OPERAZIONI DI MISURAZIONE DELL'ALTEZZA

Misurare dimensioni superiori a 850 mm (2' 9 1/2") e inferiori a 1408 mm (4'77/16)

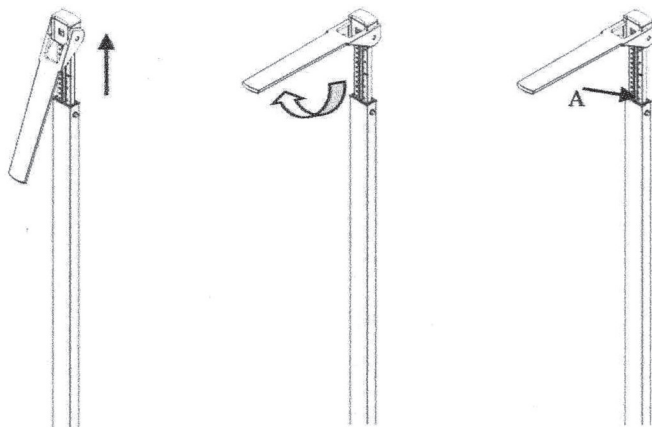


Fig. 4

1. Estrarre l'asta interna
2. Posizionare la base in posizione orizzontale.
3. Il risultato della misurazione può essere letto su (A)

Misurare dimensioni superiori a 1408 mm (4'77/16"):

4. Estrarre l'asta interna e l'asta centrale, il risultato della misurazione può essere letto in (B).

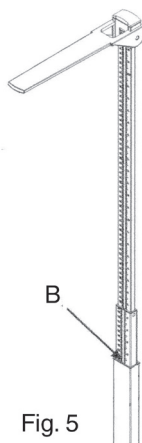


Fig. 5

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

SPECIFICATIONS

Type	ZT-150A
Max.	150 kg
Division	0.5 kg
Height Measuring Division	85-210 cm
Height Measuring Division	0.1 cm
Plate Dimensions	370 x 270 mm (LXW)
Overall Dimensions	680 x 275 x 1080 mm (LXW XH)
Net Weight	13 kg

INSTALLATION

UNPACKING: Always remember that packing elements (paper, cellophane, stitches, adhesive tape, etc.) can cut and/or hurt if they are not carefully handled. They shall be removed with adequate means and shall not be left at the mercy of irresponsible persons; the same is valid for tools used to remove packages (scissors, knives, etc.)

- To link the weighing head with the three M6 nuts and 06 washers. (Fig.1)
- To clasp the knife of the lever head with the load-carrying hood. (Fig.2)

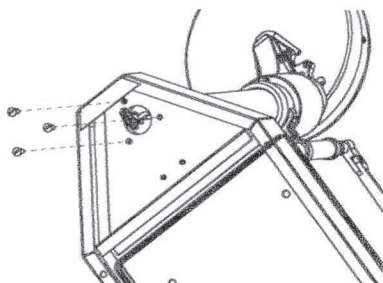


Fig. 1

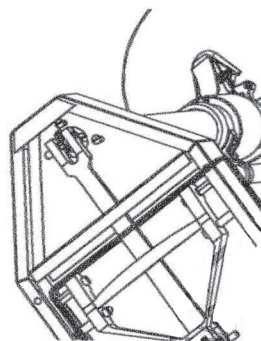


Fig. 2

OPERATION

The scale should be checked periodically, particularly when moved, by following the instructions below:

- Make certain scale is on a hard, level surface. Step on and off scale a few times in order to align all internal parts.

Zero Adjustment

The indicator should point at the "0" position. If there is any deviation, adjust the indicator by turning the screw under the dial (Fig.3)



Fig. 3

WEIGHING OPERATION

This weighing machine is well constructed with great precision and high sensitivity. Its load-carrying installation consists of lever mechanism, knife edges and bearings, and platform, giving stability, accuracy and durability. This platform is covered with plastic sheet to prevent slipping and to offer shockproof to the internal mechanism. A self indicating dial is equipped for easy reading, showing accurate weight both in Metric and in British systems by an indicator which is connected with the lever mechanism by means for gears and coiled spring.

MEASURING HEIGHT OPERATION

Measuring over 850 mm (2' 9 1/2") and under 1408mm (4'77/16).

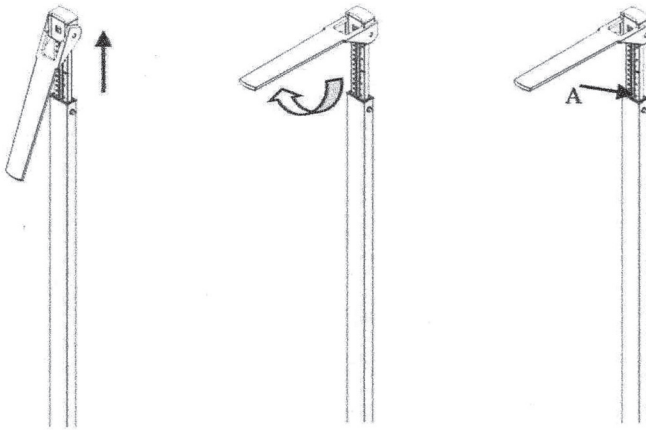


Fig. 4

1. Pull out inner rod
2. Position the plate to a horizontal position.

3. Measured result can be read at (A)

Measuring over 1408mm (4'77/16"):

4. Pull out inner rod and middle rod,
Measured result can be read at (B).



Fig. 5

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.