

BENUTZERHANDBUCH

MNPG373-04 Ausgabe 30/06/2023

TAP2000

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Erklärung

Der **TAP2000** ist ein 6-Magnetspulen-Applikator für die Niederfrequenz-Magnettherapie. Er dient zur Behandlung des Wirbelsäulenbereichs durch Auflegen auf die Rückenlehne eines Stuhls oder Sessels.

Das Produkt wird gemäß Regel 1 (4.1) in Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte der Klasse I zugeordnet.

Basis-UDI-DI: 8019781PEMFLFTAPQS

UDI-DI: 08019781472090

Technische Informationen

Technische Merkmale:

- Abmessungen des Applikators: 40x40cm;
- 6 Magnetspulen;
- 2 Anschlusskabel;
- Kompatibel mit den Modellen MAG2000 und LaMagneto.





Kennzeichnung

Etikett 1
(Auf der Rückseite des Geräts)

Etikett 1



Kabel-Etikett

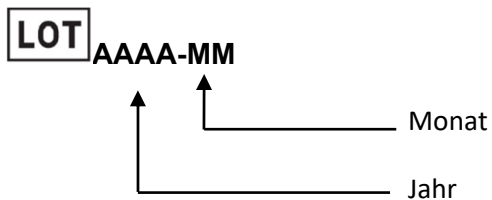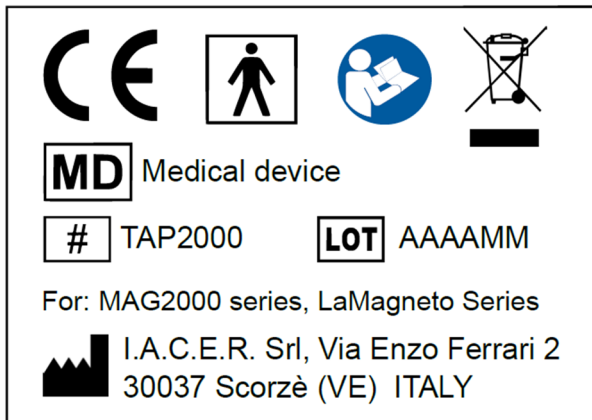

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Logo des Herstellers.
	Im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 2017/745
	Hersteller-Daten
	Chargennummer (AAAA-MM)

Symbol	Bedeutung
	Medizinprodukt
	Modell
	Befolgen Sie die Bedienungsanleitung
	WEEE-Richtlinie für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
	Anwendungsteil Typ BF
	Zulässige Lagerungstemperaturen (auf Verpackung)
	Relative Feuchtigkeit Lagerung (auf Verpackung)

Transport und Lagern

Beim Transport ist keine besondere Vorsicht geboten. Bei der Lagerung ist das Gerät bis zu den folgenden Umgebungsbedingungen geschützt:

Umgebungstemperatur +5 bis 40 °C

Relative Feuchtigkeit 15 bis 93 %

Verwendungsweise

Gebrauchsanweisung für TAP2000

Befolgen Sie die Anweisungen in der Ihrem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung.

Schließen Sie die Matte an die beiden Kanäle des Geräts an.

Beachten Sie die Warnhinweise in den Bedienungsanleitungen für MAG2000 oder LaMagneto-Produkte.

Reinigung des TAP2000

Für die Reinigung des F3S2000 und TAP2000 wird empfohlen, den 6-Magnetspulen-Applikator zuvor vom Gerät zu trennen. Reinigen Sie den Stoff mit einem mit milder Seife und Wasser angefeuchteten Tuch und warten Sie, bis er vollständig getrocknet ist, bevor Sie den 6-Magnetspulen-Applikator erneut für eine Therapiesitzung verwenden.

Informationen zur Entsorgung

Das Produkt unterliegt den WEEE-Bestimmungen (Symbol  auf dem Etikett) in Bezug auf Mülltrennung: Bitte entsorgen Sie das Produkt bei speziellen Sammelstellen für elektronisches Material, indem Sie sich an die zuständigen Behörden in Ihrem Land oder direkt an den Hersteller wenden.

Wartung und Kundendienst

Das Gerät erfordert keine besondere Routinewartung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um die Funktionsfähigkeit des Geräts alle zwei Jahre überprüfen zu lassen. Der Hersteller ist der einzige Anbieter von technischem Support für den Applikator TAP2000. Für technischen Support wenden Sie sich bitte an

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. +39 041 5401356 • Fax +39 041 5402684

Garantie

Für den TAP2000 gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt bei Manipulationen, mangelnder Sorgfalt oder unsachgemäßem Gebrauch des Applikators sowie bei Eingriffen am Applikator durch nicht vom Hersteller oder Vertragshändler autorisiertes Personal.

Schadensbericht

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 weist der Hersteller den Benutzer auf die Notwendigkeit hin, jeden schweren Unfall im Zusammenhang mit dem Gerät zu melden.

Der Bericht muss adressiert werden:

- an den Gerätehersteller:

I.A.C.E.R. SrlVia Enzo Ferrari 2 – 30037
Scorzè (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684
e-mail: iacer@iacer.it



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N

USER MANUAL

MNPG370-04 Edition 30/06/2023

TAP2000

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introduction

The **TAP2000** device is a 6 solenoid applicator for low-frequency magnetotherapy.
Designed to treat the spinal area by placing it on the back of a chair or armchair.

The device is classified as class I, in accordance with rule 1 (4.1) referred to in Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council, dated 5 April 2017, relating to medical devices.

Basic UDI-DI: 8019781PEMFLFTAPQS

UDI-DI: 08019781472090

Technical data

Technical specifications:

- *Applicator size: 40x40cm;*
- *6 solenoids;*
- *2 connection cables;*
- *Compatible with MAG2000 and LaMagneto models.*





Labelling

Label 1
(on the back of the device)

Label 1



Cable label

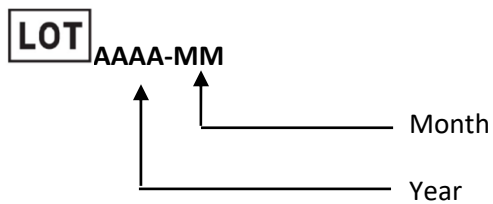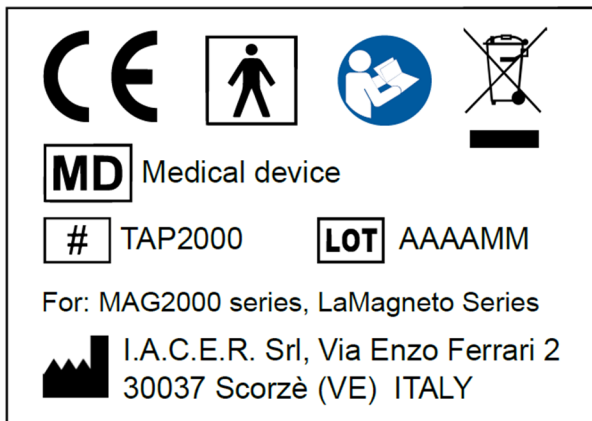

Symbols:

Symbol	Meaning
I-TECH MEDICAL DIVISION	Manufacturer's logo.
CE	In compliance with regulation (EU) no. 2017/745
	Manufacturer data.
LOT	Batch number
MD	Medical device

Symbol	Meaning
	Model
	Follow the instructions for use.
	WEEE directive for the disposal of electronic waste.
	Type BF applied part.
	Allowed temperatures (storage temperatures, on packaging).
	Relative humidity (relative humidity of storage, on packaging).

Transport and storage

There are no special care instructions for transport. For storage, the equipment is protected up to the following environmental conditions:

room temperature from +5 to + 40°C

relative humidity from 15 to 93%

Instructions for use

Instructions for using TAP2000

Follow the instructions in the User Manual supplied with the device in your possession. Connect the mat to the two channels of the device.

Follow the Instructions given in the user manuals of MAG2000 and LaMagneto products.

Cleaning the TAP2000

To clean the TAP2000 it is recommended to disconnect the 6 solenoid applicator from the device before carrying out any operation. Clean the fabric with a cloth moistened with simple water and neutral soap and wait for it to dry completely before reusing the three solenoid applicator for a therapy session.

Information for disposal



The product is subject to the WEEE legislation (presence on the label of the symbol) relating to separate waste collection: to dispose of the product, use special areas equipped for the collection of electronic material by contacting the competent authorities of your country or the manufacturer directly.

Maintenance and Support

The device does not require any particular routine maintenance. Please contact the manufacturer to provide for a check of the functionality of the device, every two years.

The manufacturer is the sole entity authorized to provide technical support for the TAP2000 applicator.

Should you need technical support, please contact:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 scorzè (VE)

Ph. 041.5401356 • Fax 041.5402684

Warranty

TAP2000 is covered by a 2-year warranty starting from the date of purchase. The warranty shall lapse in case of tampering, neglect and inappropriate use of the applicator and in case of any intervention carried out by personnel who is not authorized by the manufacturer or by the authorized dealer.

Incident reporting

In compliance with the provisions of Regulation (EU) 2017/745, the manufacturer places the need to report any serious accident in relation to the device to the attention of the user.

The report must be addressed:

- *to the device manufacturer:*

I.A.C.E.R. Srl

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: iacer@iacer.it



*All rights reserved. TAP2000 and the logo **I-TECH MEDICAL DIVISION** are the exclusive property of I.A.C.E.R. Srl and are registered trademarks*



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N

MANUAL DE USO

MNPG371-04 Edición 30/06/2023

TAP2000

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introducción

El dispositivo **TAP2000** es un aplicador con 6 solenoides para magnetoterapia de baja frecuencia.

Diseñado para tratar la zona de la columna vertebral colocándolo en el respaldo de una silla o sillón.

El dispositivo está clasificado como clase I, de acuerdo con la regla 1 (4.1) prevista en el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios.

UDI-DI básico: 8019781PEMFLFTAPQS

UDI-DI: 08019781472090

Información técnica

Características técnicas:

- Tamaño del aplicador: 40x40cm;
- 6 solenoides;
- 2 cables de conexión;
- Compatible con los modelos MAG2000 y LaMagneto.





Etiquetado

Etiqueta 1
(detrás del dispositivo)

Etiqueta 1



Etiqueta cable

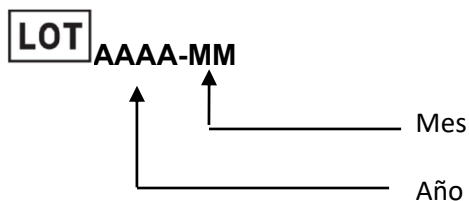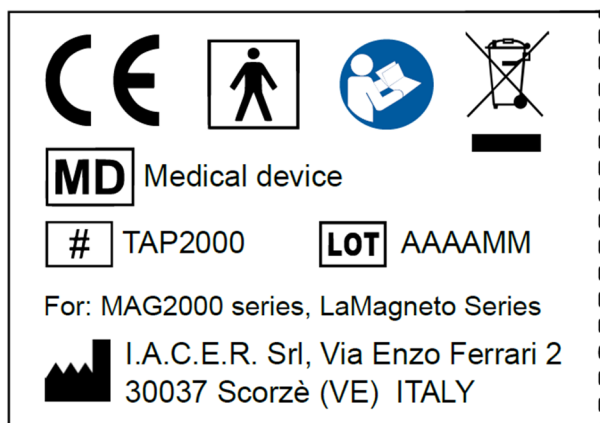

Símbolos:

Símbolo	Significado
	Logotipo del fabricante
	De acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2017/745
	Datos del Fabricante
	Numero de lote (AAAA-MM)
	Producto sanitario

Símbolo	Significado
	Modelo
	Siga las instrucciones de uso
	Directiva RAEE para la eliminación de residuos electrónicos
	Parte aplicada tipo BF
	Temperaturas permitidas (temperaturas de almacenamiento, en el embalaje)
	Humedad relativa (humedad relativa de almacenamiento, en embalaje)

Transporte y almacenamiento

No se requieren cuidados particulares durante el transporte. En cuanto al almacenamiento, el equipo está protegido hasta las siguientes condiciones ambientales:

temperatura ambiente de +5 a + 40 °C

humedad relativa del 15 al 93%

Modo de empleo

Instrucciones de uso de TAP2000

Siga las instrucciones del Manual de Uso que acompaña al dispositivo. Conecte la almohadilla a los dos canales del dispositivo.

Siga las advertencias expuestas en los manuales de uso de los productos MAG2000 o LaMagneto.

Limpieza de TAP2000

Para la limpieza de TAP2000 se recomienda desconectar el aplicador con 6 solenoides del dispositivo antes de realizar cualquier operación. Limpie la tela con un paño humedecido simplemente con agua y jabón neutro y espere que se seque por completo antes de volver a utilizar el aplicador con tres solenoides para una sesión terapéutica.

Información para la eliminación

El producto está sujeto a la normativa RAEE (presente en la etiqueta con el símbolo ) sobre recogida selectiva: para desechar el producto, use áreas especiales equipadas para la recogida de material electrónico contactando con las autoridades competentes de su país o directamente con el fabricante.

Mantenimiento y asistencia

El dispositivo no requiere ningún mantenimiento ordinario particular. Póngase en contacto con el fabricante para que se compruebe la funcionalidad del dispositivo cada dos años.

El fabricante es el agente exclusivo para intervenciones de asistencia técnica en el aplicador TAP2000. Para cualquier intervención de asistencia técnica, comuníquese con:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. +39 041.5401356 • Fax +39 041.5402684

Garantía

TAP2000 está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía queda anulada en caso de manipulación, falta de cuidado y uso inadecuado del aplicador, y en caso de intervención en el mismo por parte de personal no autorizado por el fabricante o por el distribuidor autorizado.

Notificación de incidentes

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/745, el fabricante señalará al usuario la necesidad de notificar cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto.

- La notificación deberá dirigirse al fabricante del producto:

I.A.C.E.R. Srl

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: iacer@iacer.it



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N

NOTICE D'UTILISATION

MNPG372-04 Édition 30/06/2023

TAP2000

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introduction

L'appareil **TAP2000** est un applicateur à 6 solénoïdes pour la magnétothérapie à basse fréquence.

Placé sur le dossier d'une chaise ou d'un fauteuil, il est conçu pour traiter la colonne vertébrale.

Le dispositif est classé dans la classe I, conformément à la règle 1 (4.1) visée à l'annexe VIII du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.

UDI-DI de base : 8019781PEMFLFTAPQS

UDI-DI : 08019781472090

Informations techniques

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de l'applicateur : 40x40cm ;
- 6 solénoïdes ;
- 2 câbles ;
- Compatible avec les modèles MAG2000 et LaMagneto.





Étiquette

Étiquette 1
(derrière l'appareil)

Étiquette 1



Étiquette câble

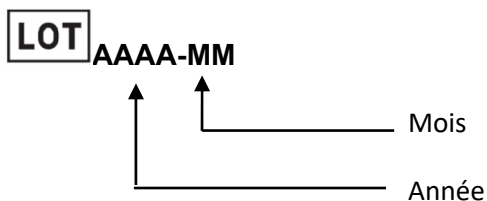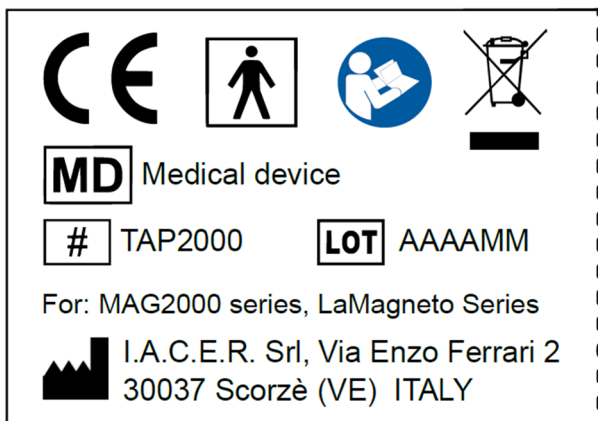

Symboles :

Symbole	Signification
	Logo du fabricant.
	Conforme au règlement (UE) n° 2017/745
	Données du fabricant
	Numéro de lot (AAAAMM)
	Dispositif médical

Symbole	Signification
	Modèle
	Suivre le mode d'emploi
	Directive DEEE pour l'élimination des déchets électroniques
	Partie appliquée type BF
	Températures admises (température de stockage, sur confection)
	Humidité relative (humidité relative de stockage, sur confection)

Transport et stockage

Aucune mesure particulière n'est à prendre pendant le transport. En ce qui concerne le stockage, l'appareil est protégé jusqu'aux conditions environnementales suivantes :

température ambiante de +5 à + 40 °C

humidité relative de 15 à 93 %

Modalités d'utilisation

Mode d'emploi de TAP2000

Respectez les consignes de la notice d'utilisation fournie avec votre appareil. Branchez le tapis aux deux canaux du dispositif.

Respectez les avertissements donnés dans les notices d'utilisation des produits MAG2000 ou LaMagneto.

Nettoyage de TAP2000

Pour le nettoyage de TAP2000, il est recommandé de débrancher l'applicateur à 6 solénoïdes du dispositif avant d'effectuer toute opération. Nettoyez le tissu avec un chiffon imbibé d'eau simple et de savon neutre et attendez qu'il sèche complètement avant de réutiliser l'applicateur à trois solénoïdes pour une séance thérapeutique.

Informations pour l'élimination

Le produit est soumis à la norme DEEE (présence sur l'étiquette du symbole ) en matière de tri sélectif : pour l'élimination du produit, utiliser les lieux équipés pour la collecte de matériel électronique en contactant les autorités compétentes locales ou directement le fabricant.

Maintenance et assistance

Aucun entretien particulier n'est requis. Contactez le fabricant pour la vérification biannuelle du fonctionnement du dispositif.

Le fabricant a l'exclusivité concernant les interventions d'assistance technique sur l'applicateur TAP2000. Pour toute intervention d'assistance technique, s'adresser à :

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tél. +39 041.5401356 • Fax +39 041.5402684

Garantie

TAP2000 est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie est nulle en cas d'altération, de négligence et d'utilisation inappropriée de l'applicateur et en cas d'intervention sur celui-ci par du personnel non autorisé par le fabricant ou le revendeur agréé.

Notification des incidents

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2017/745, le fabricant attire l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de signaler tout incident grave survenu en relation avec le dispositif. Cette notification doit être adressée au fabricant du dispositif :

I.A.C.E.R. Srl

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: iacer@iacer.it



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N

MANUALE DI UTILIZZO

MNPG355-05 Edizione 30/06/2023

TAP2000

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introduzione

Il dispositivo **TAP2000** è un applicatore a 6 solenoidi per magnetoterapia a bassa frequenza. Progettato per trattare la zona della colonna vertebrale appoggiandolo sullo schienale di una sedia o poltrona.

Il dispositivo è classificato classe I, conformemente alla regola 1 (4.1) di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/745 del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici.

UDI-DI di base: 8019781PEMFLFTAPQS

UDI-DI: 08019781472090

Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione applicatore: 40x40cm;
- 6 solenoidi;
- 2 cavi di collegamento;
- Compatibile con i modelli MAG2000 e LaMagneto.




Etichettatura

Etichetta 1
(dietro il dispositivo)


Etichetta 1



Etichetta cavo

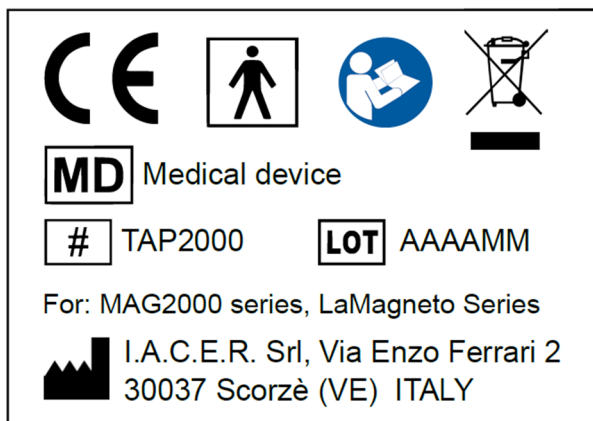

LOT AAAA-MM

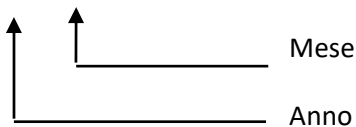

Simboli:

Simbolo	Significato
I-TECH MEDICAL DIVISION	Logo del fabbricante
CE	In conformità al regolamento (UE) n. 2017/745
	Dati Fabbricante
LOT	Numero di lotto (AAAAMM)
MD	Dispositivo medico

Simbolo	Significato
	Modello
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Direttiva RAEE per lo smaltimento dei rifiuti elettronici
	Parte applicata tipo BF
	Temperature ammesse (temperature di stoccaggio, su confezione)
	Umidità relativa (umidità relativa di stoccaggio, su confezione)

Trasporto e immagazzinamento

Non vi sono particolari cure da usare durante il trasporto. Per quanto riguarda l'immagazzinamento, l'apparecchiatura è protetta fino alle seguenti condizioni ambientali:

temperatura ambiente da +5 a + 40 °C

umidità relativa dal 15 al 93%

Modalità d'uso

Istruzioni per l'uso di TAP2000

Seguire quanto riportato nel Manuale d'Uso in corredo al dispositivo in possesso. Collegare il tappetino ai due canali del dispositivo.

Seguire le Avvertenze riportate nei manuali d'uso dei prodotti MAG2000 o LaMagneto.

Cura di TAP2000

Pulizia di TAP2000

Per la pulizia di TAP2000 si raccomanda di scollegare l'applicatore a 6 solenoidi dal dispositivo prima di compiere qualsiasi operazione. Procedere alla pulizia del tessuto con un panno inumidito con semplice acqua e sapone neutro ed attendere la completa asciugatura prima di riutilizzare l'applicatore a tre solenoidi per una seduta terapeutica.

Informazioni per lo smaltimento



Il prodotto è soggetto alla normativa RAEE (presenza sull'etichetta del simbolo ) relativa alla raccolta differenziata: per lo smaltimento del prodotto, usare apposite aree attrezzate alla raccolta di materiale elettronico contattando le competenti autorità del proprio Paese o direttamente il fabbricante.

Manutenzione e Assistenza

Il dispositivo non prevede alcuna particolare manutenzione ordinaria. Si prega di contattare il fabbricante in modo che ogni due anni venga verificata la funzionalità del dispositivo.

Il fabbricante è il solo esclusivista per interventi di assistenza tecnica sull'applicatore TAP2000. Per qualsiasi intervento di assistenza tecnica rivolgersi a:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

Garanzia

TAP2000 è coperto da garanzia di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia decade in caso di manomissione, incuria ed uso inappropriato dell'applicatore ed in caso d'intervento sullo stesso da parte di personale non autorizzato dal costruttore o dal rivenditore autorizzato.

Segnalazione di incidenti

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/745, il fabbricante pone all'attenzione dell'utilizzatore la necessità di segnalare qualsiasi grave incidente verificatosi in relazione al dispositivo.

La segnalazione dovrà essere indirizzata:

- *al fabbricante del dispositivo:*

I.A.C.E.R. Srl

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY
Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684
e-mail: iacer@iacer.it

Tutti i diritti sono riservati. TAP2000 ed il logo  sono di esclusiva proprietà di I.A.C.E.R. Srl e sono registrati



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N