


Read the full package insert carefully before testing.

Before Testing
Do not place anything in the mouth including food, drink, gum or tobacco products for at least 10 minutes prior to collection.
Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds before and after test. If soap and water are not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol.

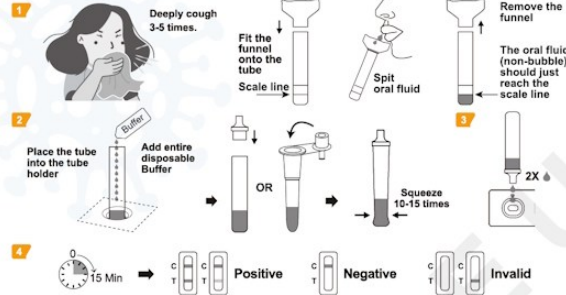

COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)

144131004



CE 1434 [IVD]

For Self-testing | REF: ICOV-802H



COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)

COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)

EN COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) For Self-testing

- Contents:
- Test Device -1
 - Collection Device -1
 - Buffer -1
 - Package Insert -1
 - Biosafety Bag -1

ES Prueba Rápida del Antígeno de COVID-19 (Fluido Oral) Para Autodiagnóstico

- Contenido:
- Dispositivo de Prueba -1
 - Dispositivo de Recogida -1
 - Buffer -1
 - Instrucciones de Uso -1
 - Bolsa de Biosseguridad -1

SV Covid-19 antigensnabbtest (saliv) För självtest

- Innehåll:
- Testkasset -1
 - Insamlingsenhet -1
 - Buffer -1
 - Bäckpackedel -1
 - Biosäkerhetspåse -1

FR COVID-19 Test Rapide de l'Antigène (Liquide Buccal) Pour l'Autodiagnostic

- Contenu:
- Dispositif de test -1
 - Dispositif de prélèvement -1
 - Tampon -1
 - Notice d'emballage -1
 - Sac de biosécurité -1

PT Teste Rápido de Antígeno de COVID-19 (Fluido Oral) Para Autodiagnóstico

- Conteúdo:
- Dispositivo de teste -1
 - Dispositivo de coleta -1
 - Tampão -1
 - Instruções de Uso -1
 - Bolsa de Biossegurança -1

DA COVID-19 antigen-hurtigttest (spyttest) Til selvtest

- Indhold:
- Testenhed -1
 - Indsamlingsenhed -1
 - Buffer -1
 - Indlægsbesked -1
 - Pose til farligt affald -1

DE COVID-19 Antigen-Schnelltest (Speichel) Test zur Eigenanwendung

- Inhalt:
- Testgerät -1
 - Probeneintragsgerät -1
 - Puffer -1
 - Packungsbeilage -1
 - Biologischer Sicherheitsbeutel -1

EL Τον γρήγορο ενέλεγχος του ανιχνεύει COVID-19 (Γραμμική πύση) (το ανθρώπινο)

- Περιεχόμενα:
- Συσκευή test -1
 - Συσκευή συλλογής -1
 - Πολυμερές βύσμα -1
 - Ένθετο συσκευασίας -1
 - Τάμφο βιοασφάλειας -1

FI COVID-19-pika-antigenitesti (syylätesti) Käyttöä varten

- Sisältää:
- Testikasetti -1
 - Näytteenkeräysvälineet -1
 - Puskuri -1
 - Pakkausohje -1
 - Bioturvallinen pussi -1

IT Test Rapido per l'antigene COVID-19 (Fluido orale) Per auto-test

- Contenuti:
- Dispositivo per il test -1
 - Dispositivo per la raccolta del campione -1
 - Soluzione tampone -1
 - Foglietto illustrativo -1
 - Sacchetto di bio-sicurezza -1

NL COVID-19 Antigen Sneltest (Speeksel) Voor zelftesten

- Inhoud:
- Test apparaat -1
 - Verzamel apparaat -1
 - Buffer -1
 - Verpakkingsinzet -1
 - Bioveiligheidszak -1

NO COVID-19 antigen hurtigtest (Oralsvæske) For selvtesting

- Innhold:
- Testenhet -1
 - Oppsamlingsenhet -1
 - Buffer -1
 - Pakningsvedlegg -1
 - Biopose -1

1 Test

EC REP

MedNet GmbH
Borkstrasse 10 48163 Muenster Germany



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550 Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



Do not drink the buffer in the kit. Carefully handle the buffer and avoid it contacting skin or eyes, rinse with plenty of running water immediately if contacting.

CE 1434 [IVD]



SCATOLA
BOX



BUSTINA
POUCH



ISTRUZIONI
PER L'USO
USER INSTRUCTIONS



Gima S.p.A.


Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MADE IN CHINA

Read the full package insert carefully before testing.

Before Testing

Do not place anything in the mouth including food, drink, gum or tobacco products for at least 10 minutes prior to collection.
Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds before and after test. If soap and water are not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol.

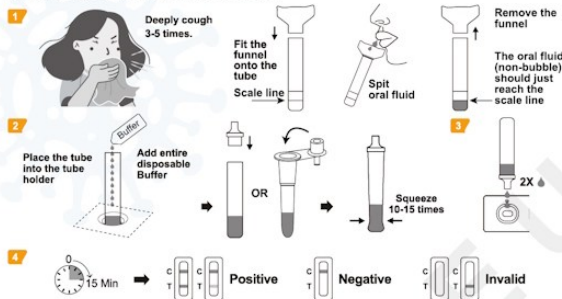

Tube holder




MADE IN CHINA



**COVID-19 Antigen
Rapid Test (Oral Fluid)**

144131004

Φ10.5mm

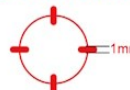

CE 1434

IVD

For Self-testing | REF: ICQV-802H

ALL TEST

COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)

COVID-19 Antigen
Rapid Test (Oral Fluid)

EN COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)

For Self-testing
Contenuto:
• Test Device -1
• Collection Device -1
• Buffer -1
• Package Insert -1
• Biosafety Bag -1

ES Prueba Rápida de Antígeno de COVID-19 (Fluido Oral)

Para Autodiagnóstico
Contenido:
• Dispositivo de Prueba -1
• Dispositivo de Recogida -1
• Buffer -1
• Instrucciones de Uso -1
• Bolsa de Bioseguridad -1

SV Covid-19-antigeninabtest (saliv)

For självtest
Innehåll:
• Testenhet -1
• Insamlingsenhet -1
• Buffer -1
• Bruksanvisning -1
• Biotäthetspåse -1

FR COVID-19 Test Rapide de (Antigène Liquide Buccal)

Pour l'autodiagnostic
Contenu:
• Dispositif de test -1
• Dispositif de prélèvement -1
• Tampon -1
• Notice d'emballage -1
• Sac de biosécurité -1

PT Teste Rápido de Antígeno COVID-19 (Fluido Oral)

Para Autodiagnóstico
Conteúdo:
• Dispositivo de teste -1
• Dispositivo de coleta -1
• Tampão -1
• Instruções de Uso -1
• Bolsa de Biosegurança -1

DA COVID-19 antigen-hurtigttest (spyttest)

Til selvtest
Indhold:
• Testenhed -1
• Indsamlingsenhed -1
• Buffer -1
• Brugervejledning -1
• Pose til farlig affald -1

DE COVID-19 Antigen-Schnelltest (Speichel)

Test zur Eigenanwendung
Inhalt:
• Testgerät -1
• Probenentnahmegerät -1
• Puffer -1
• Packungsbeilage -1
• Biologischer Sicherheitsbeutel -1

EL Test rýpídý epilympýnyo toú emvlyto COVID-19 (pópoví plýro)

Για αυτοέλεγχο
Περιεχόμενα:
• Συσκευή test -1
• Συσκευή συλλογής -1
• Πλύσιμο άδελφ -1
• Ένθετο συσκευασίας -1
• Τάπη βιοασφάλειας -1

FI COVID-19-pika-antigenitesti (syjtesti)

Käyttöä varten
Sisältää:
• Testikasetti -1
• Näytteenotusvälineet -1
• Puskuri -1
• Pakkausohjeet -1
• Bioturvallisuus pussi -1

IT Test Rapido per l'antigene COVID-19 (Fluido orale)

Per auto-test
Contenuti:
• Dispositivo per il test -1
• Dispositivo per la raccolta del campione -1
• Soluzione tampone -1
• Foglietto illustrativo -1
• Sacchetto di bio-sicurezza -1

NL COVID-19 Antigen Sneltest (Speeksel)

Voor zelftesten
Inhoud:
• Test apparaat -1
• Verzamel apparaat -1
• Buffer -1
• Verpakkingssel -1
• Bioveiligheidszak -1

NO COVID-19 antigen hurtigtest (Oralvæske)

For selvtesting
Innhold:
• Testenhet -1
• Oppsamlingsenhet -1
• Buffer -1
• Pakningsvedlegg -1
• Bøpse -1

1 Test



MedNet GmbH
Borkstrasse 10 48163 Muenster Germany



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550 Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



Do not drink the buffer in the kit. Carefully handle the buffer and avoid it contacting skin or eyes, rinse with plenty of running water immediately if contacting.

CE 1434

IVD

