




NB! Vienreizlietojams izstrādājums – nelietot atkārtoti!
Skābekļa avotam jāatbilst spēkā esošajiem noteikumiem.
Izstrādājumi jālieto kvalificētam veselības aprūpes personālam.

SAGATAVOŠANA UN SAVIENOŠANA
VIDĒJAS KONCENTRĀCIJAS OKSIGENTERAPIJAS MASKA
Pievienojiet cauruli skābekļa avotam. Otru galu pievienojiet maskas plastmasas savienotājam. Maska ir radīta plūsmai no 5 līdz 10 l/min un skābekļa koncentrācijai no 40% līdz 60%.
OXYGENTHERAPY MASKA AR MAINĪGU KONCENTRĀCIJU
Ja ir fiksēti gaisa-O2 atšķaidītāji (septiņas dažādas krāsas), pievienojiet izvēlēto atšķaidītāju gofrētajai caurulei; ja ir viens gaisa-O2 atšķaidītājs, izvēlieties koncentrāciju un pārliecinieties, ka regulatora mobilā daļa ir pilnībā ievilkta savā vietā, un pievienojiet atšķaidītāju gofrētajai caurulei.
Atšķaidītājam pievienojiet kausiņu. Atšķaidītājam pievienojiet nesaspiežamu cauruli. Otru galu pievienojiet maskas plastmasas savienotājam. Ieteicamā plūsma un skābekļa koncentrācija ir norādīta uz atšķaidītāja vai tā iepakojuma marķējuma.

AUGSTAS KONCENTRĀCIJAS OKSIGENTERAPIJAS MASKA
Saspiediet plastmasas rezervuāru. Pievienojiet cauruli skābekļa avotam. Otru galu pievienojiet maskas plastmasas savienotājam. Pielāgojiet kapacitāti, lai ieelpas laikā rezervuārs neiztukšotos vairāk par pusi tā tilpuma. Pievadītā skābekļa koncentrācija tiek saglabāta no 90% līdz 100%.
OXYGENTHERAPY MASKA AEROSOLAM
Noskrūvējiet vāciņu no pamatnes un iepildiet nozīmētās zāles. Uzskrūvējiet vāciņu. Nebulaizera augšpusei pievienojiet masku. Vienu caurules galu pievienojiet nebulaizera izejai, otru galu – skābekļa vai saspieštā gaisa avotam. Pārbaudiet, vai savienojums ir pareizs (aprakstīts tālāk).

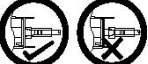

Zāļu ievades laikā ievērojiet ārsta norādījumus par zāļu lietošanu. Optimālai zāļu ievadīšanai ar nebulaizeru ieteicamā plūsma ir no 6 līdz 9 l/min ar spiedienu 3,44 bar (344 kPa jeb 50 psi). Ar nebulaizeru zāles var efektīvi ievadīt ar spiedienu 1,73 bar (173 kPa jeb 25 psi).
VISI IEPRIEKŠ MINĒTIE MODEĻI: SKĀBEKLĀ PLŪSMAS IESTATĪŠANA UN MASKAS UZLIKŠANA
Pārbaudiet, vai caurule ir droši pievienota skābekļa avotam. Pievadiet skābekli un pielāgojiet plūsmu atbilstoši ārsta norādēm. Uzlieciet masku pacientam, nosedzot muti un degunu. Aplieciet elastīgo lenti pāri pacienta galvai un ausīm un aplieciet to ap kaklu. Pavelkot pielāgojiet lentes ciešumu, lai tā turētos vietā. Saspiediet metāla deguna elementu, lai maska piegultu pacienta sejai.

OKSIGENTERAPIJAS MASKA TRAHEOSTOMIJAI
SKĀBEKLĀ TERAPIJAS MASKA TRAHEOSTOMIJAI AR MAINĪGU KONCENTRĀCIJU
Oksigenterapijas maska traheostomijai: ar aerosola cauruli (nav iekļauta šajā komplektā) savienojiet masku un gāzes avotu. Gāzes avotam atlasiet pareizo plūsmas ātrumu un pārbaudiet, vai caur masku plūst skābeklis.

Skābekļa terapijas maska traheostomijai ar mainīgu koncentrāciju: Rievotajai caurulei pievienojiet nepieciešamo atšķaidītāju. Atšķaidītājam pievienojiet kausiņu. Atšķaidītājam pievienojiet nesaspiežamu cauruli. Otru galu pievienojiet maskas plastmasas savienotājam. Ieteicamais plūsmas ātrums un pievadītā skābekļa koncentrācija ir norādīta uz atšķaidītāja.
Oksigenterapijas maska traheostomijai / Skābekļa terapijas maska traheostomijai ar mainīgu koncentrāciju: aplieciet elastīgo lenti ap kaklu un viegli pavelciet tās galu, līdz maska ir cieši uzlikta. Maskas ieejas savienojumu var pagriezt par 360°, un caurules novietojumu var pielāgot gulošai un stāvus pozīcijai. Pirms veikt atsūkšanu, atbrīvojiet masku (pavelkot lenti pretējā virzienā vai atvienojot vienu lentes pusi), ņemiet masku un veiciet atsūkšanu. Atkārtoti uzlieciet masku, kā norādīts iepriekš. Brīdinājums! Pārbaudiet, vai visi savienojumi ir cieši savienoti.

KONTRINDIKĀCIJAS
Skābekļa terapijai nav aprakstītu kontrindikāciju. Informāciju par zāļu ievadīšanu skatiet ar tām iekļautajā instrukcijā.

BRĪDINĀJUMI
Ja ierīce pretēji norādījumiem tiek lietota atkārtoti, var notikt tālāk norādītais:

- ierīce var būt netīra, un tajā var atrasties bioloģiskas atliekas, kas var izraisīt krusteniskas infekcijas;
- materiālu struktūras izmaiņas;
- sākotnējo izstrādājuma funkciju zudums.

- Pirms skābekļa avota pievienošanas pārbaudiet tā darbību.
- Caurules nejauša saspiešana vai samezģlošanās aptur normālu skābekļa plūsmu un var izraisīt savienotāja

- atvienošanas. Tāpēc lietotājiem ieteicams rūpīgi uzraudzīt ierīci.
- Skābekļa plūsma, kas pārsniedz 10 l/min var izraisīt nepatīkamu sistēmas troksni. No mitrinātāja nākošais šķidrums var iekļūt maisījumā, kas tiek pievadīta pacientam.
 - Visi iepriekš minētie modeļi ir vienreizlietojami, un tos nedrīkst nepārtraukti lietot vairāk nekā 30 dienas.
 - Koncentrēts skābeklis var izraisīt uzliesmojošu materiālu aizdegšanos. Lai novērstu ugunsgrēka vai sprādziena risku, sargājiet ierīci no iespējamiem aizdegšanās avotiem un skatiet skābekļa pievadei lietotā aprīkojuma piesardzības pasākumus.

UTILIZĀCIJA
Veselības aprūpes iestāžu atkritumi ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
VISPĀRĪGA PIEZĪMES
Ja ierīces lietošanas laikā vai pēc tā notiek nopietns negadījums, ziņojiet par to ražotājam un valsts iestādēm. Par jebkādiem ierīces darbības traucējumiem vai defektiem informējiet ražotāja kvalitātes dienestu.

Символи - Vysvětlení symbolů - Značenje simbola - Jelmagyarázat - Simbolių legenda - Simbolu apzīmējumi - Legendă de simboluri

	BG	CS	HR	HU	LT	LV	RO	SR
	Съответства на действащото европейско законодателство относно медицинските изделия	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích	U skladu s važećim europskim zakonodavstvom o medicinskim proizvodima	Megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó hatályos európai jogszabályoknak	Atitinka galiojančius Europos teisės aktus dėl medicinos priemonių	Atbilst pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem par medicīnas ierīcēm	Conform cu legislația europeană în vigoare privind dispozitivele medicale	Usaglašeno sa tekućim evropskim propisima o medicinskim sredstvima
	Направете справка с инструкциите за употреба	Čtěte uživatelskou příručku	Proučite upute prije korištenja	Consult használati utasítás	Žr. naudojimo instrukcijas	Skatīt lietošanas instrukciju	Consultați instrucțiunile de utilizare	Konsultujte instrukcije za upotrebu
	Дата на производство	Datum výroby	Datum proizvodnje	Gyártás dátuma	Pagaminimo data	Ražošanas datums	Data de fabricație	Datum proizvodnje
	Производитель	Výrobce	Proizvođač	Gyártó	Gamintojas	Ražotājs	Producător	Proizvođač
	Дистрибутор	Distributor	Distributer	Forgalmazó	Platintojas	Izplatītājs	Distribuitor	Distributer
	Каталоген номер	Katalogové číslo	Kataloški broj	Katalógusszám	Katalogo numeris	Kataloga numurs	Număr de catalog	Kataloški broj
	Партиден номер	Číslo šarže	LOT	Tételszám	Partijos kodas	Partijas kods	Numar de lot	Serijski broj
	Използвай при	Spotřebujte do	Lejaráti dátum	Lejáriti dátum	Tinka iki	Izmantošanai	Data limită de utilizare	Rok upotrebe
	Darabszám	Počet kusů	Količina komada	Darabszám	Dalių kiekis	Vienumu daudzums	Număr de bucăți	Količina komada
	Не се допуска повторна употреба	Nepoužívat opakovaně	Nemojte ponovno koristiti	Ne használja több alkalommal	Pakartotinai nenaudoti	Nelietot atkārtoti	A nu se reutiliza	Zabranjena ponovna upotreba
	Не съдържа естествен гумен латекс	Neobsahuje přírodní latex	Ne sadrži prirodnu gumu i lateks	Nem tartalmaz természetes latexgumit	Sudėtyje nėra latekso	Nesatur dabīgās gumijas lateksu	Nu conține cauciuc natural (latex)	Ne sadrži prirodnu gumu lateks
	Пазете от пряка слънчева светлина	Nevystavujte slunečnému záření	Štititi od direktnog sunčevog svjetla	Tartsa távol a napfénytől	Saugoti nuo saulės spindulių	Nepakļaut produkta atrašanos tiešā saules gaismā	A se feri de razele soarelui	Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Не съдържа фталати: БЕЗ DEHP	Neobsahuje ftaláty: DEHP FREE	Ne sadrži ftalate: DEHP FREE	Nem tartalmaz ftalátokat: DEHP MENTES	Nesatur ftalátus: BEZ DEHP	Nesatur ftalátus: BEZ DEHP	Nu conține ftalați: FĂRĂ DEHP	Ne sadrži ftalate: BEZ DEHP
	Температурни ограничения	Omezení teploty	Temperaturni raspon	Hőmérséklet-határértékek	Temperatūros apribojimas	Temperatūras ierobežojums	Limite de temperatură	Ograničenje temperature
	Ограничения на влажността	Omezení vlhkosti	Raspon vlažnosti zraka	Páratartalom-határértékek	Drėgnio apribojimas	Mitruma ierobežojumi	Limite de umiditate	Ograničenje vlažnosti vazduha
	Медицинско изделие	Zdravotnický prostředek	Medicinski proizvod	Orvostechnikai eszköz	Medicinos priemonė	Medicīniska ierīce	Dispozitiv medical	Medicinsko sredstvo
	Уникален идентификатор на изделията	Jedinečným identifikátorem prostředku	Jedinstvena identifikacija proizvoda	Egyedi eszközazonosító	Unikalusis priemonės identifikatorius	Ierīces unikālais identifikators	Identificatorul unic al dispozitivului medical	Jedinstveni identifikator uređaja