



БЪЛГАРСКИ

Предпазната яка за домашни любимци на Contec е изработена от устойчива пластмаса, като осигурява защита за домашния Ви любимец по време на възстановяване. Здравият дизайн спомага за предпазване от надраскване, хапане или дъвкане, като осигурява безопасен процес на оздравяване.

Начин на употреба

1.




Измерете обиколката на врата на домашния любимец и изберете подходящия размер яка според таблицата с размери. Уверете се, че след поставяне, носът на домашния любимец не излиза извън кръга, за да се предотврати ефективно близане и хапане на рани.

2.

Внимателно поставете яката около врата на домашния любимец, като я насочите в правилната посока (с широката част напред), като се уверите, че не пречи на дишането или храненето на домашния любимец.

3. F

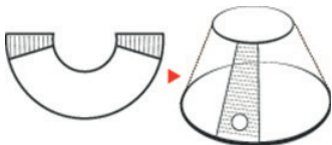

След като коригирате яката до подходяща степен на стягане, залепете плътно велкро лентата. След поставяне се уверете, че домашният любимец може да се движи свободно, но не може лесно да я сваля или да се освободи.

4.

Когато се носи за първи път, домашните любимци може да проявят нежелани реакции. Дайте време на домашния любимец да се адаптира, като следите движенията му, за да се уверите, че носенето на яката не влияе на нормалните му дейности.

Почистване на предпазната PVC яка: Натъркайте с мека сапунена вода, изплакнете с влажна кърпа, изсушете на сянка. Без накисване, агресивни химикали или излагане на слънце.



Измерване с линия в домашни условия

Спецификация	Подходящ за врат	дебелина	Препоръчвано тегло
Много голям	49-56 cm	28 cm	До 40 kg
№1	43-50 cm	22 cm	До 30 kg
№2	41-48 cm	20,5 cm	До 15 kg
№3	36-42 cm	18 cm	До 10 kg
№4	31-36 cm	13,5 cm	До 7,5 kg
№5	26-29 cm	13 cm	До 5 kg
№6	19-23 cm	11 cm	До 4 kg
№7	17-20 cm	9 cm	До 3 kg

Начин на почистване

Почистване на предпазната PVC яка: Натъркайте с мека сапунена вода, изплакнете с влажна кърпа, изсушете на сянка. Без накисване, агресивни химикали или излагане на слънце.

REF	VET0007
	VET0006
	VET0005
	VET0004
	VET0003
	VET0002
	VET0001



Contec Medical Systems Co.,Ltd.
Address: No.112 Qinhuang West Street,
Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-335-8015430
Fax: +86-335-8015588
E-mail: cms@contecmed.com.cn
Website: <http://www.contecmed.com>
Made in China