




tabulky vyberte vhodný krční límec. Ujistěte se, že po nasazení nos zvířete nepřesahuje okraj kruhu, aby se účinně zabránilo olizování a okusování ran.

2.

Jemně nasuňte obojek na krk domácího mazlíčka tak, aby směřoval správným směrem (širší částí dopředu), a ujistěte se, že nebrání dýchání ani přijímání potravy.

3. F

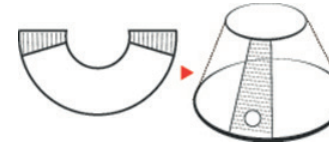


po nastavení správné těsnosti límce se pevně přilepí suchý zip. Po nasazení se ujistěte, že se mazlíček může volně pohybovat, ale nemůže si límec snadno sundat ani se z něj vyprostit.

4.

Při prvním nasazení mohou domácí mazlíčci vykazovat známky nepohodlí. Dejte mazlíčkovi trochu času na zvyknutí a přitom sledujte jeho pohyby, abyste se ujistili, že nošení smýčky neomezuje jeho běžné činnosti.

Čištění Alžbetinského límce z PVC: Otřete jemným mýdlovým roztokem, opláchněte vlhkým hadříkem a nechte uschnout ve stínu. Nenamáčejte, nepoužívejte agresivní chemikálie a nevystavujte slunečnímu záření.

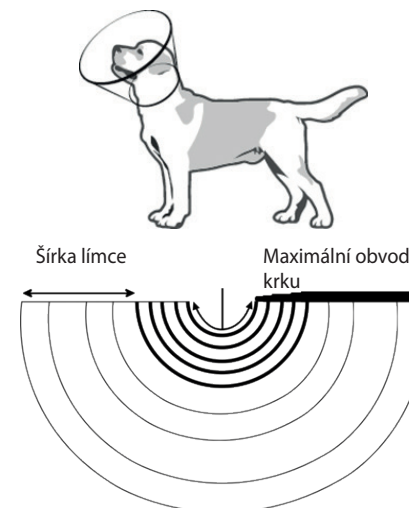


ČEŠTINA

Alžbetinský límec Contec je vyroben z odolného plastu a poskytuje vašemu domácímu mazlíčkovi ochranu během rekonvalescence. Jeho odolná konstrukce zabraňuje poškrábání, kousání nebo okusování a zajišťuje tak bezpečný průběh hojení.

Způsob použití

1.

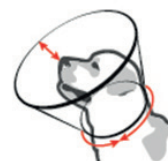

Změřte obvod krku zvířete a podle velikostní

Domácí změření metrem

Specifikace	Vhodné pro krk	hloubka	Doporučená hmotnost
Extra Large	49-56 cm	28 cm	Do 40 kg
Č. 1	43-50 cm	22 cm	Do 30 kg
Č. 2	41-48 cm	20,5 cm	Do 15 kg
Č.3	36-42 cm	18 cm	Do 10 kg
Č. 4	31-36 cm	13,5 cm	Do 7,5 kg
Č. 5	26-29 cm	13 cm	Do 5 kg
Č. 6	19-23 cm	11 cm	Do 4 kg
Č.7	17-20 cm	9 cm	Do 3 kg

Způsob čištění

Čištění Alžbetinského límce z PVC: Otřete jemným mýdlovým roztokem, opláchněte vlhkým hadříkem a nechte uschnout ve stínu. Nenamáčejte, nepoužívejte agresivní chemikálie a nevystavujte slunečnímu záření.

REF	VET0007
	VET0006
	VET0005
	VET0004
	VET0003
	VET0002
	VET0001



Contec Medical Systems Co.,Ltd.
Address: No.112 Qinhuang West Street,
Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-335-8015430
Fax: +86-335-8015588
E-mail: cms@contecmed.com.cn
Website: <http://www.contecmed.com>
Made in China