


Legen Sie den Kragen vorsichtig um den Hals Ihres Haustiers und achten Sie auf die richtige Ausrichtung (die breite Seite zeigt nach vorne), ohne Atmung oder Futteraufnahme zu beeinträchtigen.

3. F

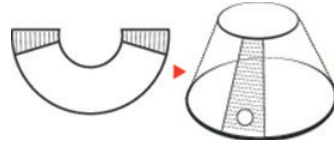

Nachdem Sie den Kragen auf die gewünschte Weite eingestellt haben, wird der Klettverschluss fest verschlossen. Stellen Sie nach dem Anlegen sicher, dass sich Ihr Haustier frei bewegen kann, sich jedoch nicht leicht aus dem Kragen befreien oder ihn zerstören kann.

4.

Beim ersten Tragen kann es bei Haustieren zu Unwohlsein kommen. Geben Sie Ihrem Haustier Zeit, sich daran zu gewöhnen, und beobachten Sie seine Bewegungen, um sicherzustellen, dass das Tragen die normalen Aktivitäten nicht beeinträchtigt.


Reinigung des PVC-Schutzkragens: Mit mildem Seifenwasser abwischen, mit einem feuchten Tuch nachspülen und im Schatten trocknen. Nicht einweichen, keine aggressiven Chemikalien verwenden und nicht der Sonneneinstrahlung aussetzen.

DEUTSCH

Der Schutzkragen von Contce besteht aus robustem Kunststoff und schützt Ihr Haustier während der Genesung. Sein stabiles Design verhindert Kratzen, Beißen oder Kauen und sorgt so für einen sicheren Heilungsprozess.


Anwendung

1.

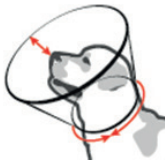

Messen Sie den Halsumfang Ihres Haustiers und wählen Sie anhand der Größentabelle den passenden Schutzkragen aus. Stellen Sie sicher, dass nach dem Anlegen die Nase des Haustiers nicht über den Rand des Kragens hinausragt, um das Lecken und Beißen von Wunden wirksam zu verhindern.

2.

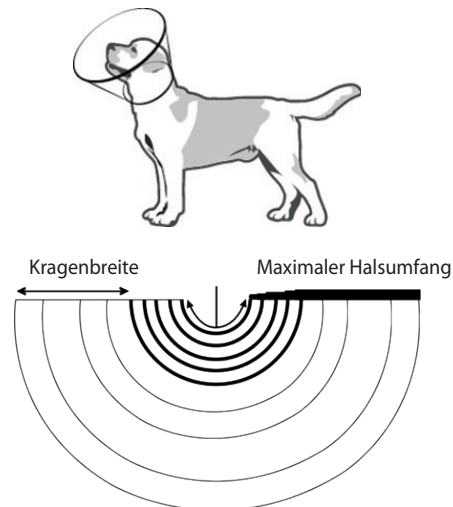

Messung mit einem Lineal zu Hause

Technische Daten	Geeignet für Halsumfang	Tiefe	Empfohlenes Gewicht
Extra Large	49-56 cm	28 cm	Bis 40 kg
Nr. 1	43-50 cm	22 cm	Bis 30 kg
Nr. 2	41-48 cm	20,5 cm	Bis 15 kg
No.3	36-42 cm	18 cm	Bis 10 kg
Nr. 4	31-36 cm	13,5 cm	Bis 7,5 kg
Nr. 5	26-29cm	13 cm	Bis 5 kg
Nr. 6	19-23 cm	11 cm	Bis 4 kg
No.7	17-20 cm	9 cm	Bis 3 kg

Reinigungsverfahren

Reinigung des PVC-Schutzkragens: Mit mildem Seifenwasser abwischen, mit einem feuchten Tuch nachspülen und im Schatten trocknen. Nicht einweichen, keine aggressiven Chemikalien verwenden und nicht der Sonneneinstrahlung aussetzen.

REF	VET0007
	VET0006
	VET0005
	VET0004
	VET0003
	VET0002
	VET0001



Contec Medical Systems Co.,Ltd.
Address: No.112 Qinhuang West Street,
Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-335-8015430
Fax: +86-335-8015588
E-mail: cms@contecmed.com.cn
Website: <http://www.contecmed.com>
Made in China