




#### DANSK

Contec halskraven er fremstillet af slidstærk plast og beskytter dit kæledyr under helingsforløbet. Den robuste konstruktion forhindrer, at dyret kradser, bider eller tygger, hvilket sikrer en sikker helingsproces.

Sådan bruges den

1.

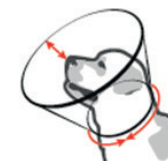


Mål omkredsen af kæledyrets hals, og vælg den egnede halskrave ud fra størrelsestabellen. Sørg for, at kæledyrets næse ikke stikker ud over kanten af kraven, når den er på, for effektivt at forhindre, at det slikker eller bider i sårene.

2.

Sæt forsigtigt kraven fast omkring kæledyrets hals, så den peger i den rigtige retning (med den brede ende fremad), og sørg for, at den ikke påvirker kæledyrets vejtrækning eller spisning.

3. F

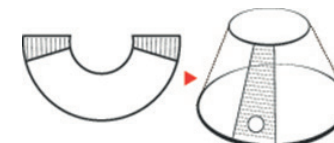


Når kraven er justeret til den rette stramhed, skal velcrobåndet fastgøres godt. Sørg efter påsætning for, at kæledyret kan bevæge sig frit, men ikke let kan tage den af eller vriste sig fri.

4.

Når kraven bruges for første gang, kan kæledyret reagere med ubehag. Giv kæledyret lidt tid til at vænne sig til den, og hold øje med dets bevægelser for at sikre, at kraven ikke hindrer dets normale aktiviteter.

Rengøring af PVC-halskrave: Aftør med mildt sæbevand, rens med en fugtig klud og lad tørre i skyggen. Må ikke lægges i blød, udsættes for stærke kemikalier eller direkte sollys.

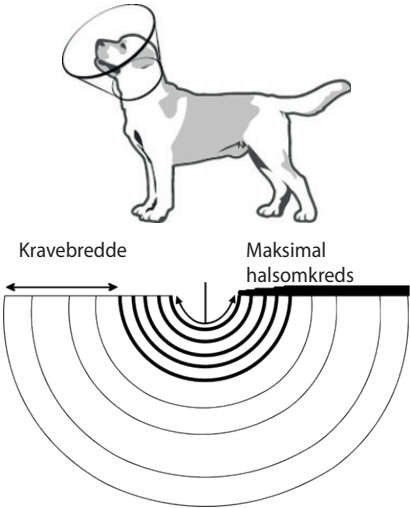

Mål med et målebånd derhjemme

| Specifikation | Passer til hals | dybde  | Anbefalet vægt |
|---------------|-----------------|--------|----------------|
| Extra Large   | 49-56cm         | 28cm   | Op til 40 kg   |
| Nr. 1         | 43-50cm         | 22cm   | Op til 30 kg   |
| Nr. 2         | 41-48cm         | 20,5cm | Op til 15 kg   |
| No.3          | 36-42cm         | 18cm   | Op til 10 kg   |
| Nr. 4         | 31-36cm         | 13,5cm | Op til 7,5 kg  |
| Nr. 5         | 26-29cm         | 13cm   | Op til 5 kg    |
| Nr. 6         | 19-23cm         | 11cm   | Op til 4 kg    |
| No.7          | 17-20cm         | 9cm    | Op til 3 kg    |

Sådan rengøres den

Rengøring af PVC-halskrave: Aftør med mildt sæbevand, rens med en fugtig klud og lad tørre i skyggen. Må ikke lægges i blød, udsættes for stærke kemikalier eller direkte sollys.

|     |         |
|-----|---------|
| REF | VET0007 |
|     | VET0006 |
|     | VET0005 |
|     | VET0004 |
|     | VET0003 |
|     | VET0002 |
|     | VET0001 |



**Contec Medical Systems Co.,Ltd.**  
Address: No.112 Qinhuang West Street,  
Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Tel: +86-335-8015430  
Fax: +86-335-8015588  
E-mail: cms@contecmed.com.cn  
Website: <http://www.contecmed.com>  
Made in China