


EESTI

Contec Elizabethani krae on valmistatud vastupidavast plastist, mis kaitseb teie lemmiklooma taastumise ajal. Selle vastupidav disain aitab vältida kratsimist, hammustamist või närimist, tagades turvalise paranemise. Kuidas toodet kasutada

1.

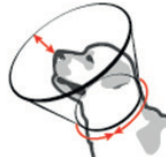


Mõõtke lemmiklooma kaela ümbermõõt ja valige sobib Elizabethi kraering suuruste tabeli põhjal. Veenduge, et kandmise ajal ei ulatuks lemmiklooma nina krae ülemisest servast välja, et kindlalt vältida haavade lakkumist ja hammustamist.

2.

Pange krae õrnalt lemmiklooma kaela ümber õiges suunas (lai serv ettepoole), veendudes, et see ei takista lemmikloomal hingamist ega söömist.



3. F

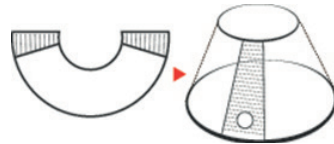

pingutage kraed sobiva suuruseni; takjapael kindlalt kinni. Kandmise ajal veenduge, et lemmikloom saab vabalt liikuda, kuid ta ei saa kraed kergesti eemaldada ega lahti rebida.

4.

Esmakordsel kandmisel võivad lemmikloomad ebamugavust tunda ja krae kandmisele reageerida. Andke lemmikloomale aega kohanemiseks. Samas jälgige tema liigutusi, et veenduda, et toote kandmine ei mõjutaks tema tavapäraseid tegevusi. PVC Elizabethani krae puhastamine: Peske lapiga, mis on niisutatud neutraalse puhastusvahendiveega, loputage ja kuivatage varjulises kohas. Ärge leotage, kasutage kemikaale ega jätke päikese kätte.

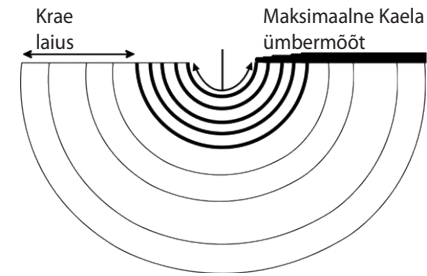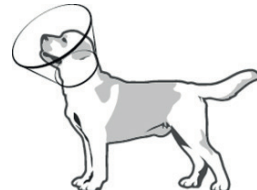

Mõõtke mõõdulindiga

Spetsifikatsioon	Sobilik kaela ümbermõõdule	Sügavus	Soovitav kaal
Eriti suur	49-56cm	28cm	40 kg piires
Nr 1	43-50cm	22cm	30 kg piires
Nr 2	41-48cm	20,5cm	15 kg piires
No.3	36-42cm	18cm	10 kg piires
Nr 4	31-36cm	13,5cm	7,5 kg piires
Nr 5	26-29cm	13cm	5 kg piires
Nr 6	19-23cm	11cm	4 kg piires
No.7	17-20cm	9cm	3 kg piires

Kuidas toodet puhastada

PVC Elizabethani krae puhastamine: Peske lapiga, mis on niisutatud neutraalse puhastusvahendiveega, loputage ja kuivatage varjulises kohas. Ärge leotage, kasutage kemikaale ega jätke päikese kätte.

REF	VET0007
	VET0006
	VET0005
	VET0004
	VET0003
	VET0002
	VET0001



Contec Medical Systems Co.,Ltd.
Address: No.112 Qinhuang WestStreet,
Economic &Technical Development Zone,Qinhuangdao,Hebei Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-335-8015430
Fax: +86-335-8015588
E-mail:cms@contecmed.com.cn
Website:http://www.contecmed.com
Made in China