




ESPAÑOL

El collar isabelino Contec está fabricado en plástico resistente, lo que garantiza la protección de su mascota durante la recuperación. Su diseño robusto ayuda a evitar que la mascota se rasque, muerda o mastique, lo que garantiza un proceso de recuperación seguro.

Modo de uso

1.

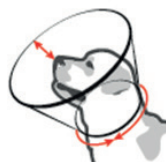


Mida la circunferencia del cuello de la mascota y seleccione el collar isabelino adecuado según la tabla de tamaños. Después de colocarlo en la mascota, asegúrese de que la nariz no sobrepase el borde del círculo para impedir de forma eficaz que la mascota se lama o muerda las heridas.

2.

Coloque con cuidado el collar alrededor del cuello de la mascota, orientado en la dirección correcta (con la parte ancha hacia adelante), asegurándose de que no afecte a la respiración ni a la alimentación de la mascota.

3. F

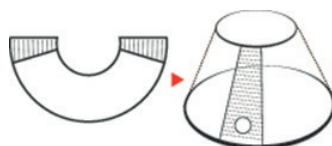


tras ajustar el collar con la firmeza adecuada, el velcro queda bien fijado. Una vez colocado, asegúrese de que la mascota puede moverse libremente pero no pueda quitárselo ni romperlo.

4.

Cuando se coloca por primera vez, las mascotas pueden tener reacciones de incomodidad. Deje que la mascota se acostumbre poco a poco al collar, observando sus movimientos para asegurarse de que, con el collar puesto, pueda realizar sus

actividades habituales.

Limpieza del collar isabelino de PVC: Limpie con agua jabonosa suave, enjuague con un paño húmedo, y dejar secar a la sombra. No poner en remojo, no utilice productos químicos agresivos y no lo exponga al sol.

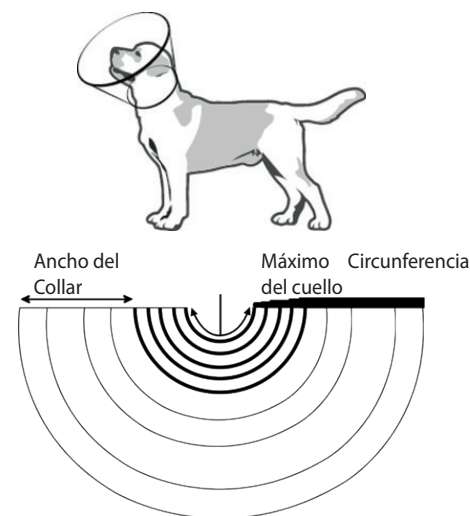

Medir con una regla en casa

Especificaciones	Adecuado para cuello	profundidad	Altura recomendada
Extra grande	49-56 cm	28cm	Hasta 40 kg
No. 1	43-50 cm	22cm	Hasta 30 kg
No. 2	41-48 cm	20,5cm	Hasta 15 kg
No.3	36-42 cm	18cm	Hasta 10 kg
No. 4	31-36 cm	13,5cm	Hasta 7,5 kg
No. 5	26-29cm	13cm	Hasta 5 kg
No. 6	19-23 cm	11cm	Hasta 4 kg
No.7	17-20 cm	9cm	Hasta 3 kg

Modo de limpieza

Limpieza del collar isabelino de PVC: Limpie con agua jabonosa suave, enjuague con un paño húmedo, y dejar secar a la sombra. No poner en remojo, no utilice productos químicos agresivos y no lo exponga al sol.

REF	VET0007
	VET0006
	VET0005
	VET0004
	VET0003
	VET0002
	VET0001



Contec Medical Systems Co.,Ltd.
Address: No.112 Qinhuang WestStreet,
Economic &Technical Development Zone,Qinhuangdao,Hebei Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-335-8015430
Fax: +86-335-8015588
E-mail:cms@contecmed.com.cn
Website:http://www.contecmed.com
Made in China