


SUOMI

Contec Elizabethan -kauluri on valmistettu kestävästä muovista, ja se suojaa lemmikkiäsi parantumisen aikana. Sen vankka rakenne estää raapimisen, puraisut tai pureskelun, mikä takaa turvallisen paranemisen.

Käyttöohje

1.

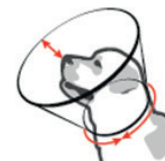


Mittaa lemmikin kaulanympärys ja valitse sopiva Elizabeth-rengas kokotaulukon perusteella. Varmista, että haavojen nuoleminen ja puremisen estämiseksi lemmikin kuono ei ulotu renkaan ulkopuolelle, kun kauluri on paikoillaan.

2.

Kiinnitä kauluri hellävaroen lemmikin kaulan ympärille oikeaan suuntaan (leveä pää eteenpäin) ja varmista, että kauluri ei vaikuta lemmikin hengittämiseen tai syömiseen.

3. F


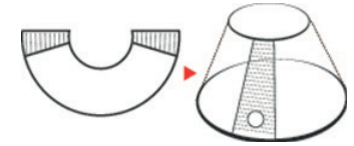


kun kauluri on säädetty sopivan tiukaksi, tarranauha kiinnitetään tiukasti. Kun kauluri on paikoillaan, varmista, että lemmikki voi liikkua vapaasti, mutta ei pääse helposti poistamaan kauluria tai vapautumaan siitä.

4.

Kun kauluria käytetään ensimmäistä kertaa, lemmikit saattavat tuntea olonsa epämukavaksi. Anna lemmikille aikaa sopeutua. Tarkkaile sen liikkeitä varmistaaksesi, että kaulurin käyttö ei vaikuta sen tavallisiin puuhiin.

PVC Elizabethan -kaulurin puhdistus: Pyyhi laimealla saippuavedellä, huuhtelee kostealla liinalla ja anna kuivua varjossa. Älä upota veteen, äläkä käytä voimakkaita kemikaaleja tai altista auringonvalolle.

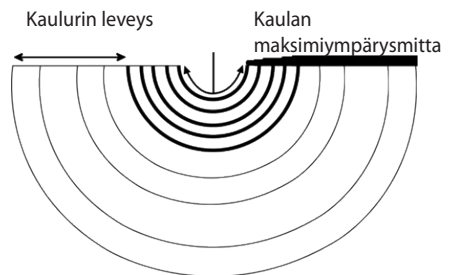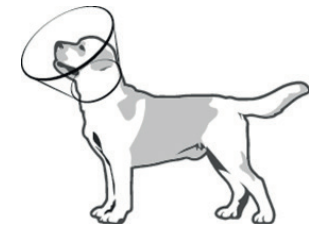

Mittaa mittanauhalla kotona

Spesifikaatio	Soveltuu kaulalle	syvyys	Suosittelut paino
Erikoissuuri	49-56 cm	28 cm	40 kg:n sisällä
Nro 1	43-50 cm	22 cm	30 kg:n sisällä
Nro 2	41-48 cm	20,5 cm	15 kg:n sisällä
Nro 3	36-42 cm	18 cm	10 kg:n sisällä
Nro 4	31-36 cm	13,5 cm	7,5 kg:n sisällä
Nro 5	26-29 cm	13 cm	5 kg:n sisällä
Nro 6	19-23 cm	11 cm	4 kg:n sisällä
Nro 7	17-20 cm	9 cm	3 kg:n sisällä

Puhdistus

PVC Elizabethan -kaulurin puhdistus: Pyyhi laimealla saippuavedellä, huuhtelee kostealla liinalla ja anna kuivua varjossa. Älä upota veteen, äläkä käytä voimakkaita kemikaaleja tai altista auringonvalolle.

REF	VET0007
	VET0006
	VET0005
	VET0004
	VET0003
	VET0002
	VET0001



Contec Medical Systems Co.,Ltd.
Address: No.112 Qinhuang West Street,
Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-335-8015430
Fax: +86-335-8015588
E-mail: cms@contecmed.com.cn
Website: <http://www.contecmed.com>
Made in China